


ACTIVESHOP®


NÁVOD K POUŽITÍ

ELEGANTE 882 SKIN SCRUB + DARSONVAL

Model 862 HF/M-882

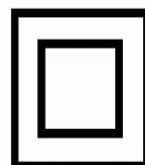

Technické údaje: Vnitřní vybavení: Vnitřní vybavení: Vnitřní vybavení: Vnitřní vybavení: Vnitřní vybavení: Vnitřní vybavení: Vnitřní vybavení: Vnitřní vybavení: Vnitřní vybavení: vč:

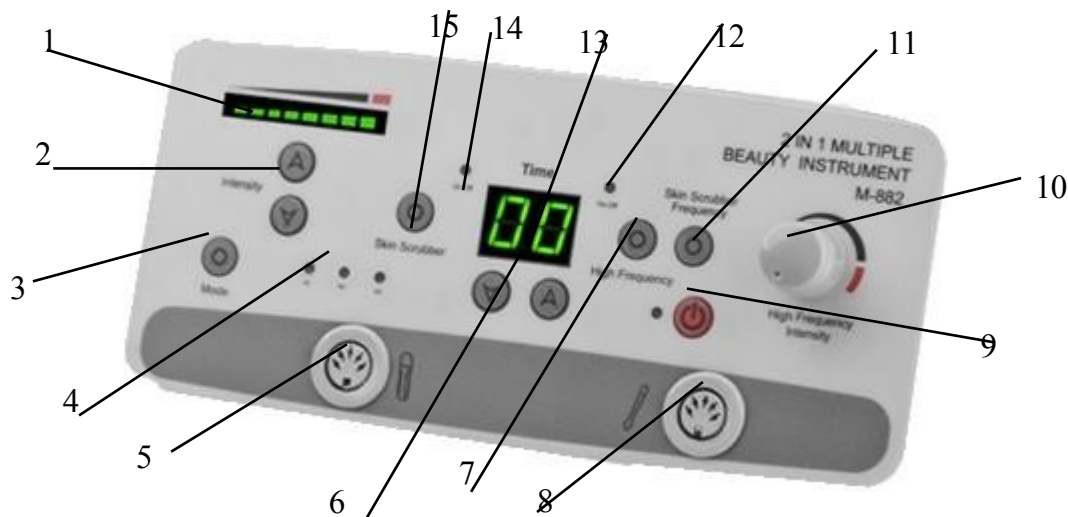

1. Indikátor intenzity
2. Nastavení intenzity
3. Výběr možnosti ošetření pro kavitační peeling (M1- kavitační peeling, M2- sonoforéza, M3- soboforéza s mikromasáží.
4. Provozní světlo pro příslušnou možnost ošetření kavitačním peelingem,
5. připojení kavitačního peelingu,
6. Nastavení provozní doby,
7. výběr možnosti ošetření - darsonval,
8. Připojení darsonvalu,
9. Spuštění/ukončení darsonvalu/kavitačního peelingu,
10. Nastavení intenzity darsonvalu,
11. Nastavení výkonu kavitační peelingové špachtle
12. Světlo pro provoz darsonvalu
13. Zobrazení času
14. Kontrolka pro kavitační peeling,
15. Výběr možnosti ošetření - kavitační peeling

DARSONWAL

D'Arsonvalovy proudy jsou jednou z variant vysokofrekvenčních proudů. Přístroj produkuje ozon pomocí elektrostatických výbojů vznikajících v peletách.

Působení d'Arsonvalových proudů je založeno především na účinku na cévy a vegetativní nervová zakončení. Jiskření, ke kterému dochází mezi elektrodou a kůží, způsobuje rozšíření cév a ovlivňuje podkožní tkáň. Vznikající ozon má dezinfekční účinek. V přístroji jsou na výběr 3 pelety. Ošetření se provádí po dobu 5 až 7 minut.

INDIKACE:

- Poruchy kožního cití,
- alopecie areata,
- Stimulace oběhového systému,
- Dezinfekce kůže,

KONTRAINDIKACE:

- Těhotenství
- Hypertenze
- Otoky
- Nervová hyperaktivita
- Srdeční onemocnění
- Zánětlivé kožní onemocnění
- Horečka
- Astma

- Epilepsie
- Kovové implantáty
- Rosacea
- Rozšířené cévy
- Alergické kožní onemocnění

Návod k použití

1. Připojte rukojeť od darsonwala ke vstupu č. 8.
2. Pomocí tlačítka 6 nastavte dobu ošetření.
3. Stiskněte tlačítko 7, rozsvítí se kontrolka připravenosti darsonwala (12).
4. Nastavte intenzitu ošetření pomocí knoflíku (10).
5. Stisknutím tlačítka 9 zahájíte ošetření.

Kavitační peeling je především bezbolestné čištění pokožky pomocí ultrazvukových vibrací. Umožňuje důkladné odstranění přebytečného kožního mazu z pórů a vlasových folikulů a také zbavení černých teček. Při použití peelingu dochází k jevu kavitace, ke kterému dochází při kontaktu ultrazvuku s kapalinou, poté se vytvoří mikroskopické bublinky plynu a proběhne řada chemických procesů, jejichž výsledkem je rozpad odumřelých buněk rohové vrstvy.

INDIKACE

- Vyvýšení obličejového oválu a brady,
- Zpevnění struktury kůže,
- Vyhlazení povrchových vrásek,
- Redukce "váčků" pod očima a "kuřích ok",
- rekonstrukce kolagenu,
- terapie proti stárnutí - prevence,
- redukce nečistot, rozšířených pórů,
- Zpevnění struktury pleti.
- Čištění pleti.

Návod k použití

1. Připojte kavitační peelingovou špachtli ke vstupu 5,
2. Pomocí tlačítka 6 zvolte dobu ošetření,
3. Zvolte typ ošetření pomocí tlačítka 3,
4. Tlačítkem 2 zvolte intenzitu ošetření (na displeji se zobrazí indikátor intenzity 1.),
5. Stiskněte tlačítko 15, rozsvítí se kontrolka připravenosti kavitačního peelingu (14),
6. Stisknutím tlačítka 9 zahájíte ošetření.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zařízení neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do zařízení nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
(a) do spotřebiče se dostala kapalina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převržení přístroje nebo poškození jeho krytu.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když se spotřebičem skončíte.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a n a o p a k).
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných závad kontaktujte an . autorizované servisní středisko, abyste předešli jakémukoli nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi s přístrojem, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž k používání přístroje bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES

o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je třeba použítá elektrozařízení sbírat odděleně a poté je odevzdat na sběrných místech pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také ve společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě v rozmezí (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Při skladování a přepravě nesmí být přístroj hosen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.