






NÁVOD K POUŽITÍ MASÁŽNÍHO  
PŘÍSTROJE MINI CUPPING

## POPIS IKON

# DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ, KTERÁ SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

	Pozor! S odkazem na příložené dokumenty
	Pozorně si přečtěte návod, prosím
	Nevkládejte špendlíky
	DC (jednosměrný)
	Životnost elektronických informačních produktů na ochranu životního prostředí

\* Před použitím výrobku si pozorně přečtěte návod a řádně si ho uschovejte!

## PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- ① Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte návod k použití.
- ② Tento produkt není zdravotnická pomůcka a nedoporučuje se pro lékařské použití. Není určen k lékařskému ošetření v nemocnicích.
- ③ Výrobek má ohřevný povrch a neměli by ho používat lidé, kteří nejsou citliví na teplo, malé děti nebo lidé, kteří se neumí o sebe postarat.
- ④ Tento produkt by neměly používat děti, pokud to rodiče nebo zákonní zástupci předem nenastavili, nebo pokud děti nedostaly dostatečné pokyny k jeho používání.
- ⑤ Při používání dávejte pozor na teplotu kamene bian po zahřátí, zvolte si vlastní vhodný teplotní rozsah, zejména teplotu přijatelnou pro pokožku, a nepřehřívejte ho, abyste předešli opaření.
- ⑥ Při používání nenatírejte na ohřívané části jinou látku s vlastní zahřívací schopností, jako je světlicový olej, pasta z tygří kosti atd.
- ⑦ Pokud se po použití tohoto produktu s esenciálním olejem objeví zbytky zápachu, otřete ho čistým vlhkým hadříkem, aby byl výrobek čistý. Předtím, než ho dáte jiným, je potřeba ho vydezinfikovat 75% alkoholem, abyste se vyhnuli infekci.
- ⑧ Tento produkt je vyroben z přírodního kamene bian. Je normální, pokud má drobné praskliny.
- ⑨ Během nabíjení, prosím, přístroj nepoužívejte.
- ⑩ Před ukončením používání přístroj vypněte.
- ⑪ Tento produkt by neměl spadnout nebo na něj něco spadnout z vysoké výšky. Mělo by se s ním zacházet opatrně a dávat pozor, protože je křehký.
- ⑫ Toto zařízení není vodotěsné. Je přísně zakázáno používat ho s mokřýma rukama a nohama a je přísně zakázáno používat ho ve vlhkém prostředí.
- ⑬ Je přísně zakázáno používat chemická rozpouštědla k čištění těla stroje, nabíjecího kabelu atd.
- ⑭ Nerozebírejte přístroj svépomocí a provozní škody způsobené kýmkoliv jiným než technikem společnosti budou nést jednotlivci.

## PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

- 1 Před použitím esenciálních olejů by ho měli lidé s křehkou a citlivou pokožkou otestovat na vnitřní straně ramene nebo za uchem. Pokud se objeví zarudnutí, otok a svědění, přestaňte ho používat.
- 2 Před použitím dezinfikujte základnu produktu (doporučuje se použít 75% alkohol).
- 3 Při používání, prosím, dbejte na to, abyste udrželi doma teplo, nepoužívejte výrobek v klimatizovaných, větraných a chladnějších prostorech. Pokojová teplota asi 25 °C je vhodnější.
- 4 Při používání škrábejte jedním směrem. Nejezděte nahoru a dolů ani doleva a doprava.
- 5 Při jeho používání se objeví stopy, když je místní mikrocirkulace slabá a stopy Gua Sha se samy absorbují. To je normální.
- 6 Ke každodennímu používání hlavně s jemnou masáží. Nesnažte se najít stopy Gua Sha, škrábejte, dokud se neotevřou póry a pokožka nebude zarudlá a horká.
- 7 Doba použití by neměla být příliš dlouhá a neměla by být povolena velkoplošná masáž.
- 8 Po použití otřete esenciální olej z natřené části čistou papírovou utěrkou nebo vlnou, aby zůstala čistá.
- 9 Po použití byste se měli vyhýbat chladu a větru, prosím, nejezte syrové nebo studené jídlo.
- 10 Po použití je vhodné vypít teplou vodu a odpočívat cca 15-20 minut.
- 11 Po použití jsou cévy na povrchu kůže rozšířeny, a proto byste měli počkat 30-45 minut, než se osprchujete.
- 12 Lidé, kteří jsou slabí, staří a mají málo nemocí, mohou používat lehčí techniky.
- 13 Hlava a obličej mohou být ošetřeny lubrikačními médii, jako je krém na obličej, a každodenní použití lze provádět přes oblečení.
- 14 Charakteristiky znamének Gua Sha: Barva znamének je jasně červená, stínově červená, fialová a černá. Tvar znamének se jeví jako rozptýlený, hustý nebo jako kombinace obou.

## PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM

### ZAKÁZANÉ POUŽÍVÁNÍ

- ① Lidé s krvácením nebo sklonem ke krvácení mají používání zakázáno. Je také zakázáno u lidí s kardiostimulátorem, protože může dojít k selhání srdce.
- ② Pacienti po operaci (včetně bypassu, stentu, náhrady chlopně atd.) by ho měli používat opatrně.
- ③ Zakázáno těhotným ženám!
- ④ Zakázáno pro pacienty s vysokou teplotou.
- ⑤ Zakázáno pacientům s nádory nebo rakovinou v těle.
- ⑥ Používání při kritických onemocněních, jako je těžké onemocnění srdce, selhání ledvin, jaterní cirhóza, ascites a silný edém celého těla, je zakázáno.
- ⑦ Kůže je vysoce alergická. Používání při kožních onemocněních, jako jsou prasklé vředy na kůži, nové nebo nezhojené rány a traumatické zlomeniny, je zakázáno.
- ⑧ Používání u pacientů se sklonem ke krvácení, jako je trombocytopenie, leukémie, hemofilie, alergická purpura a jiné poruchy krvácení, je zakázáno.
- ⑨ Používání u lidí, kteří jsou příliš žízňiví, příliš hladoví, příliš sytí, příliš unavení, opilí nebo přehřátí, je zakázáno. (Je zakázáno používat do dvou hodin po jídle).
- ⑩ Používejte opatrně u těch, kteří jsou chronicky nemocní, starší, extrémně hubení a podvyživení a zdravotně postižení, a u těch, kteří mají ztrátu elasticity pokožky.
- ⑪ Používání při akutních podvrtnutích, na bolestivých částech úrazu a zlomenin jsou zakázány.
- ⑫ Opatrně škrábejte spodní část břicha během menstruace a vynechte spodní část břicha a bod Hegu během těhotenství.
- ⑬ Měl by se používat opatrně u pacientů s nízkým krevním tlakem, irelevantní hladinou cukru v krvi, nadměrnou slabostí a nervovým napětím.
- ⑭ Pokud máte nějaký speciální zdravotní problém, použijte přístroj pod vedením lékaře.



Zakázáno pro těhotné ženy.



Nepoužívejte během spánku.

## PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM

### ZAKÁZANÉ POUŽÍVÁNÍ

- ① Je zakázáno pro pacienty s kožními chorobami, mateřskými znaménky, ranami nebo vředy na těle.
- ② Je zakázáno používat ho na očích, uších, nozdách, jazyku a verbálních rysech obličeje. Je to zakázáno vpředu a vzadu, na pupíku (bod Shenque) apod.
- ③ Na částech, kterým chybí podkožní tkáň a svaly, jsou velmi blízko kostí, jako například klíční kost. Testy škrábání na přední holenní kosti jsou zakázány.
- ④ Když není lebka dítěte dobře uzavřena, škrábání hlavy a krku je zakázáno.
- ⑤ Vynechte břicho pacientů s retencí moči.
- ⑥ Je zakázáno při akutních úrazech, podvrtnutích a pohmožděninách.

### DOPORUČENÍ:


- ① Pokud je teplota horkého obkladu příliš vysoká/zarudlá, doporučuje se snížit rychlost.
- ② Pokud budete produkt používat delší dobu, měl by být nastaven na nízkou (teplotní) úroveň doporučenou pro nepřetržité používání.

### TÝKAJÍCÍ SE NÍZKOTEPLTNÍCH POPÁLENIN:

I když se jedná o nízkou teplotu, při delším dotyku stejné části pokožky může dojít k popálení bez přehřátí a bolesti. Buďte, prosím, opatrní.

## POPIS KROKŮ


### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRODUKTU

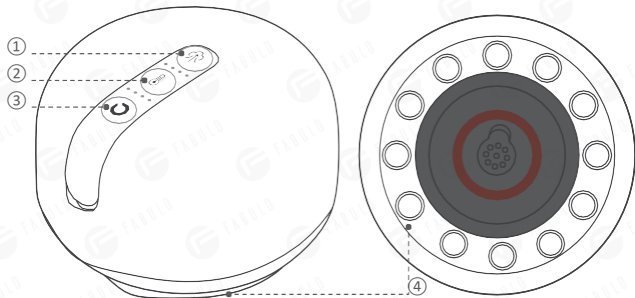


- ① Adsorpční tlačítko ② Tlačítko ohřevu ③ Funkční tlačítko ④ Podstavec pro kámen Bian


## POPIS KROKŮ

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRODUKTU VYPÍNAČ PŘÍSTROJE


ON: Pro zapnutí napájení stiskněte a podržte [Funkční tlačítko ] na 1 sekundu, rozsvítí se červené světlo, rozsvítí se indikátory ohřevu a adsorpčního zařízení a zazní bzučák: „Píp“; (výchozí režim: funkce adsorpce a ohřevu 1. převodový stupeň, funkce červeného světla zapnuta)



OFF: Pro vypnutí napájení stiskněte a podržte [Funkční tlačítko ] na 1 sekundu, všechny funkce a příslušné indikátory se vypnou a zazní bzučák: „píp píp“.

### FUNKCE OHŘEV


V zapnutém stavu krátce stiskněte [Tlačítko ohřevu , rychlostní stupeň se zvýší o 1 převodový stupeň, pořadí pozic: Cyklické přepínání „0. rychlostní stupeň (vypnuto) – 1. rychlostní stupeň – 2. rychlostní stupeň – 3. rychlostní stupeň – 4. rychlostní stupeň“ a zazní bzučák: „Píp“

### FUNKCE ČERVENÉHO SVĚTLA

V zapnutém stavu je funkce červeného světla standardně zapnuta, dlouze stiskněte tlačítko [Ohřev , funkce červeného světla je vypnutá a zazní bzučák: „Píp“

V zapnutém stavu je funkce červeného světla standardně zapnuta, dlouze stiskněte tlačítko [Ohřev , funkce červeného světla je vypnutá a zazní bzučák: „di~di tu“; opětovným dlouhým stisknutím tlačítka [Ohřev , se rozsvítí červené světlo a zazní bzučák: „píp píp“, pořadí převodů: přepínání cyklu „on-off“.

### ADSORPČNÍ FUNKCE





V zapnutém stavu krátce stiskněte [Adsorpční tlačítko , rychlostní stupeň se zvýší o 1 převodový stupeň, pořadí pozic: cyklické přepínání „0. rychlostní stupeň (vypnuto) – 1. rychlostní stupeň – 2. rychlostní stupeň – 3. rychlostní stupeň – 4. rychlostní stupeň“ a zazní bzučák: „Píp“



## POPIS KROKŮ

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRODUKTU

#### FUNKCE UVOLNĚNÍ TLAKU

V adsorpčním stavu krátce stiskněte [Funkční tlačítko ] nebo dlouho stiskněte [Adsorpční tlačítko , přístroj spustí funkci „uvolnění tlaku“ a zazní bzučák: „píp píp“; ve stavu uvolnění tlaku krátce stiskněte [Funkční tlačítko ] nebo stiskněte [Adsorpční tlačítko , adsorpční převod se vrátí do převodu před dekompresí.

#### POZNÁMKA:

Když jsou funkce ohřevu i adsorpce vypnuty (0. převodový stupeň / dekomprese), indikátory adsorpce a ohřevu blikají po dobu 60 sekund (kromě případu, kdy je funkce ohřevu nebo adsorpce během této doby znovu aktivována), hostitel se automaticky vypne.

### POKYNY

Po spuštění přístroje si zvolte funkci přístroje podle svých potřeb, naneste esenciální olej na tu část těla, kde je potřeba ho použít a začněte ho používat.


### ZOBRAZENÍ ÚROVNĚ BATERIE

Slabá baterie	Zazní bzučák: „di, di, pípne třikrát“, kontrolka zabliká a po 5 sekundovém blikání se vypne.
Nabíjení	Kontrolky adsorpce a ohřevu střídavě blikají.
Plné nabití	Indikátory adsorpce a zahřívání svítí trvale. Během procesu nabíjení se výrobek nedá používat a po odpojení nabíječky se výrobek vypne; výrobek se vypne, když se nabíječka připojí a přístroj se nabije.

Poznámka: Produkt se při nabíjení nedá zapnout, před zapnutím zařízení odpojte nabíjecí / napájecí kabel.

## POUŽITÍ

### VÝMĚNA ZÁTKY FILTRU

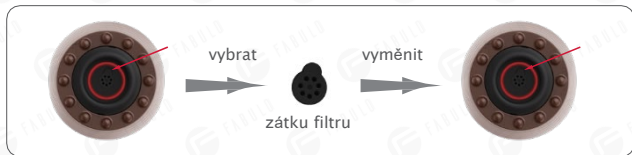

Odstraňte zátku filtru ve spodní části produktu a zátku filtru můžete vyčistit nebo vyměnit.

※ Pečujte o výše uvedené příslušenství, abyste předešli poškození.

Filtrační zátku může účinně blokovat vstup esenciálního oleje do produktu během masáže, což může účinně prodloužit životnost produktu.

(Po vícenásobném použití je potřeba ji včas vyčistit nebo vyměnit. Po omytí vodou ji jemně otřete papírovou utěrkou a osušte na chladném místě.)

## PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM

### SCHÉMATICKÝ DIAGRAM MASÁŽE


Obecně potřete části od hlavy, krku, zad, hrudníku, břicha, horních končetin, dolních končetin.




škrábání na hlavě




škrábání na tváři

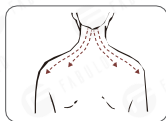


škrábání na rameni

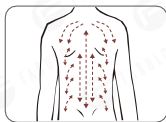


škrábání na zádech

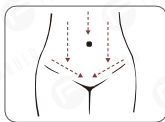

škrábání na břiše

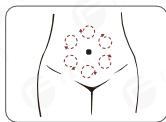

škrábání na břiše

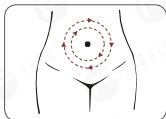

škrábání na břiše



škrábání na horních končetinách  
nebo dolních končetinách

## PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM

### ČASY ŠKRÁBÁNÍ A PROVOZU

- ① Obecně je počet škrábání pro každou část méně než 20krát, což není standard pro Sha. Pokud se Sha neobjeví, netlačte na Sha. Pokud po seškrábání Sha stále vychází ven, přestaňte škrábat, abyste předešli poškození pokožky.
- ② Síla škrábání by měla být od slabé po silnou, od malé po velkou.
- ③ Obecně by se pro každé použití mělo vybrat 3 ~ 5 částí.
- ④ Podle věku, postavy a místa škrábání každé osoby je čas škrábání možné flexibilně upravit.
- ⑤ Při používání dávejte pozor, abyste neškrábali velkou plochu, slabé lidi můžete škrábat jen lokálně.
- ⑥ Za normálních okolností trvá seškrábání Sha 3~6 dní po prvním seškrábání, a pak po druhém seškrábání. Převládá ústup na kůži (skvrny sha zmizí).
- ⑦ Po prvním seškrábání se ujistěte, že škrábete na stejném místě, když Sha ustoupí.
- ⑧ Pro každodenní použití neexistují žádná přísná omezení v časech a stupních během provozu a není potřeba škrábat Sha. 3~10 minut pokaždé, na principu vlastního pohodlí.

## ÚDRŽBA

### ÚDRŽBA

- ① Provedte opatření proti vlhkosti, hlodavcům a znečištění.
- ② Po použití výrobek uschovejte na bezpečném místě. Nenechávejte na produktu těžké předměty, abyste předešli poškození a deformaci kamene Bian.
- ③ Pokud dojde k poruše, kontaktujte, prosím, technický personál ohledně opravy včas, prosím, nerozebírejte výrobek svévolně.
- ④ Výrobek uchovávejte v dobře větrané místnosti, vyhýbejte se silnému slunečnímu záření a erozi korozivními plyny a tekutinami.
- ⑤ Tento výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- ⑥ Když se nepoužívá, uložte ho následovně: Po vychladnutí produktu odpojte napájecí kabel od zdroje napájení a těla produktu a uložte ho odděleně od produktu.
- ⑦ Pokud ho nebudete delší dobu používat, vložte tento výrobek a příslušenství do obalu a uložte ho na suchém a větraném místě, nebo ho přikryjte protiprachovým krytem, abyste předešli zaprášení. Nevystavujte výrobek slunci, aby nedošlo k vyblednutí nebo popraskání.
- ⑧ Nepoužívejte tento produkt k jiným účelům.
- ⑨ Vždy zkontrolujte, zda spotřebič nevykazuje známky opotřebování nebo poškození. Pokud existuje takový náznak nebo pokud byl spotřebič nesprávně používán, vraťte ho dodavateli před jeho opětovným použitím.
- ⑩ Výrobek by se měl nabíjet jednou za měsíc, pokud se delší dobu nepoužívá a měl by se vypnout.

## ÚDRŽBA

### ČIŠTĚNÍ

- ① Věnujte pozornost čištění a ochraně, zabraňte poškození a znečištění.
- ② Před čištěním vypněte napájení a počkejte, až vychladne.
- ③ Poté ho očistěte měkkou a relativně suchou houbou nebo vyždímaným měkkým hadříkem navlhčeným vodou nebo neutrálním čisticím prostředkem.
- ④ Při čištění neponořujte do žádné kapaliny, abyste předešli zkratu a úrazu elektrickým proudem.
- ⑤ K čištění tohoto produktu nepoužívejte korozivní čisticí kapalinu, brusný prostředek, kartáč, benzín, petrolej, sklo, leštidla na nábytek a ředidlo na barvy, v opačném případě, pokud je struktura zkorodovaná, produkt se poškodí.
- ⑥ Po použití výrobek včas vyčistěte.
- ⑦ Po dokončení čištění produktu by se měl k dezinfekci použít vatový tampon se 75% alkoholem.

### PŘEPRAVA A USKLADNĚNÍ

Teplota okolí: -40 °C ~ +50 °C

Relativní vlhkost: ≤80%

Přeprava:

Výrobek je vybaven jednoduchými antikorozními zařízeními, vhodnými pro leteckou, železniční, silniční a lodní dopravu. Během přepravy by se mělo vyhnout dešti a sněhu, převrácení a nárazu.

## ÚDRŽBA

### ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V případě poruchy během provozu zkontrolujte následující:

ZÁKLADNÍ CHYBA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ZÁKLADNÍ METODA VYLOUČENÍ
nelze zapnout	nízká kapacita baterie	nabijte výrobek
	produkt se nabíjí	před použitím ho nabijte
nenabíjí se nebo žádné zobrazení nabíjení	kabel USB je připojen správně nebo ne	zkontrolujte, zda jsou oba konce kabelu USB správně zapojeny
žádný pocit tepla	nízká kapacita baterie	nabijte výrobek
žádné odsávání	nízká kapacita baterie	nabijte výrobek

### OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Když se výrobky a obaly likvidují, neměly by se libovolně rozebírat, vyhazovat ani spalovat. Měly by být zaslány do stanice na recyklaci odpadu v souladu s příslušnými národními zákony a předpisy.

## PARAMETRY VÝROBKU

### PARAMETRY VÝROBKU

Název výrobku	MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ MINI CUPPING
Model	CI162A
Parametry nabíječe	5V ---
Jmenovité napětí	3.7V ---
Jmenovitý výkon	11W
Kapacita baterie	2000mAh
Čas nabíjení	Cca. 160min
Časování	Cca. 15min
Materiál	Kámen Bian, ABS, Silikon, atp.
Čistá hmotnost	Cca. 220g
Rozměry výrobku	Cca. 82×80×55mm
Typ bezpečnosti	Spotřebiče třídy III
Výrobce	New Design Biotechnology Co., Ltd
Adresa	Room 101, No. 1 Building, No. 265, Chigang West Road, Haizhu District, Guangzhou
Výrobní šarže	Viz typový štítek
Verze č.	E-01

※ Parametry jako velikost a hmotnost produktu jsou referenční hodnoty a skutečný produkt má nakonec přednost.