


70,00 mm

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pozorně si přečtěte tento návod k použití a dodržujte správné pokyny.

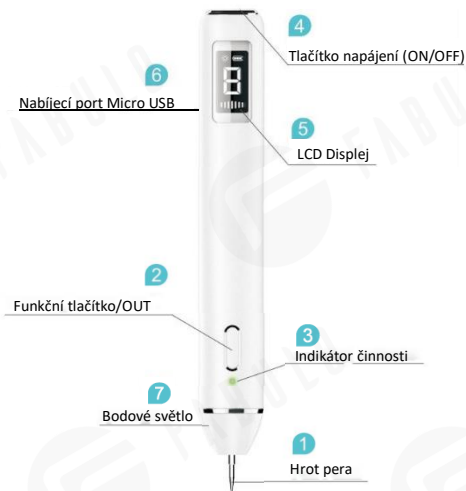

Profesionální odstraňovač tmavých skvrn využívá nejnovější technologii, která Vám pomůže efektivně a okamžitě odstranit kožní fibromy, tmavé skvrny, pihy, matefská znaménka, bradavice atd. Jednoduché a bezpečné použití. S tímto kosmetickým přístrojem si zlepšíte pleť a změníte svůj život!

PROFESIONÁLNÍ ODSTRAŇOVAČ TMAVÝCH SKVRN

Obsah balení


- 1 * Odstraňovač fibromů
- 10* Tenkých jehel
- 1 * USB kabel
- 1 * Uživatelská příručka
- 3 * Silné jehly (včetně dalšího chrániče jehly)

Technické údaje


| | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------|
| Materiál | ABS + Ocelová jehla | Vstupní proud | 5 V/1 A |
| Kapacita baterie | 800mAh 3.7V | Výstupní výkon | MAX5W |
| Rozměry výrobku | 182* 26* 26mm | Hmotnost výrobku | 75g |
| Rozměry balení | 200* 96* 36mm | Hmotnost balení | 200g |

Vlastnosti

- 6. generace německé technologie výroby
- Řízení mikroprocesoru a ochrana proti nadměrnému vybití, bezpečné použití
- 10 nastavitelných úrovní vyhovuje různým potřebám
- LCD displej zobrazuje úroveň a stav baterie
- Bodové světlo usnadňuje práci na tmavých místech
- 10 vyměnitelných tenkých jehel a 3 silné jehly, robustní a odolné
- Ikona baterie bude blikat, když je baterie téměř vybitá

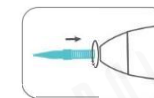

- 1 Napichněte silnou jehlu přímo do hrotu pera.

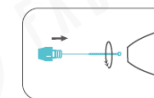

- 2 Nejprve vložte tenkou jehlu do chrániče jehly, a pak navlečte chránič jehly do hrotu pera.

Aplikační metody

1. Sestavte jehlu: dezinfikujte jehlu a kůži alkoholem. Zašroubujte silnou jehlu do otvoru špičky ve směru hodinových ručiček. Nebo vložte tenkou jehlu do krytu jehly a zašroubujte kryt jehly do otvoru pro hrot ve směru hodinových ručiček.
2. Zapnutí/vypnutí: pro zapnutí/vypnutí stiskněte tlačítko napájení na 2 sekundy. Na LCD obrazovce se zobrazuje ukazatel baterie a úroveň. Pokud během 10 minut neprovedete žádnou činnost, automaticky se vypne.
3. Ovládání převodových stupňů: stisknutím tlačítka napájení na jednu sekundu přepnete převodový stupeň z 1-10 na výběr přiměřené úrovně. Pevně držte pero, zatímco stisknete tlačítko OUT, čímž se rozsvítí zelené světlo. Jemně poškrábejte póry nebo kůži tam a zpět. Jehla nemůže zůstat na jednom místě příliš dlouho, a pokud zůstane, automaticky se přepne do režimu spánku, pracuje více než dvě minuty.
4. LED světlo: když je pero zapnuté, rychlým dvojitým kliknutím na tlačítko napájení se zapne světlo a můžete ho vypnout opětovným dvojitým kliknutím.

Metody nabíjení

1. Na připojení USB kabelu a pera použijte adaptér 5V/1A (připravený zákazníky). Zelený indikátor bliká.
2. Zelené světlo představuje úplné nabití (asi 2 hodiny).

Během nabíjení, prosím, přístroj nepoužívejte. Kromě toho nadměrné nabíjení nebo nabíjení, když je baterie úplně vybitá, zkrátí životnost baterie.

Úrovněvé použití (pouze pro referenci)

| Úroveň | Typ jehly | Použití na |
|--------|-----------|--|
| 1-2 | Tenká | Tuková granulace |
| 3-4 | Tenká | Malá matefská znaménka |
| | Silná | Malá místa |
| 5-6 | Tenká | Malá a středně velká matefská znaménka |
| | Silná | Malá a středně velká místa |
| 7-8 | Tenká | Matefská znaménka velikosti fazole mungo |
| | Silná | Skvrny a plaky velikosti fazole mungo |
| 9-10 | Tenká | Velká matefská znaménka |
| | Silná | Velké skvrny, plaky atd. |

Pozor: Uživateli musí začít používat od úrovně 1 a vybrat jiné úrovně podle výsledků používání.

Poznámky

1. Před použitím přístroje na kůži si, prosím, navlečte na zvířecí kůži, dokud ho nebudete umět ovládat odborně.
2. Před ošetřením byste měli zvážit aplikaci částečné anestezie podle Vaší tolerance bolesti a Vámi léčeného místa. Během ošetření se zápachu z pálení obávat nemusíte.
3. Neškrábejte ani nečistěte ošetřovanou oblast silně alkalickou kapalinou. Jednoduchá péče bude stačit. Během období hojení (1-3 měsíce) nejzte kořeněná jídla a dodržujte zdravý životní styl.
4. Neošetřujte velkou plochu (větší než 2 - 3 cm) v rámci jednoho cyklu léčby, protože velká rána zvyšuje riziko infekce a krvácení. Doporučuje se rozdělit do čtyř nebo pěti léčebných cyklů.
5. Když se rána hojí, můžete cítit svědění. Strup, prosím, neškrábejte, v průběhu 20 až 30 dní se sám odloupne.
6. Během provozu je lepší nosit rukavice.
7. Jehlu po použití vyndejte včas a po vyčištění a dezinfekci ji uchovejte na suchém místě.
8. Při mytí neponožujte toto zařízení do vody.
9. Během nabíjení, prosím, přístroj nepoužívejte. Doporučuje se nabíjet každé tři měsíce, aby se prodloužila životnost baterie, když je zařízení delší dobu mimo provoz.
10. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí, domácích zvířat a nesoučinného personálu.
11. Používání u starších lidí, dětí, těhotných žen, lidí s některými nemocemi srdce a lidí náchylných na vyděšení musí být velmi opatrné. Pokud máte nějaké pochybnosti, obraťte se na odborníky.

Praktické rady

Odstranění tmavých skvrn: můžete jasně vidět, že povrch melaninu se změní na zehnalatý poté, co se akusektor jemně dotkne místa a pohybuje tam a zpět. Pak místo otřete vatovým tamponem. Pokud je místo světlé a malé, postačí jednorázové ošetření. V závislosti na velikosti skvrn se můžete pohybovat tam a zpět kolikrát je zapotřebí. Věnujte zvýšenou pozornost operačnímu procesu, zkušený pracovník by měl zůstat nehybný a operátor by měl držet pero pevně bez chvění rukou, aby nedošlo k popálení a zanechání jakékoliv jizvy.

Odstranění matefských znamének: při odstraňování matefských znamének je velmi důležité určit jejich velikost a hloubku. Některá matefská znaménka rostou na povrchu kůže, ale některá hluboko v podkožní tkáni. Doporučuje se odstraňovat matefská znaménka v malých čtvrcích, místo toho, abyste jednou propíchli celý povrch matefského znaménka. Kromě toho, že se vyhnete zánětu, raději si podle rady lékaře 2-3 dny před hojením rány natírejte některými léčivými nebo výživnými krémy podporujícími růst buněk, abyste předešli podráždění pokožky.

Odstranění Granulací: jemně se dotkněte kořene granulace s akusektorem, aby se kořen oddělené granulace spálil laserem. A granulace automaticky odpadne přibližně za týden. Odstranění hluboké růstové granulace lze rozdělit na několikrát. Kromě toho, abyste se vyhnuli zánětu, raději podle rady lékaře aplikujte výživné krémy napomáhající růstu buněk, abyste se vyhnuli podráždění pokožky 2-3 dny před hojením rány.

Odstranění sarkoidů: jemně se dotkněte kořene sarkoidu s akusektorem, aby se kořen oddělovaného sarkoidu spálil laserem. A sarkoid automaticky odpadne přibližně za týden. Léčbu hlubokých růstových sarkoidů lze rozdělit na několikrát. Kromě toho, abyste se vyhnuli zánětu, raději podle rady lékaře aplikujte výživné krémy napomáhající růstu buněk, abyste se vyhnuli podráždění pokožky 2-3 dny před hojením rány.

Odstranění tetování: je lepší použít silné jehly, protože plochy tetování jsou obecně větší. Kromě toho, že to stojí více času, metoda odstraňování tetování je téměř stejná jako metoda odstraňování tmavých skvrn. Odstranění větších tetování (více než 3 cm) by se mělo rozdělit na několikrát. Nedokončujte odstraňování najednou, jinak to způsobí bakteriální infekci a katastrofální následky. Uživateli by měli být dost opatrní. Pokud dojde k závažnému zánětu, jděte co nejdříve do nemocnice.

90*70 mm