

Upozornění

1. Pokud chcete tento přístroj přesunout, je potřeba jemně ho zvednout a opatrně ho položit; v případě selhání na něj, prosím, silně netlačte, abyste předešli poruše způsobené dopadem.
2. Pokud chcete tento přístroj přesunout, je potřeba držet ho horizontálně, aby se zabránilo vibracím a nárazům.
3. Netlačte na přístroj ani neumísťujte těžké věci na přístroj, aby se zabránilo deformaci pouzdra, poškození nebo poruše.
4. Je potřeba zvolit odpovídající pracovní napájení v souladu se značkami na tělese přístroje.
5. Tento nástroj se nesmí používat v koupelně.
6. Abyste zabránili nehodě zásahem blesku, když hřmí, vypněte vypínač napájení a vytáhněte síťovou zástrčku.
7. Není dovoleno vstříkovat žádnou tekutinu do tělesa přístroje, aby se zabránilo poškození přístroje v důsledku zkratu.
8. Pokud se přístroj nebude používat delší dobu, je potřeba vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.

Technické parametry

1. Provozní napětí: AC 220V--AC 240V
2. Maximální výkon celého přístroje: 20W.
3. Velikost balení: 27*14*27 (D*Š*V) cm

Uživatelská příručka pro mikropočítačem řízený kosmetický přístroj Mikrodermabraze




Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste si vybrali náš produkt! Projděte si, prosím, tuto příručku před použitím, abyste zajistili maximální výkon přístroje a bezpečnost při používání. Vhodně uchovejte pro další využití.

Funkce

Zbavte se stárnutí pokožky, zlepšete texturu pokožky, vyblednutí, vylepšete jizvy a kožní nepravidelnosti; urychlete krevní oběh a zmenšete velké póry.

Popis ovládacího panelu

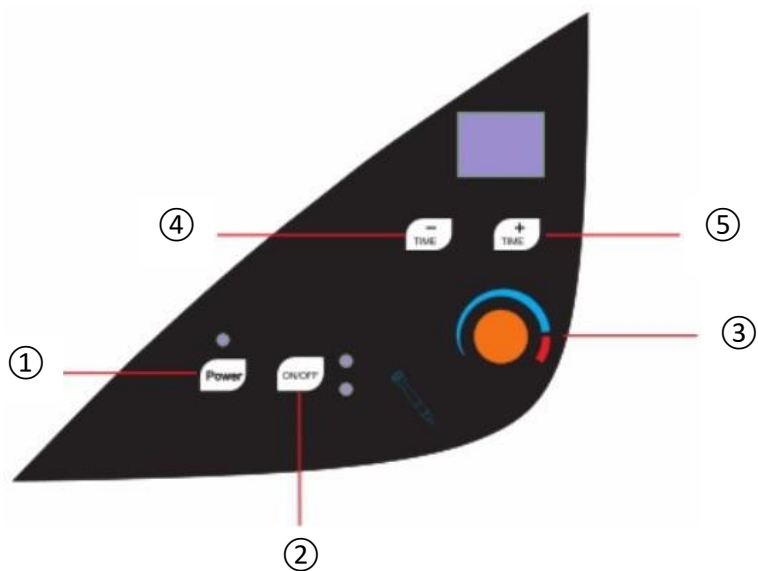

- ① Napájení ② ON/OFF ③ Regulátor tlaku
④ Snížení času ⑤ Zvýšení času

Provoz

1. Vyberte si vhodný nástavec a nainstalujte ho na horní část rukojeti, připojte rukojeť do rozhraní přístroje pomocí hadice.
2. Zapojte, stiskněte ①, indikátor se změní zeleně, čas ukazuje 30 (minut) a indikátor ② se rozsvítí červeně, což znamená, že přístroj je v pohotovostním režimu.
3. Stiskněte ②, indikátor se změní zeleně a podruhé se displej rozbliká, což znamená, že přístroj začíná pracovat.
4. Vyberte si vhodnou intenzitu od nízké po vysokou úpravu, regulátor tlaku ve směru hodinových ručiček.

Poznámky

1. Pokud kosmetička provádí ošetření sterilizovanými rukavicemi, ruce by se měly nejprve očistit a vydezinfikovat alkoholem.
 2. Příslušenství by mělo být sterilizováno a udržováno čisté a suché.
- Přístroj je vybaven dermabrazními nástavci různých velikostí pro použití jiného dílu. Instalace jako na obrázku níže:

