

## Upozornění

1. Pokud chcete tento přístroj přesunout, je potřeba ho jemně zvednout a opatrně ho položit; v případě selhání na něj, prosím, tvrdě neklepejte, abyste předešli poruše způsobené dopadem.
2. Pokud chcete tento nástroj přesunout, je potřeba ho držet horizontálně, aby se zabránilo vibracím a nárazům.
3. Nemačkejte přístroj ani neumísťujte těžké věci na přístroj, aby se zabránilo deformaci pouzdra, poškození nebo poruše.
4. Je potřeba zvolit odpovídající pracovní napájení v souladu se značkami na tělesu přístroje.
5. Tento nástroj se nesmí používat v koupelně.
6. Abyste zabránili nehodě zásahem blesku, když hřmí, vypněte vypínač napájení a vytáhněte síťovou zástrčku.
7. Není dovoleno vstříkovat žádnou tekutinu do tělesa přístroje, aby se zabránilo poškození přístroje v důsledku zkratu.
8. Pokud se přístroj nebude používat delší dobu, je potřeba vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.

## Technické parametry

1. Provozní napětí: AC 220V--AC 240V
  2. Maximální výkon celého přístroje: 25W 3
- Velikost balení: 26,5\*14\*22,5 (D\*Š\*V) cm

Verze : 20140804

# Vysokofrekvenční kosmetický přístroj Uživatelská příručka



Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste si vybrali náš produkt! Před použitím si, prosím, projděte tuto příručku, abyste zajistili maximální výkon přístroje a bezpečnost při používání. Vhodně uschovejte pro další využití.

## Funkce

Vysokofrekvenční kosmetický přístroj s dotykovým panelem a mikropočítačem je špičkové kosmetické zařízení s níže uvedenými funkcemi:


1. Využijte ultrafialové záření k ozařování části nebo místa na kůži, abyste sterilizovali kůži a urychlili hojení ran.
2. Zbavte se skvrn, pigmentace, pupínků a akné.

## Specifikace

1. Jednoduchý a rychlý provoz použitím nejnovější technologie mikropočítačů.
2. Inteligentní a spolehlivý zákrok použitím 10 nastavitelných úrovní.
3. K dispozici jsou různé metody pomoci pulzní vlny.

## Popis ovládacího panelu

- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| ① Snížení času      | ② Snížení energie          |
| ③ ON/OFF            | ④ Zvýšení času             |
| ⑤ Zvýšení energie   | ⑥ Indikátor pohotov. stavu |
| ⑦ Indikátor zapnutí | ⑧ Časový displej           |

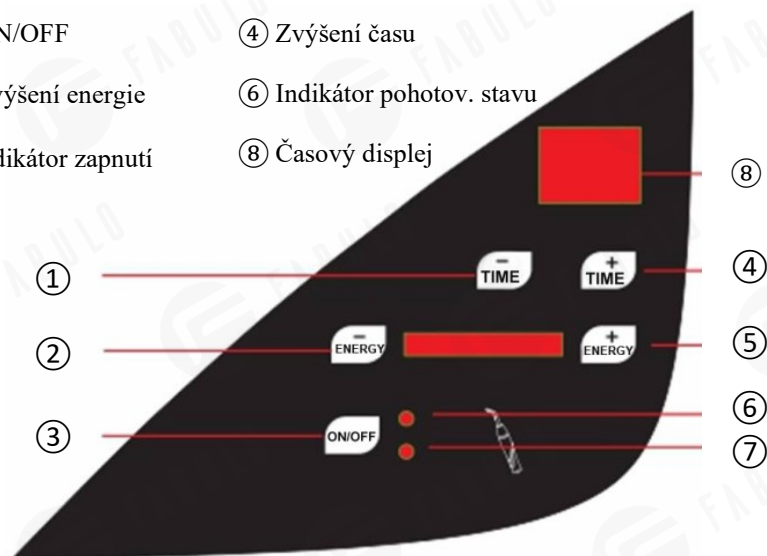

## Provoz

1. Vložte elektrodu do rukojeti a dobře ji uchyťte.
2. Zapojte, pak uslyšíte „pípnutí“ při spuštění, zobrazí se ⑧ po 30 (minutách); když bude energie nulová, indikátor ⑥ bude červený, přístroj přejde do pohotovostního režimu.  
Po stisknutí tlačítka ③ se indikátor ⑥ změní na zelenou, druhý bod v ⑧ bliká a přístroj se spustí.
4. Zvyšte/snižte energii na 10 úrovních stisknutím tlačítek ⑤ / ②
5. Otestujte elektřinu dotykem kovu.
6. Energie by neměla být příliš vysoká, aby se zabránilo jakémukoliv zranění nebo ne příliš nízká na oslabení výsledku léčby.
7. Pokud při odstraňování skvrn potřebujete, posuňte elektrodu na místě, pak uvidíte, že melanin ustupuje. Drobné skvrny lze odstranit po jednom zákroku a na větší bude potřeba 2-3 zákroky.

## Poznámky

1. Pokud kosmetička provádí ošetření sterilizovanými rukavicemi, ruce by měly být nejprve očištěny a vydezinfikovány alkoholem.
2. Elektrody by měly být sterilizovány a udržovány čisté a suché.
3. Před léčbou dezinfikujte léčenou část těla klienta alkoholem.
4. Potírejte tuto část anestetikem po dobu 3 minut, a pak začnete léčbu.
5. Během operace nezůstávejte příliš dlouho na ošetřované oblasti, abyste se vyhnuli jizvám.
6. Před operací si sundejte všechny kovové části (náušnice, náhrdelník atd.)