

Kosmetický přístroj Giovanni Classic - Elektrostimulace



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybrali náš výrobek. Před jeho použitím si, prosím, tento manuál přečtěte, abyste dosáhli co nejlepších výsledků a bezpečnosti. Manuál si, prosím, odložte pro pozdější nahlédnutí.

Stručný úvod:

Kosmetický nástroj pro formování dokonalé postavy dokáže rozpustit tuk uvnitř těla včetně tuku kolem střev a uvnitř břicha. Zároveň může snížit excitabilitu sympatických nervů a spotřebu kyslíku u silnějších lidí. Díky hromadění bodové stimulace můžete zhubnout ve velmi krátké době. Toto je nejlepší tradiční způsob hubnutí, protože pomocí tohoto nástroje si můžete udržet svou

dokonalou postavu i po zhubnutí.

Přístroj je organicky kombinovaný s obvodem s frekvenčním skenováním a mikročítačovým systémem na vytvoření stimulační bioelektriny a přesně se drží základů akupunktury, tradiční čínské medicíny, abyste měli pravidelnou hlubokou aktivaci a masáž, abyste dosáhli zrychlení kanálů a zregulovali náladu. Odstraňuje vnitřní toxin, zlepšuje tělesnou mikrocirkulaci, podporuje metabolismus, nabudí a obnoví tělesnou sílu proti nemocem, takže mnoho tukových buněk se může zmenšit a kůže se může regenerovat.

Funkce a léčivé účinky

Snížení hmotnosti: během deseti dnů léčby můžete zhubnout 1-8 kg


Zeštíhlení těla: během deseti dnů léčby můžete zmenšit obvod pasu o 2-9 centimetrů


Zvětšení prsou: během dvaceti dnů léčby a prsa se mohou zvětšit o 1-3 centimetry


Funkce: hubnutí, hubnutí těla, zvětšení prsou a fyzikální terapie


Výhody: nízká frekvence pro hubnutí a střední frekvence pro vláskování pokožky. Obvod pasu se může okamžitou úpravou zmenšit o 1-2 cm.

Návod k použití panelu

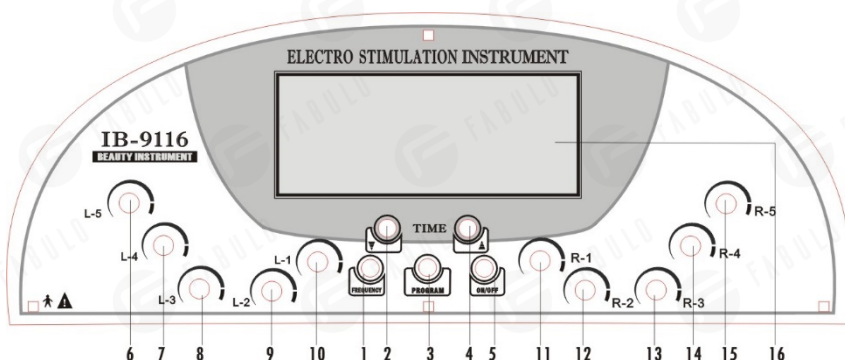

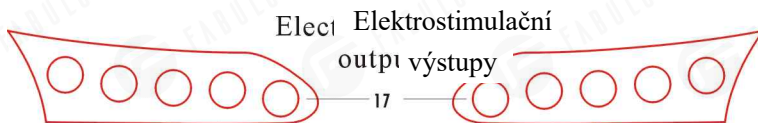

1. Nastavení frekvence 
2. Úprava doby provozu (dolů)
3. Výběr programu (1-9)
4. Úprava doby provozu (nahoru)
5. Napájení (zapnutí a vypnutí)
- 6.-15. nastavení intenzity
16. LCD displej
17. Elektrostimulační výstupy

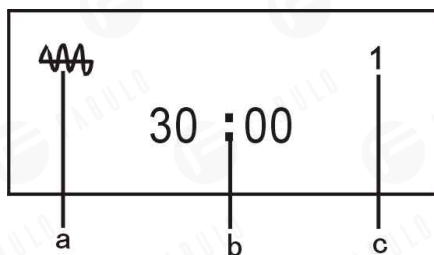

LCD displej

18. Elastický pás
19. Elektroda
20. Kabel elektrody
21. Prsní elektrody
22. Samolepicí elektrody
23. Základna
- a. Zobrazení frekvence
- b. Zobrazení času
- c. Zobrazení programu



Popis procedury:

Program 1: Nízkofrekvenční lipolytická biologická stimulace (povrchové vrstvy)

Funkce: Lipolytická biologická stimulace přímo působí na lipocyty, které rozloží tělesný tuk z lipocytů zvýšením jeho propustnosti.

Použití: Použití na jakoukoliv část těla, zejména na lokalizovanou obezitu.

Program 2: Biologická stimulace lipohistodierézou aktivního typu (hluboká úroveň)

Funkce: Tento druh stimulace může vyvolat obrovskou kontrakci svalů na produkci kreatinu, aby se rozložil a likvidoval tělesný tuk.

Použití: Aplikace na hluboký tělesný tuk.

Program 3: Hluboké spalování a biologická stimulace pevnosti

Funkce: Šířka a frekvence impulsů tohoto druhu stimulace je větší než výše uvedené dva, což může posílit stimulaci svalového vlákna a následně úplněji likvidovat hluboký tělesný tuk.

Použití: Při aplikaci na celulitidu je efekt evidentní.

Program 4: Aktivující (zpevňující) biologická stimulace

Funkce: Tento druh stimulace může urychlit vnitřní buněčnou výměnu látek a syntézu proteinů, aby se zlepšila aktivita nervové struktury při působení na depozici.

Použití: Aplikace na ochablou pokožku.

Program 5: Zpevnění svalů (posílení zpevnění) biologická stimulace

Funkce: Šířka a frekvence impulsů tohoto druhu stimulace je větší než u programu 3, který může posílit homomalózní stimulaci svalového vlákna a následně úplněji likvidovat hluboký tělesný tuk.

Použití: Při aplikaci na celulitidu je účinek zřetelný.

Program 6: Nepřetržitá hluboká biologická stimulace na hubnutí (detoxikace a spalování)

Funkce: Jedná se o středně frekvenční stimulaci, která dokáže

tisíckrát nepřetržitě stimulovat hlubokou úroveň svalstva, aby se rozšířila lymfatická céva a posílila se cirkulace lymfy, aby se odstranily hydrolytické mastné kyseliny a vnitřní toxin.

Použití: Aplikace při poruše cirkulace lymfy, hydrokéle obezitě.
Detoxikační účinek je zřetelný.

Program 7: Biologická stimulace přerušovanou vlnou (zkrášlující prsa a boky)

Funkce: Tato stimulace je podobná jako u programu 4, ale odlišná je vlna tohoto druhu, je přerušována, což poskytuje svalům odpočinek, aby se usnadnilo hromadění tělesného tuku.

Použití: Aplikace na stavbu těla, ochablou pokožku, plochá a malá prsa.

Program 8: Sinusová modulační vlna a středně frekvenční biologická stimulace

Funkce: Tato stimulace může zvýšit propustnost buněk, aby se urychlila vnitřní buněčná výměna látky, která rozšiřuje lymfatickou cévu a posiluje cirkulaci lymfy, aby se odstranily hydrolytické mastné kyseliny a vnitřní toxin a tonizovaly svaly.

Použití: Aplikace na ochablá prsa, boky, pokožku a detoxikace.

Program 9: Opakující se program 1 až program 8.

Návod k použití

1. Upravte každý výstup do stavu bez výstupu.
2. Zkontrolujte a připojte napájení zobrazené jako na obrázku.




Potom zapněte vypínač.

3. Stiskněte tlačítko Start / Pause , a zařízení začne pracovat.

4. Stiskněte tlačítko Program Mode , a vyberte program.

K dispozici je devět druhů programů a to 1.2.3.4...

5. Nastavte dobu provozu pomocí tlačítka TIME.  TIME 

6. Nastavte intenzitu výstupu otáčením tlačítek 6-15 (zobrazených na

panelu) 

7. Pokud by se během provozu měl posunout čas nebo intenzita funkce, stačí stisknout příslušné tlačítko a operace se nezastaví.

Proces léčby

1. Naneste gel nebo krém na hubnutí na elektrody a připevněte je spolu s kabelem na části těla.
2. Elektrodu nalepte na části těla následovně:

Obrázek 1: Krk a ramena

Funkce: Stimuluje krevní oběh na krku a ramenou, který může odstranit tuk a únavu.



Obrázek 2: Krk, ramena a ruce

Funkce: Stimuluje krevní oběh na krku, ramenou a rukou, který se může otevřít a odstranit tuk.



Obrázek 3: Prsa

Funkce: Stimuluje krevní oběh na prsou. A stimuluje vývoj prsou, který dokáže upravit sekreci hormonu.



Obrázek 4: Břícho

Funkce: Stimuluje krevní oběh na břicho, odstraní tuk a zpevní svaly na hrudi.



Obrázek 5 Záda

Funkce: Stimuluje krevní oběh na zádech a zpevní zádové svalstvo, což může odstranit přebytečný tuk a zmírnit únavu.



Obrázek 6: Boky

Funkce: Stimuluje krevní oběh v bocích, čímž se odstraní přebytečný tuk a posílí se sval kyčle.



Obrázek 7: Ruce


Funkce: Stimuluje krevní oběh v rukou a otevírá kanály, které mohou odstranit přebytečný tuk a zpevnit svaly na rukou.



Obrázek 8: Nohy

Funkce: Stimuluje krevní oběh v nohou a otevírá kanály, které mohou odstranit přebytečný tuk a zpevnit svaly na nohou.



3. Zapněte napájení  a vyberte vhodný produkt.

- (1) Použití pro jakoukoliv část těla, zejména pro lokalizovanou obezitu.
- (2) Aplikace na hluboký tělesný tuk.
- (3) Aplikace na celulitidu.
- (4) Aplikace na ochablou pokožku.
- (5) Aplikace na celulitidu.
- (6) Aplikace při poruše cirkulace lymfy, hydrokéle obezitě.
- (7) Aplikace na stavbu těla, ochablou pokožku, plochá a malá prsa.

(8) Aplikace na ochablá prsa, boky a kůži.



4. Nastavte čas stisknutím tlačítka Time Adjust  TIME .

(0-60 minut)

Snížení hmotnosti: 30-40 minut denně 15krát jedno ošetření.

Péče o prsa: 20-30 minut jednou za den 15-30krát jedno ošetření.

5. Zapnutím tlačítka  upravíte intenzitu

podle pocitu klienta. Potom nastavte  čtyři frekvenční režimy, jsou zde čtyři režimy zobrazené jako .

6. Během ošetření můžete libovolně přepínat tlačítkem funkce, času a intenzity.

7. Správná intenzita: Jelikož tolerance elektřiny je různá u různých lidí, pro různé zákazníky by měla být intenzita aplikované elektřiny odlišná, a toto jsou typy intenzity:

I Hranice vnímání: Cítíte elektřinu.

II Hranice stahování: Svaly se začínají stahovat.

III Hranice tolerance: Tělo může tolerovat elektřinu.

| Část těla | Správná dávka |
|--------------|--------------------------------------|
| Krk a ramena | Hranice vnímání |
| Noha | Hranice stahování, Hranice tolerance |
| Ruka | Hranice stahování, Hranice tolerance |
| Břicho | Hranice stahování, Hranice tolerance |
| Prsa | Hranice stahování |

| | |
|------|--------------------------------------|
| Záda | Hranice stahování, Hranice tolerance |
| Boky | Hranice stahování, Hranice tolerance |

- Po ošetření se ujistěte, že zobrazení času je 0 a výstup by měl být vypnutý.
- Elektrody očistěte, sterilizujte a odložte.

Poznámka:

- Nenastavujte příliš vysokou intenzitu.
- Při hubnutí by intenzita měla být podle pocitu klientů.
- Pokud provádíte péči o prsa, vyberte si nízkou intenzitu.
- Očistěte kůži na místě, kde se má elektroda nalepit, a ujistěte se, že spodní hranice intenzity je na 0.
- Rozetřete médium, což zastaví elektřinu. Médium rovnoměrně rozetřete, aby pokožka nebyla bolestivá.
- Pokud se vyskytnou nějaké problémy s pokožkou, zkráťte dobu ošetření.
- Během ošetření přizpůsobte intenzitu podle pocitu klientů.

Čemu je potřeba se vyhnout:

- Lidé s onemocněním krve tento přístroj používat nemohou.
- Lidé, kteří mají nějaké problémy s pokožkou tento přístroj používat nemohou.
- Lidé se srdečním onemocněním ho také nemohou používat.
- Lidé s kovem uvnitř těla ho nemohou používat.
- Těhotné ženy ho nemohou používat.
- Lidé s nádorem ho nemohou používat.

7. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dozor nebo pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
8. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.

Technologické parametry

Napájení: 110V 220V 230V 240V

Pracovní frekvence: 50Hz 60Hz

Výkon: 40W

Rozměry: 53×40×23 cm

Hrubá hmotnost: 6.5 kg 24.5 kg

Seznam příslušenství v balení

| NÁZEV POLOŽKY | JEDNOTKA | MNOŽSTVÍ | POZNÁMKY |
|-----------------|----------|----------|----------|
| Základna | Sada | 1 | |
| Kabel elektrody | Pás | 10 | |
| Prsní elektrody | Kus | 2 | |

| | | | |
|----------------------|------|----|--|
| φ65Elektroda | Kus | 10 | |
| φ95Elektroda | Kus | 10 | |
| Samolepicí elektroda | Kus | 2 | |
| Napájecí kabel | Pás | 1 | |
| Elastický pás | Pás | 1 | |
| Pojistka | Sada | 2 | |
| Návod k použití | Kus | 1 | |

Důležité bezpečnostní informace

1. Prosím, nerozebírejte přístroj a ani se nepokoušejte provést nějakou jinou operaci, která nebyla uvedena v našem manuálu. Všechny opravné práce by měl provádět námi uznaný profesionální personál.
2. Toto zařízení nesestavujte a ani neobsluhujte, když jste blízko vody nebo máte mokré ruce. Nelijte na něj tekutinu.
3. Vytáhněte, prosím, zástrčku ze zásuvky, pokud nastanou níže uvedené podmínky. A obraťte se na stanici profesionální údržby, pokud:
 - a. Zařízení se dotklo kapaliny.
 - b. Přístroj má abnormální zápach, kouří se z něj nebo vydává hlasitý a silný hluk.
 - c. Kabel je zlomený.
 - d. Přístroj spadl a zlomil se.

4. Neukládejte nic na kabely, neumist'ujte přístroj na takové místo, kde někdo může vstoupit na kabel.
5. Po použití pro vaši bezpečnost vytáhněte napájecí kabel.
6. Nevkládejte nic do konektoru jack přístroje, jinak to může způsobit požár nebo dotek s elektřinou. Pokud něco spadne do přístroje, prosím, nevyndávejte to sami, okamžitě kontaktujte distributora nebo naši společnost.
7. Nepokládejte přístroj na nic, co nemůže pevně stát, zabraňte jeho převrácení a poškození.
8. Naše společnost má právo upravit informace v tomto návodu bez oznámení! A řiďte se výše uvedenými pokyny.