

Uživatelská příručka Lymfodrenážní přístroj Quirumed 9500



* Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Před použitím si pozorně přečtěte tento manuál a dobře ho uschovejte pro Vaše budoucí informace.

* Brožura bude aktualizována s produktem. Specifikace a informace o produktu se mohou změnit bez upozornění.

Distributor: iM3, s.r.o., Malotejedská 515/8, 92901 Dunajská Streda

Web: www.fabulo.cz


Vlastnosti

Pravidelnými tlakovými masážemi vzduchovými vaky uvolňujete napnuté svalstvo a procvičujete nohy, přičemž Vám nohy zhubnou a zkrásní, je obzvláště vhodný pro ty, kterým chybí sport, např. pro staré lidi a úředníky.

3 skupiny funkcí, 6 masážních režimů

Inteligentní provoz, nastavitelná intenzita

Jednoduché používání

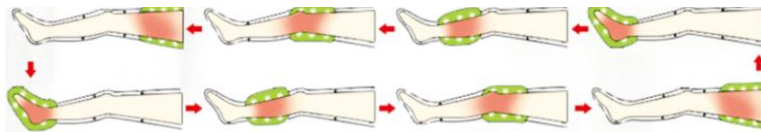

Specifikace

Vstup: AC110V~240V / 50HZ~ 60HZ

Pracovní napětí: DC12V / 2A

Výkon: 12W

Kategorie: II

Izolace: E

Norma: BG4706.10~2008

Čas: 10 min, 20 min, 30 min

 **Toto není zdravotnické zařízení!**



Provoz



- 1, Dejte masážní přístroj na správnou část těla.
- 2, Správně připojte vzduchové trubice a boty.
- 3, Správně připojte adaptér a ovladač.
- 4, Ujistěte se, že jsou vzduchové trubice uloženy tak, aby mohly správně fungovat.
- 5, 6, Provoz masážních režimů:
 - A: Všechna světla svítí, nafukování přes hadice 1,2,3,4 zapnuto.
A+: Všechna světla blikají, nafukování přes hadice 1,2,3,4 zapnuto. Zastavte libovolnou, kterou nechcete.
 - B: Všechna světla, nafukování přes všechny hadice, udržování a vyfukování synchronně.
B+: Všechna světla blikají, nafukování přes všechny hadice, stiskněte tlačítko, dokud se přístroj nevypne nebo nepřejde do jiného režimu.
 - C: Všechna světla svítí, nafukování přes všechny hadice, rychlé nafukování a vyfukování 3krát, synchronní vyfukování přes všechny hadice.
C+: Všechna světla blikají, nafukování přes všechny hadice, rychlé nafukování a vyfukování, dokud se přístroj nevypne nebo nepřejde do jiného režimu.

Připomínka: Dvakrát klikněte na A / B / C na přechod do režimu A+ / B+ / C+.

- 6, V každém režimu můžete sílu zvýšit nebo snížit -.

Bezpečnost výrobku

- 1, Nepoužívejte stejnou zástrčku s jiným zařízením.
- 2, Přestaňte používat, pokud se během používání necítíte dobře.
- 3, Nepoužívejte jiný adaptér než původní.
- 4, Masážní přístroj nerozebírejte.
- 5, Používejte masážní přístroj podle návodu.

Bezpečnost při používání

- 1, Nepoužívejte masážní přístroj na žádné jiné části těla, které manuál neuvádí.
- 2, Nepoužívejte masážní přístroj, když používáte jiné zdravotnické zařízení.
- 3, Nepoužívejte masážní přístroj, pokud máte jakékoliv vážné onemocnění, nebo se před použitím poradte se svým lékařem.
- 4, Přestaňte používat masážní přístroj, pokud se cítíte nepříjemně, nebo si všimnete jakékoliv kožní reakce.
- 5, Děti a lidé, kteří nejsou schopni identifikovat nebezpečí, nesmí masážní přístroj používat, držte ho mimo jejich dosah.
- 6, Nepoužívejte masážní přístroj v koupelně, v prostředí s vysokou teplotou.
- 7, Nepoužívejte masážní přístroj, když spíte.

Toto není zdravotnické zařízení!

Příslušenství



1, Masážní přístroj na nohy 2, Masážní přístroj na ruce 3, Masážní přístroj na zápěstí 4, Vzduchové trubice




5, Ovladač 6, DC12V adaptér 7, Vibrační podložky na chodidla

Ovladač




- 1, Časový displej
- 2, ZAPNOUT / VYPNOUT
- 3, A / A+ / B / B+ / C / C+
- 4, 1,2,3,4 výběr hadice
- 5, Nastavení Intenzity
- 6, Nastavení času

Sestavení

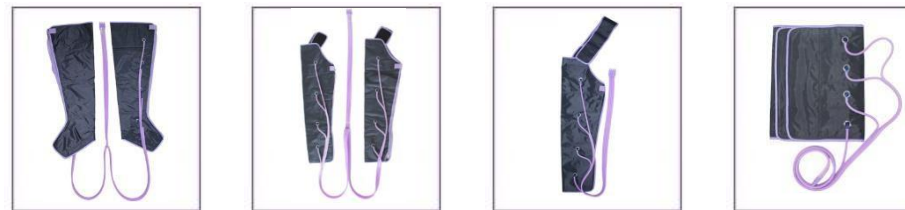

Připojte trubice k masážnímu přístroji jako je na obrázcích nahoře

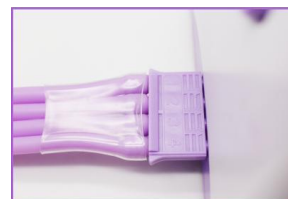

Připojte vzduchové trubice k ovladači jako je na obrázku vlevo (čísla na horní straně)



Připojte adaptér k ovladači jako je na obrázku vlevo

Funkce

- * 9 úrovní nastavení intenzity
- * Po zapnutí masážního přístroje je jako výchozí nastavena 5. úroveň intenzity. Můžete zvýšit + nebo snížit - intenzitu levým + / -.
- * Na LED displeji se odpočítává čas do vypnutí. Zobrazené číslo 20 znamená, že po 20 minutách se masážní přístroj automaticky vypne.
- * Po zapnutí masážního přístroje je jako výchozí hodnota nastaveno 20 minut. Čas můžete zvýšit + nebo - snížit pravým + / -.