




Elektronický ohřivač parafínu



Jednoduchý
NÁVOD K POUŽITÍ

Díly a instalační diagram

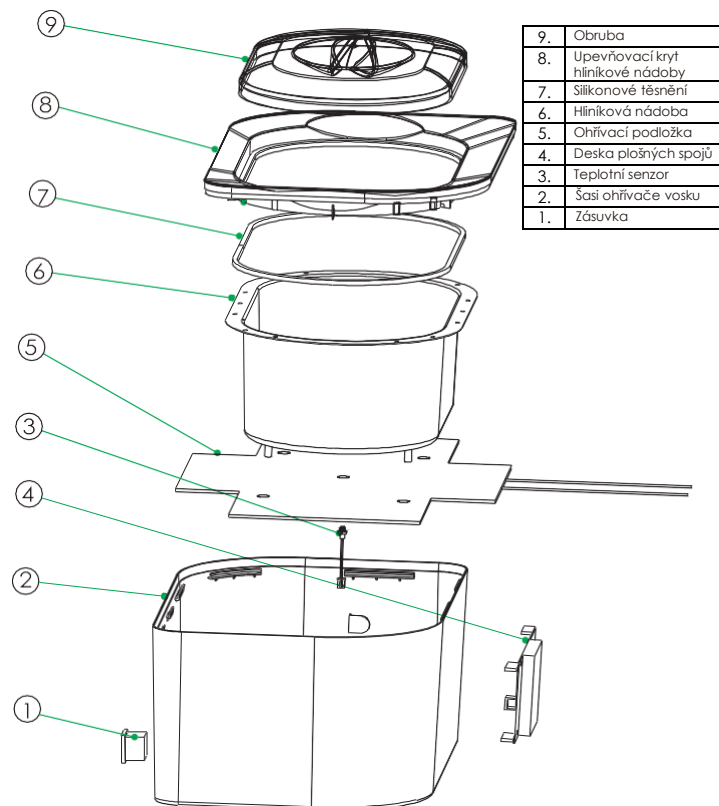

1. Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, sensorickými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo byli obeznámeni, jak přístroj používat bezpečným způsobem a uvědomují si možné riziko.

2. Děti si s tímto přístrojem nesmí hrát.

3. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU

Název výrobku: Elektronický ohřivač parafínu

Číslo modelu výrobku: FHC-4000A

Provozní režim: Dotyková indukce

Objem: 4000 ml

Rozměry výrobku: 377*243*165 mm

Čistá hmotnost: 1,7 kg

Přípustitelné napětí:

Americký standard 110-120 V, 50/60 HZ

Evropský standard 220-240 V, 50/60 HZ

Výkon: 200 W



Seznámení se s provozem:

1. Tento výrobek má dotykový spínač, obrazovka displeje je skrytá a není vidět před zapnutím výrobku.

2. Zapnutí napájení podle napěťových požadavků výrobku; indukuje, že napájení je zapnuto, jakmile zazní krátký zvuk „di“

3. Po spuštění se rozsvítí celá obrazovka displeje, displej s LOGEM, digitální displej a displej provozních tlačítek.

4. Dva způsoby ohřívání: Teplotní ohřívání °C / časové ohřívání H, teplotní ohřívání je výchozí po zapnutí.

5. Symbol napájení je multifunkční provozní tlačítko, dotkněte se jednou a napájení se zapne se zvukem <di>, dotkněte se ho znovu a zařízení se vypne.

6. Zapněte, dotkněte se symbolu napájení 3s, zapněte režim ohřívání, stejný provoz při přepnutí do druhého režimu ohřívání.

7. Rozsah teploty ohřívání: 30-70 °C, výchozí teplota je 55 °C (když se spustí), symboly + - jsou tlačítka regulace teploty. Když dosáhne nastavené teploty, zazní <di di> a udržuje ji konstantní podle nastavené teploty.

8. Rozsah načasování: 1-99 min, výchozí čas po spuštění je 30 minut, symboly + - jsou tlačítka regulace času. V režimu časového vytápění bude výrobek vyhříván nejvyšší teplotou 70 °C, jakmile dosáhne nastaveného času, produkt automaticky zastaví vytápění a sníží teplotu. Když teplota klesne na 55 °C, výrobek vydá rychlý zvuk <di di di>, a udržuje konstantní teplotu na 55 °C.

9. Teplota na displeji výrobku odpovídá aktuální teplotě vosku. Za podmínek teploty prostředí 25 °C je tolerance teploty ± 1 °C.