

Návod k použití

Přístroj na formování postavy



1.1 O tomto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními zařízeními. Pečlivě si přečtěte pokyny a výrobek používejte pouze tak, jak je zde popsáno, aby nedošlo k neúmyslnému zranění nebo poškození.

Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Při předávání zboží je nutné předat i tyto pokyny.



Tento symbol vás varuje před zraněním.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Signální slovo NEBEZPEČENSTVO varuje před možnými vážnými zraněními a ohrožením života.

Signální slovo VÝSTRAHA varuje před zraněním a vážnými škodami na majetku.

Signální slovo POZOR varuje před drobnými zraněními nebo škodami.

Likvidace

Zařízení a obal byly vyrobeny z hodnotných materiálů, které lze recyklovat. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. Likvidace obalu: využijte místní možnosti kompletního sběru papíru, kartonu a lehkých obalů.



Zařízení označená tímto symbolem nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem! Ze zákona jste povinni likvidovat stará zařízení a spotřebiče odděleně od komunálního odpadu. Můžete je bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře. Pro další informace se prosím obraťte na místní městskou radu.

1. Obsah a konstrukce

2.1 Obsah balení

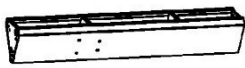

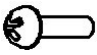


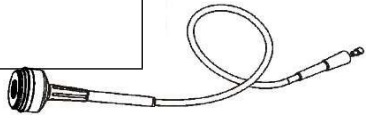



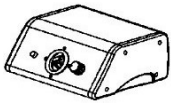




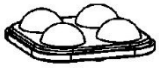
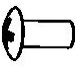



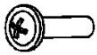
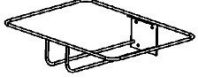
Toto zařízení je optimální pro spalování tuků a celkové hubnutí; používá se také v oblasti léčebné rehabilitace, protože jeho účinek na hubnutí je mnohem účinnější než klasická masáž. Snadná manipulace umožňuje profesionální a bezpečné ošetření.


kusů	číslo
5	ručních vzorků
1	nástroj
1	elektrický kabel
1	držák
1	sloupek
1	rám základny se 4 kolečky
1	aplikátor

Ošetření podporuje krevní oběh a aktivuje buňky, pojivovou tkáň a metabolismus. Vibrace stimulují spalování tuků a svalová vlákna. To pomáhá uvolnit tukové buňky a stimulovat kolagenová vlákna.


Kromě toho přístroj podporuje lymfatický oběh a procvičuje svaly.

2.2 Konstrukce


A	Sloupek		1	L	Pružinová podložka (Ø4)		3
B	Šroub (M5×16)		10	N	Příslušenství-3		1
C	Pružinová podložka (Ø5)		6	O	Příslušenství-4		1
D	Těsnění (Ø5)		6				
E	Příslušenství-1		1	P	Klin		1
F	Hlavní část		1	Q	Příslušenství-5		1
G	Podložka		1	R	Příslušenství-6		1
H	Zadní deska		1	S	Příslušenství-7		1
I	Šroub (M3×6)		10	T	Příslušenství-8		1
J	Příslušenství-2		1	U	Příslušenství-9		1
K	Šroub (M4×12)		3	V	Příslušenství-10		1

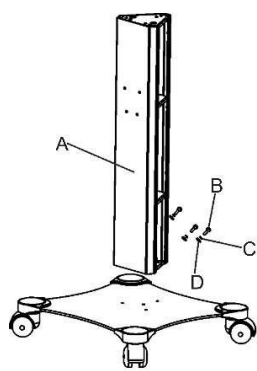









1



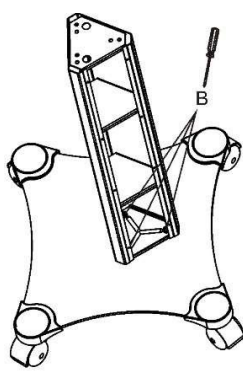


2

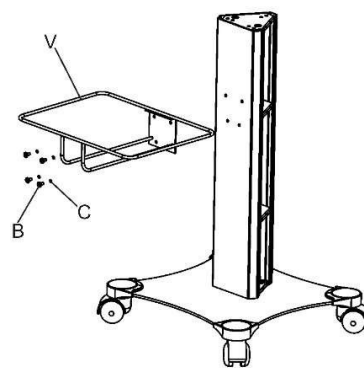

3

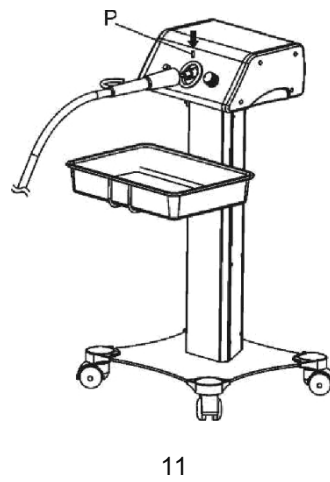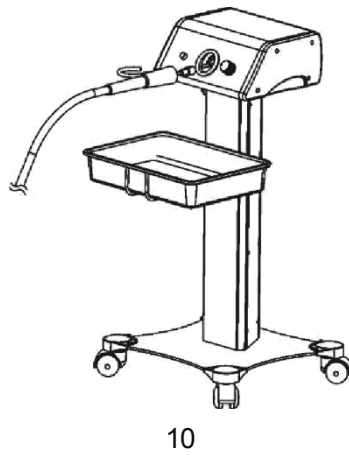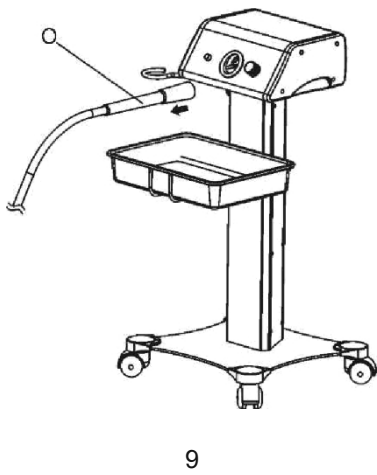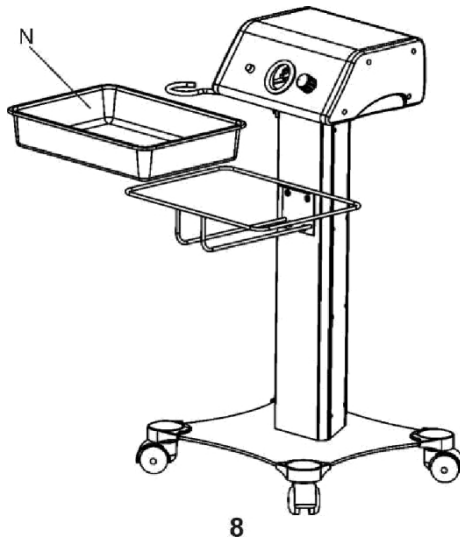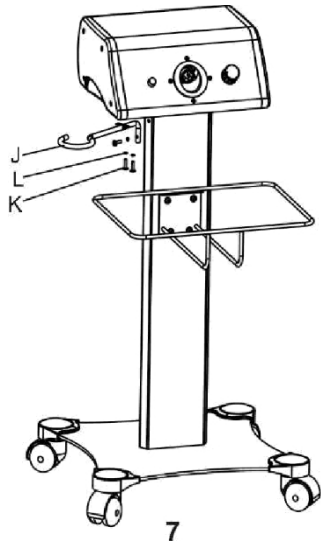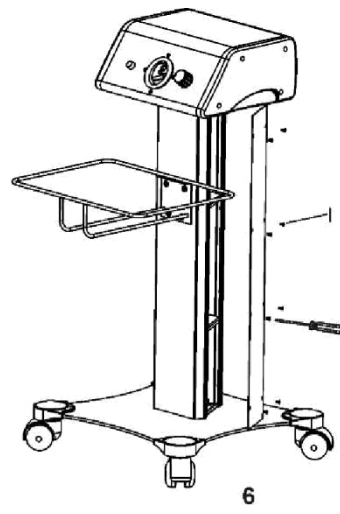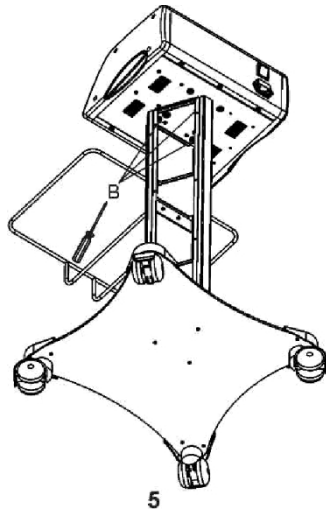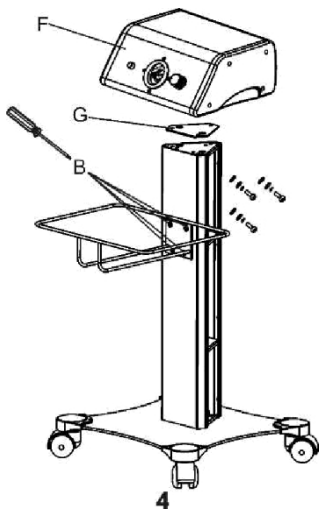

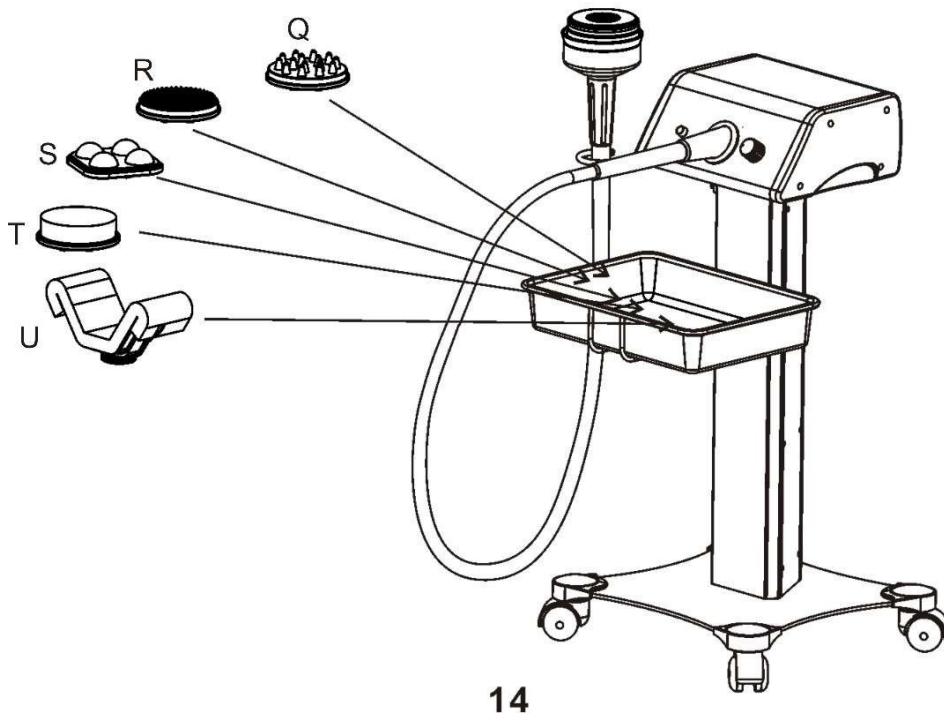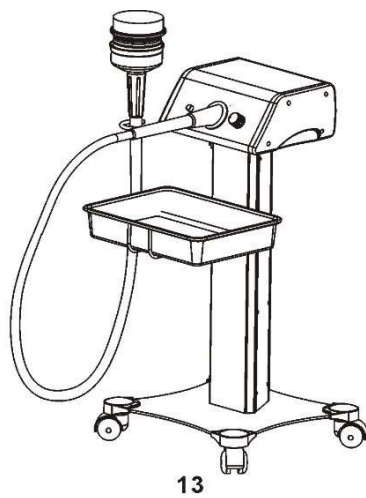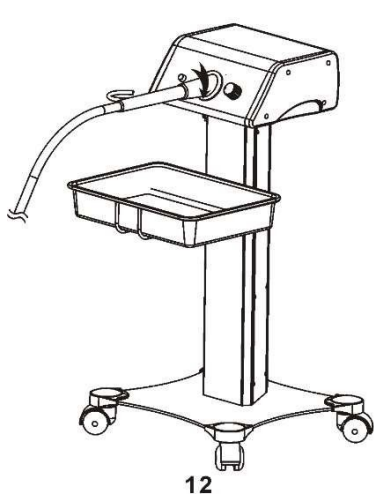

2.3 Technické parametry

Hmotnost	Výška	Napětí	Délka	Hz	Šířka	W
15 kg	86 cm	100–240	41 cm	50/60	38 cm	100 W



2. Určené použití

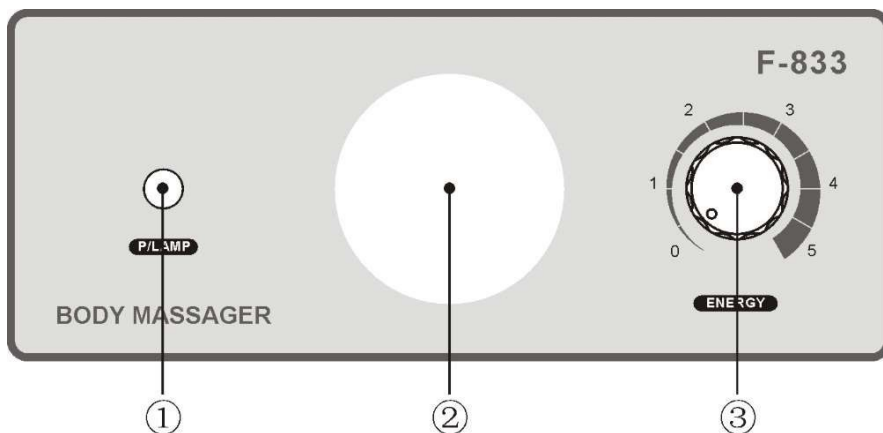
3.1 Použití



Nebezpečí pro děti.




Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí.



- ① Kontrolka napájení
- ② Výstupní port
- ③ Regulátor otáček

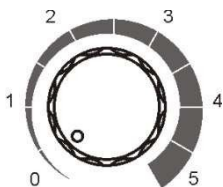volba rychlosti otáčení



- 1、 První převod se používá pro malé části těla, jako jsou klouby, krk, chodidla.
- 2、 Druhý stupeň se používá k odbourávání tuku a vyhlazování vrásek.
- 3、 Třetí až pátý převodový stupeň se používá k masáži a uvolnění svalů; tyto tři převody se mohou samy přizpůsobit způsobu, jakým je masér používá.

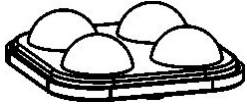
Výběr masážní sondy



Hrubá masážní sonda stimuluje svaly, stejně jako masér používá prst k masáži vašeho těla, může pomoci zmírnit bolest, odstranit únavu, uvolnit svaly a ztuhlý tuk. Dokáže masírovat tuk a vytvářet teplo při otáčkách 3–5, což je způsob, jak zhubnout.




Tenká masážní sonda se používá hlavně na drsnou pokožku, vrásky a měkký tuk; můžete zhubnout masáží pokožky a organizací spojování vláken. Doporučujeme používat sondu při nižších otáčkách 2–3.



Čtvercová masážní sonda se používá hlavně na větší části těla, například na záda, a pomáhá při masáži těla v místech, kde je nedostatek pohybu. Dokáže zabránit únavě a ztuhnutí svalů a také dokáže udržet pružnost kloubů, aby vaše tělo bylo pružnější, a spaluje tuk, abyste zhubli.



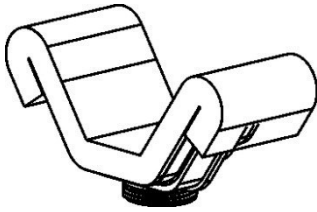Lze aplikovat na všechny akupunkturní body vašeho těla, pokrývá všechny části těla, dlaně a chodidla. Doporučujeme použít 1. rychlostní stupeň, pokud si chcete provést masáž akupunkturních bodů (před aplikací na tělo je lepší sondu zabalit)



Aplikuje se hlavně na ruce, krk, boky, stehna; při masáži může účinně zmírnit svalové napětí a únavu. Doporučujeme použít 3.–5. převodový stupeň za těchto podmínek (před aplikací na tělo je lepší sondu zabalit)

Upozornění

1. Po spuštění hostitelského stroje byste masážní sondu neměli zavěšovat ani pokládat na zem. Při používání přístroje musí obsluha držet rukojeť masážní sondy.
2. Při používání přístroje dávejte pozor na délku provozu a měkkou trubici příliš nepřetahujte.
3. Měkká trubice se nesmí nadměrně ohýbat, například ohyb nesmí přesáhnout 100°, přičemž úchytná část nesmí být menší než 150°.
4. Pokud onemocníte, postupujte podle pokynů lékaře.
5. V rámci správného pracovního prostředí je nutné pružnou osu po cca 200 hodinách provozu vyčistit a doplnit mazivem. V opačném případě bude osa rychle stárnout, opotřebovávat se a zlomí se.

3.2 Důležité bezpečnostní pokyny

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností obsluhovat zařízení.

- Toto zařízení nesmějí používat děti a osoby, které jej kvůli svým fyzickým, smyslovým nebo duševním schopnostem nebo kvůli své nezkušenosti či neznalosti nedokážou bezpečně používat. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.
- Udržujte děti mimo dosah přístroje a obalového materiálu!

Nebezpečí způsobené elektrickým proudem

- Nikdy neponořujte zástrčku ani propojovací kabel do vody, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí.
- Nikdy nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.
- Připojujte přístroj pouze do správně nainstalované zásuvky s ochrannými kontakty, jejíž síťové napětí odpovídá technickým údajům přístroje.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je spotřebič, připojovací kabel nebo zástrčka poškozená nebo pokud spotřebič spadl.
- Neprovádějte žádné úpravy na výrobku ani na jeho připojovacím kabelu. Opravy provádějte pouze v odborné dílně nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Nádržka na vodu musí být bez mastných a olejových látek, aby se zabránilo úniku vody.
- Před přemístěním jednotky ji odpojte ze zásuvky a vypusťte vodu ze zařízení a z nádržky na vodu.
- Ujistěte se, že je zástrčka v dobrém stavu a je zapojena přímo do zásuvky. Vyhněte se používání více prodlužovacích kabelů.
- Nikdy nepřipojujte ani neodpojujte zařízení mokřima rukama nebo tažením za napájecí kabel z napájecího konektoru.
- Nikdy nepoužívejte zařízení ve vlhkém nebo nevětraném prostředí, jako jsou vlhké místnosti nebo koupelny, aby nedošlo k poškození elektrických součástí vašeho zařízení.
- Zařízení nesmí být přemísťováno za napájecí kabel.
- Po údržbě přístroj vypněte a odpojte od napájení.

Varování

- Nepokoušejte se jej otevírat sami.
- Přístroj nikdy nepoužívejte venku, povětrnostní podmínky by jej mohly poškodit.
- Nepoužívejte tento přístroj s kyselými nebo zásaditými látkami.
- K léčbě nejsou vhodní lidé, kteří v době léčby trpí srdečními chorobami, infekčními chorobami a alergiemi, a ti, kteří mají v těle kovové části.
- Pokud přístroj nefunguje správně, kontaktujte prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili. Nechte jej opravit v odborném servisu a nepokoušejte se pouzdro otevírat sami.
- Pokud dojde k neobvyklým událostem, okamžitě vypněte napájení a odpojte přístroj od sítě, obraťte se na servis nebo prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili.
- Nedovoľte, aby kryt otevíraly neoprávněné osoby.
- Pokud jsou napájecí kabely poškozené, musí původní díly vyměnit výrobce nebo servis.

Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí.

4. Údržba a řešení problémů

4.1 Údržba

Pozor! poškození zařízení nebo zranění v důsledku kontaminace.

Nástavce po použití důkladně očistěte a uložte na suchém místě.

Poznámka:

- Upozorňujeme, že zařízení musí vždy stát na vodorovném a rovném povrchu.
- Zařízení nesmí být vystaveno slunečnímu záření, jinak by mohlo dojít k poruše funkce.

4.2 Možné poruchy

Indikace	Příčina	Opatření
Zařízení nereaguje	<ul style="list-style-type: none">• Napájecí kabel není správně připojen. Došlo k přerušení napájení, např. v důsledku výpadku proudu.	<ul style="list-style-type: none">• Odpojte zástrčku a znovu ji zapojte
Zařízení nereaguje na nastavení	<ul style="list-style-type: none">• Žádné napájení• Tlačítko nefunguje	<ul style="list-style-type: none">• Odpojte napájení a znovu zapojte síťovou zástrčku• Stiskněte jiné tlačítko