

4-komorový lymfodrenážní přístroj
Fabulo AirGo 4



Uživatelská příručka

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a
dobře si jej uschovejte pro budoucí použití.

I Obsah

Bezpečnostní opatření	1
Často kladené otázky	2
Technické parametry	2
Řešení problémů	5
Popis produktu Návod k použití	6
Poznámky po použití	7
Čištění	9
Skládování a údržba	10
Likvidace	10
Obsah balení	10

I Bezpečnostní opatření

Abyste zajistili bezpečné a správné používání dobitého kompresorového rekuperačního systému, přečtěte si prosím pozorně následující bezpečnostní opatření.

■ Upozornění

- Na tomto zařízení nejsou povoleny žádné úpravy.
1. Pokud během používání pocítíte silnou bolest, jakékoli neobvyklé příznaky nebo chcete návlek v případě nouze sundat:
- Stisknutím tlačítka napájení stroj zastavte nebo odpojte hadice;
 - Odstraňte rukávy a poraďte se s lékařem.
2. Pokud trpíte některým z následujících stavů, poraďte se před použitím tohoto přístroje se svým lékařem:
- Přetrvávající zánět, infekce, bolest neznámého původu v místě aplikace nebo v jeho blízkosti;
 - máte zlomeniny nebo vykloubení kostí v místě aplikace nebo v jeho blízkosti;
 - jste léčeni nebo máte kontraindikaci vyžadující použití jakékoli jednotky lékařského managementu.
 - Používání kardiostimulátoru nebo jiných lékařských přístrojů, které jsou náchylné k elektrickému rušení;
 - Bolest u ztuhlých nádob;
 - Bolest při onemocnění srdce;
 - Bolest při osteoporóze

- Živáčná periferní neuropatie nebo smyslová dysfunkce v důsledku diabetu;
- Nevhodnost masáže z poranění těla;
- Uchovávejte jej mimo dosah kojenců, dětí a osob, které jej nemohou samostatně používat.
- 4. Nepoužívejte jiný než originální napájecí adaptér.
- 5. Napájecí kabel napájecího adaptéru nepoškrábajte, nepoškozujte, nadměrně neohýbejte, netahajte za něj a nekruťte jej. V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem
- 6. Není dovoleno používat, pokud napájecí adaptér nefunguje správně nebo je uvolněná zástrčka.
- 7. Napájecí adaptér nepřipojujte ani neodpojujte mokřima rukama.
- 8. Nepokládejte ovladač do deky a nepoužívejte zařízení při vysoké teplotě.
- 9. Je zakázáno zařízení bez povolení přestavovat, rozebírat nebo opravovat.


I Upozornění

1. Používejte pouze napájecí zdroj dodaný se systémem. Použití jiného zdroje může způsobit poruchu systému.
2. Nepoužívejte jej v koupelně ani na jiných vlhkých místech.
3. Uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Pokud napájecí adaptér nepoužíváte, odpojte ze zásuvky.
5. Při používání této jednotky nebo při nošení rukávů nepohybujte.
6. Nenechávejte systém, napájecí zdroj ani žádné příslušenství na místě, kde by je mohly poškodit děti, domácí zvířata, škůdci nebo tekutiny.
7. Nástavce jsou navrženy tak, aby je mohla používat vždy jen jedna osoba.


I Často kladené otázky

- Q.1: Jak tento produkt ?
Odpověď: Jedná se o vzduchový kompresor, 4 vzduchové komory (chodidlo, lýtko, horní část lýtky a stehno) se nafukují a vyfukují a zpracovávají sekcemi, která stimuluje ruční masáž a hlazení, maximalizuje průtok krve, po celém těle, což pomáhá snižovat bolestivost svalů a/nebo bolest v ošetřovaných oblastech a zlepšuje krevní oběh.
- Q.2: Kolik masážních režimů existuje a jaký je mezi nimi rozdíl?
A.2: K dispozici jsou 3 masáže, viz rozdíly níže:


Režim 1: Sekvenční režim

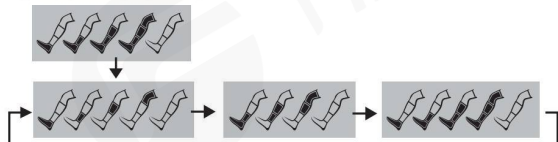

Režim 2: Oběhový režim

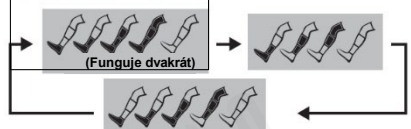

Režim 3: Kombinovaný režim

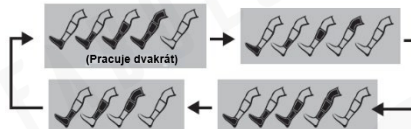

- O.3: Musí být napájecí zdroj při používání zapojen do elektrické zásuvky?
Odpověď: Ne, ovladač je vybaven dobíjecí baterií, kterou můžete použít, kdekoli budete chtít. Plně nabitá baterie vydrží až 3-4 hodiny (v závislosti na režimu a intenzitě).
- Q.4: Co dělat, když mám pocit, že je síla masáže příliš slabá nebo příliš silná?
A.4: Intenzita je od 40 mmHg do 150 mmHg, vyberte si intenzitu, která vám vyhovuje. Pokud máte pocit, že je příliš silná i při nejnižším nastavení, přestaňte přístroj používat, před dalším používáním doporučujeme konzultaci s lékařem. Otázka 5: Jak dlouho bych měl přístroj používat?
A.5: Doporučuje se používat jednou až dvakrát, maximálně 30 minut.
- Pokud se však cítíte příliš unavení a chcete, aby masáž trvala déle a odstranila bolest, můžete ji používat déle.
- Q.6: Proč je na zadní straně ovladače zadní ?
A.6: Zadní kryt lze použít k zasažení do připojovacích otvorů vzduchové hadice spolu s další vzduchovou hadicí, což umožňuje samostatnou funkci jedné masáže.

- O.7: Mohu zařízení používat pouze na jedné noze?
A.7: Ano, můžete. Pomocí silikonové gumy zablokujte jeden vzduchový otvor a pak můžete nosit jeden z návleků na požadované noze. Pro lepší úlevu doporučujeme používat oba návleky současně.
- O.8: Proč ovladač vydává zvuk?
A.8: Zvuk vychází z pracovního vzduchového terpadla v řídící, které nepřetržitě dodává vzduch do airbagů v rukávech, je to slabý zvuk a je to normální jev.
- Q.9: Kdy mám tento produkt používat?
A.9: Tento produkt podporuje průtok krve, účinně odstraňuje bolest svalů a únavu, můžete jej použít kdykoli budete chtít. Můžete jej použít před tréninkem pro zahřátí svalů, po tréninku pro lepší a rychlejší regeneraci nebo po návratu domů po dlouhém dni v práci.

I Technické údaje:


Model	S9061B
Název	Dobíjecí systém rekuperace stlačeného vzduchu
Adaptér	Vstupní napětí: 100-240 V, AC 50/60 Hz, Výstup stejnosměrného proudu: 12V 2A
Jmenovitý výkon:	24W
Režim komprese	3 režimy: sekvence / cirkulace / kombinace
Úroveň intenzity/ rozsah tlaku	40-150 mmHg
Čas	15-60 minut
Hmotnost výrobku	2,92 KG
Hmotnost balení	4,38 KG
Typ rukávů	4 - Komorový návlek - chodidlo / lýtko / horní lýtko / stehno
Baterie	Kapacita baterie 2500 mAh: 3-4 hodiny Doba aplikace 2,5 hodiny Doba nabíjení
Velikost obuvi	33,9 palce; maximální šířka stehna: 28,3 palce; maximální šířka chodidla: 14 palců.

I Řešení problémů


Problémy	Možné příčiny	Řešení
Nefunguje a obrazovka je vypnuta.	Napájení není zapnuté	Stiskněte tlačítko napájení zapnete ovladač
	Baterie je vybitá	Plně nabijte baterii
Obrazovka je zapnutá, ale rukávy nefungují.	Pokud zapnete tlačítko napájení " " , ale nestisknete tlačítko " " , regulátor se po 2 minutách vypne.	Začněte stisknutím tlačítka " " Starti/Pauza.
	K regulátoru připojte pouze jednu vzduchovou hadici.	Připojte 2 vzduchové hadice nebo 1 vzduchovou a zadní kryt (regulátoru) k regulátoru.
Přerušení nebo zastavení čerpání během provozu.	připojené vzduchové hadice	Ujistěte se, že jsou vzduchové hadice správně a úplně připojeny k regulátoru (váměte si strany, kde je tlačítko otočeno směrem "NAHORU").
	Stisknutím tlačítka Starti/Pauza pozastavíte	Spustíte stisknutím tlačítka Starti/Pauza
	Rukávy jsou poškozené	Zkontrolujte těsnost pouzder vzduchu, pokud ano, kontaktujte prosím naši zákaznickům.
	Baterie je vybitá	Plně nabijte baterii
	Doba ošetření uplynula	Zařízení se automaticky vypne, po uplynutí nastaveného času, v případě potřeby stiskněte tlačítko napájení a spustíte novou relaci.

I Popis produktu


I Řídící jednotka

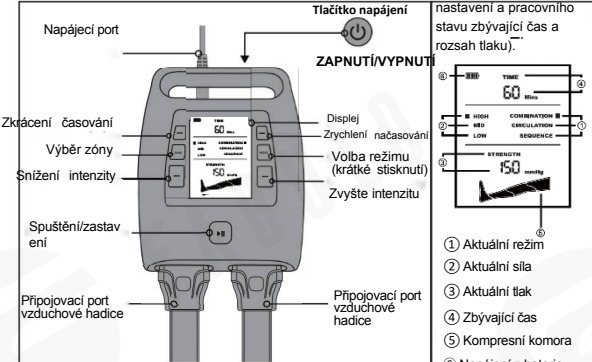

I Obrazovka

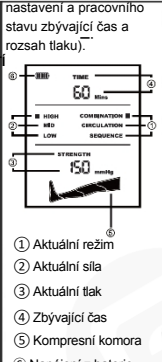

Masíruji rukáv

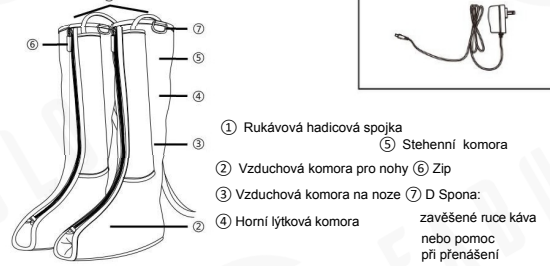


I Adaptér




I Návod k použití

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny. Chcete-li dosáhnout lepší masáže, používejte přístroj podle pokynů.

Ujistěte se, že jsou obě vzduchové hadice připojeny k řídící, tato strana je "HORE".

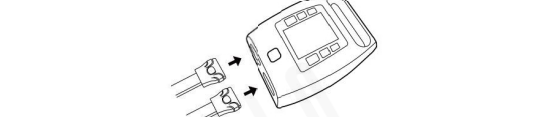

I Možnost napájení z baterie

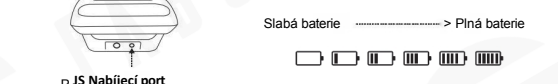


- a. Před prvním použitím baterii plně nabijte po dobu 2-2,5 hodiny.
- b. Nabíjení baterie:
- Připojte adaptér k nabíjecímu portu JS na základně ovladače.
 - Zapojte adaptér do elektrické zásuvky.
 - c. Indikátor baterie na obrazovce ovladače zobrazuje aktuální úroveň nabití. d. Stav baterie:
 - Když se vybité, indikátor baterie je prázdný a zařízení se vypne.
 - Když se baterie nabíjí, indikátor baterie stále bliká.
 - Po úplném nabití přestane indikátor baterie blikat.
 - e. Než necháte zařízení delší dobu nepoužívané, plně ho nabijte. Doporučuje se nabíjet každých 5, aby nedošlo k poškození baterie v důsledku výpadku napájení.
 - 2. Rukávy si správně nasadte na nohu. Mezi rukávy na levé a pravé straně není žádný rozdíl.




- * Před nasazením se ujistěte, že je zip zcela zapnutý, nikdy se nepokoušejte používat systém s částečně nebo zcela rozepnutým zipem.
- * Pro rychlé nasazení můžete použít sponu D v horní části pouzdra.

3. Najděte si pohodlnou polohu , vleze nebo vleže. Dlouze stiskněte tlačítko napájení " " na tři sekundy.
- 1). Zazní zvuk "Di", rozsvítí se obrazovka a zobrazí se aktuální nastavení. Začněte stisknutím tlačítka " " Starti/Pauza.
- 2). Začíná s výchozím nastavením: režim 1 (sekvenční režim), intenzita je 60 mmHg, časování 30 minut.

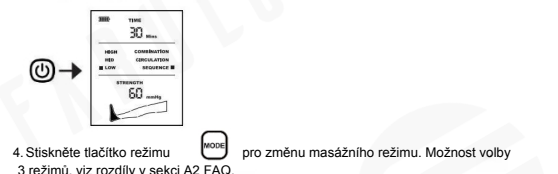


4. Stiskněte tlačítko režimu " " pro změnu masážního režimu. Možnost volby 3 režimů, viz rozdíly v sekci A2 FAQ.


5. Stiskněte tlačítko " " pro výběr zóny, kterou chcete masírovat, můžete zablkovat zespění, které chcete masírovat, pouze na jednu zónu. Pokud chcete opět masírovat celou nohu, stiskněte tlačítko MOJE a vychutnejte si masáž celé nohy.

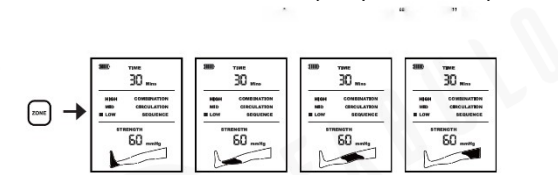

6. Stisknutím tlačítka intenzity " " nastavíte intenzitu tlaku vzduchu, lze zvazit 40 mmHg-150 mmHg.
- * Při prvním použití doporučujeme začít s nízkou intenzitou a postupně ji zvyšovat, jakmile si na ni zvyknete.

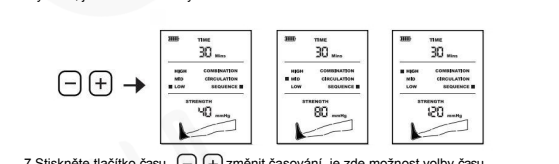


7. Stiskněte tlačítko času " " změnit časování, je zde možnost volby času. ošetření 15-60 minut. Dobu lze kdykoli během sezení upravit.

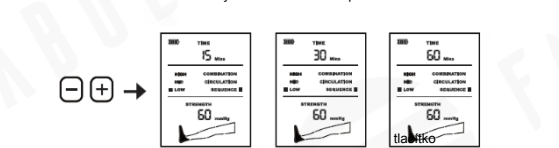

8. Přístroj se po uplynutí doby ošetření automaticky vypne, pokud si chcete masáž užít více nebo ji ukončit dříve, můžete kdykoli stisknout napájení.

I Poznámky po použití

1. Po ukončení používání přístroje vypněte řídící jednotku stisknutím tlačítka a odpojte adaptér od řídící jednotky a od elektrické zásuvky.
2. Odpojte hadici od řídící jednotky stisknutím tlačítka na horní straně hadice a vytáhněte ji.
3. Veškeré příslušenství zabalte do původního obalu nebo do účinné tašky.

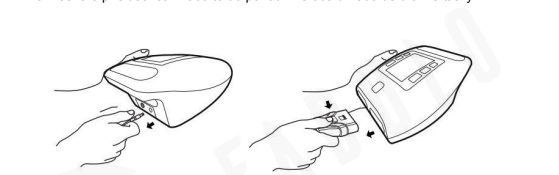

I Úklid

- Při čištění přístroje nezapomeňte vypnout napájení.
1. V případě znečištění otevřete řídící jednotku, objímky a hadice vlhkým, čistým hadříkem.
2. Důkladně je osušte čistým hadříkem.
3. K čištění přístroje nepoužívejte benzín, alkohol, ředidlo ani jiné dráždivé kapaliny.
- mohlo by dojít k poruše nebo k poškození či vyblednutí součástí.
4. Do hadic se nesmí dostat cizí předměty.
5. Nečistěte chemicky.

I Skládování a údržba

1. Tento výrobek sami nerozebírejte. Nemá žádné díly, které . V případě potřeby servisu nebo opravy se obraťte na zákaznický servis.
2. Uchovávejte mimo dosah kojenců, dětí a osob bez možnosti samostatného použití.
3. Neumísťujte jej do prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.
4. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.
5. Vyvarujte se propíchnutí airbagu a hadic jehlami.
6. Nepokládejte na něj těžké věci.
7. Udržujte otvory řídící , hadicové přípojky a přívod napájení otevřené a bez nečistot.
8. Nedovolte, aby se na řídící jednotce nebo hadicových přípojkách hromadily znečistěný prach. Pokud se v systému nahromadí znečistěný prach, otevřete jej před použitím suchým hadříkem.

I Likvidace

Při likvidaci odpadu dodržujte místní předpisy.

I Obsah balení

- 2x masážní návlek
- 1x řídící
- Napájecí adaptér/AC100-240V, 50/60Hz; DC12V2A
- 1x Uživatelská příručka
- 1x přenosná taška