



HZ-3684A Návod k použití

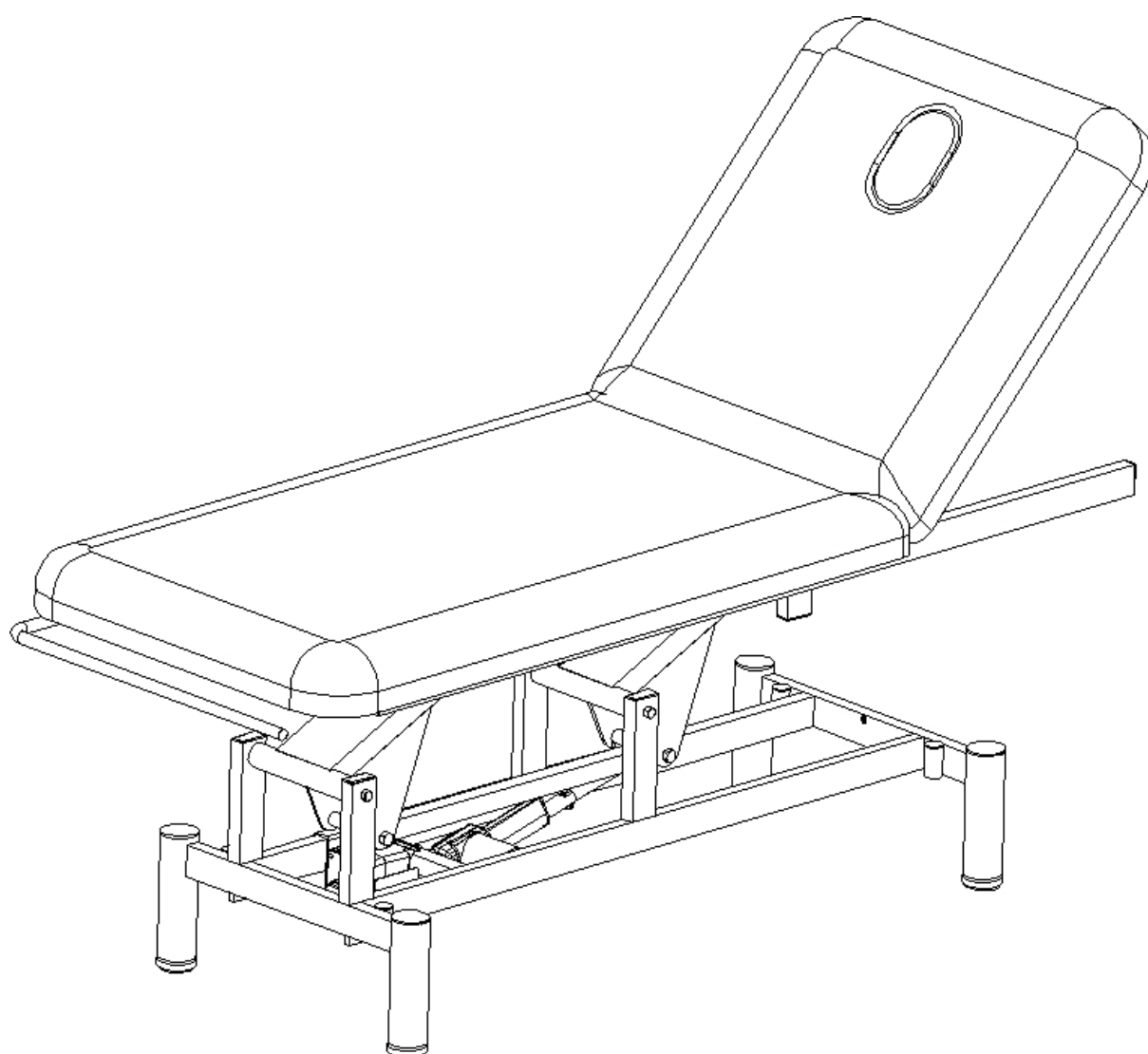

● Doporučené pokyny:

1. Před připojením, provozem nebo nastavením tohoto elektrického kosmetického lehátka si pečlivě přečtěte následující pokyny a tento návod uschovejte.
2. Toto elektrické masážní lůžko používá třížilový napájecí kabel. Měl by být zapojen do tříkolíkové zásuvky s uzemňovací elektrodou. Je třeba zajistit, aby byl hladce připojen k uzemňovací elektrodě, aby se při normálním provozu zabránilo úrazu elektrickým proudem.
3. Všechny zástrčky, tlačítka a další součásti připojené k napájecímu kabelu nesmí být ponořeny do vody nebo jiné kapaliny.
4. Při stisknutí tlačítka na ručním ovládacím panelu nebo nožním ovládacím panelu pro nastavení výšky celé postele je zakázáno vkládat ruce, nohy, hlavu a jiné části těla do ①②③④ na obrázku (podrobnosti najdete na následujícím obrázku).
5. Je zakázáno používat zařízení, pokud jsou zástrčky, tlačítka a další součásti připojené k napájecímu kabelu poškozené.
6. Je třeba si uvědomit, že při použití motoru tohoto masážního křesla je frekvence 6 min/h.
7. Údržbu by neměly provádět osoby bez oficiálního školení.

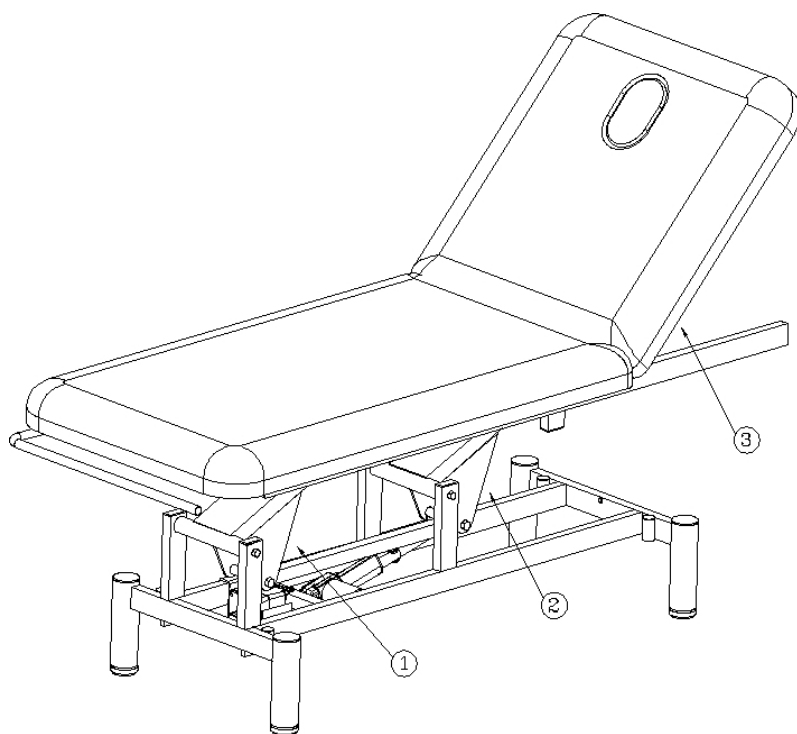



● Upozornění:

1. Osoby trpící osteoporózou nebo srdečními problémy by toto masážní křeslo neměly používat.
2. Těhotné ženy nebo ženy v období menstruace by toto masážní křeslo neměly používat.
3. Osoby se zdravotním postižením by toto masážní křeslo neměly používat.
4. Děti mladší 14 let bez jakéhokoli dohledu a osoby v bezvědomí by toto

masážní křeslo používat.

5. Zlomení napájecího kabelu a zástrčky by mělo být odstraněno před běžným používáním. Zlomení by měl řešit někdo z odborníků nebo poskytovatelů služeb.
6. Napětí by mělo být v souladu s bezpečnostním napětím před oficiálním použitím. Nesprávné napětí může vést k poruše výrobku.
7. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesmíte se dotýkat napájecího kabelu mokřýma rukama.
8. Výrobek by neměl být zapojen dříve, než je nainstalován.
9. Napájecí kabel by měl být uložen tak, aby o něj chodec nezakopl a neupadl.
10. Povrch výrobku by se měl čistit měkkým hadříkem s naředěným neutrálním čisticím prostředkem.
11. Pokud se výrobek nepoužívá, měl by být odpojen ze zásuvky.
12. Tento výrobek nerozebírejte bez oprávnění. O údržbu požádejte autorizované servisní středisko.

● Specifikace produktu :

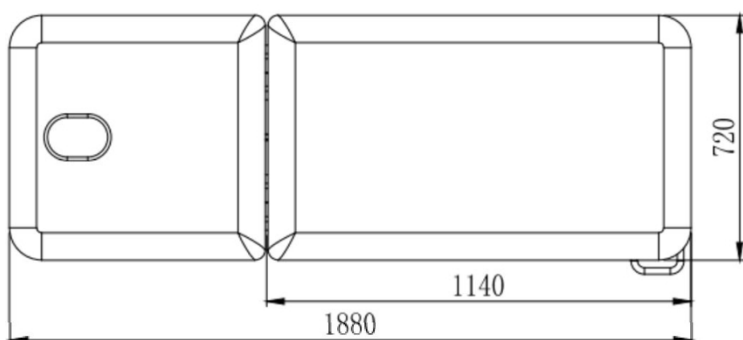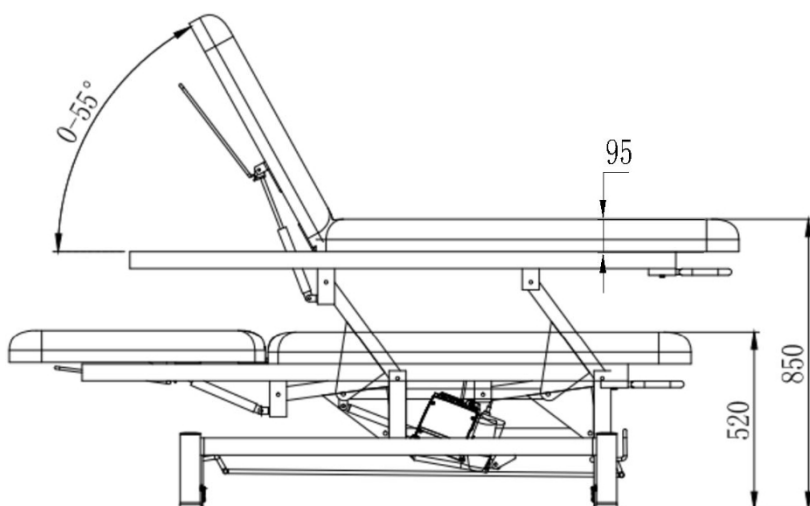

Specifikace produktu :

Rozměry: 1880 x 720 x 520mm

Minimální výška: 520 mm

Maximální výška: 850 mm

Čistá hmotnost: 55 kg

Celková hmotnost: 75 kg

Maximální zatížení: 200 kg

Vstupní napětí:

AC 100–130 V/220–240 V,

50/60 Hz

Výstupní napětí: DC 24 V


Jmenovitý výkon: 50 W

Seznam dílů:

Název	Obrázek	MNOŽSTVÍ
polštář		1 ks
Držák na papír		1 ks


● Instalace :

1、 Instalace držáku na papír: uvolněte knoflík pod koncem postele následujícím způsobem, poté vložte držák na papír a knoflík utáhněte.

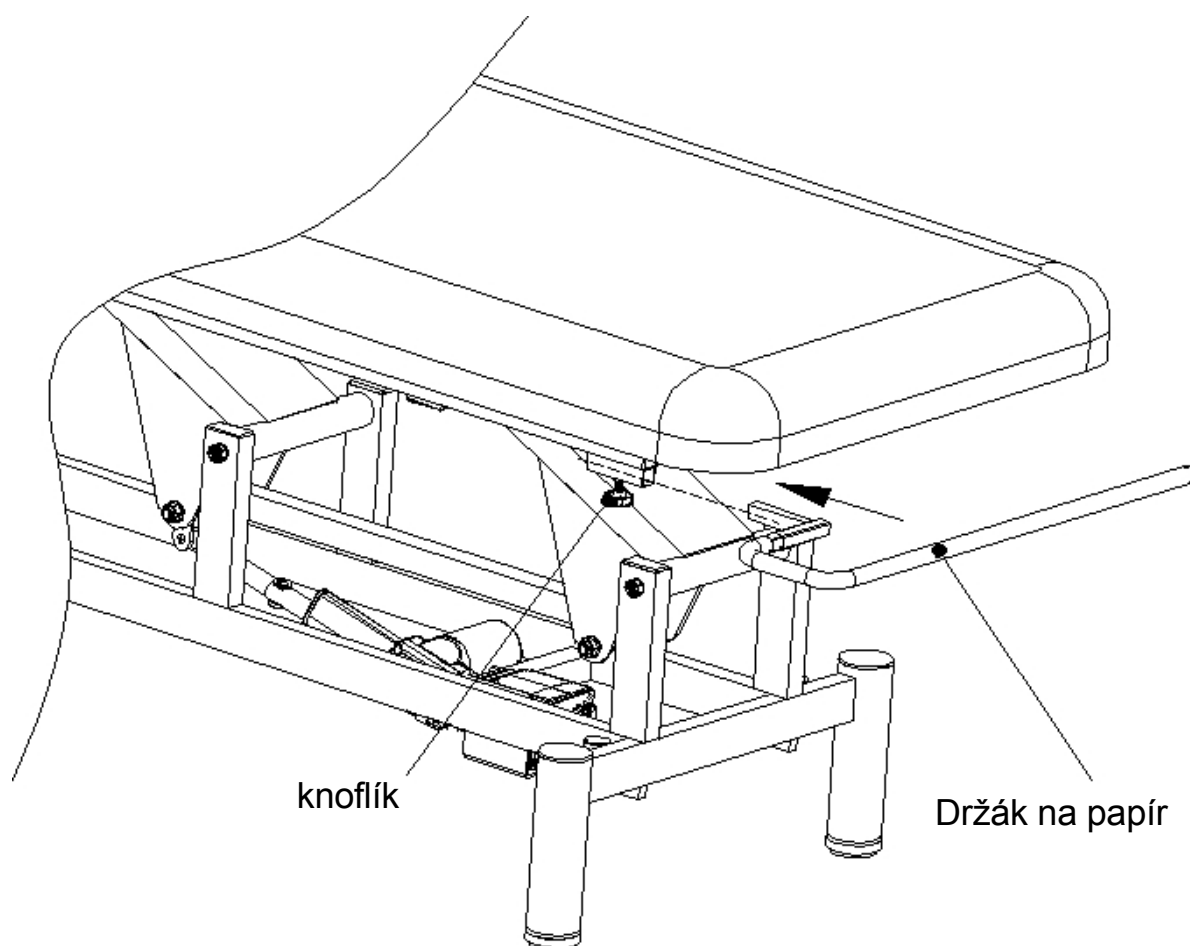

● Hlavní funkce a použití :



Ruční ovládání :

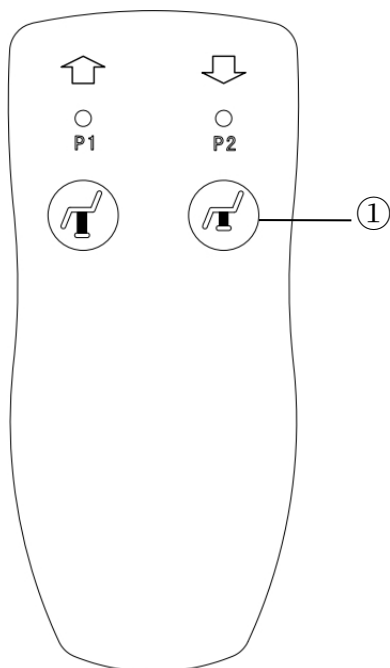

① SW1 stiskněte  nebo 
nastavte lůžko nahoru a dolů

● Nastavení výšky:


stiskněte  nebo 
nastavte lůžko nahoru a
dolů, jak je uvedeno

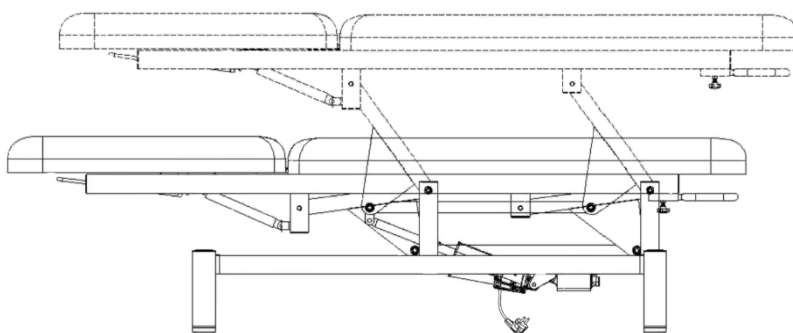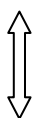

Napájecí kabel


● Nastavení opěradla :

- 1、 Stiskněte rám, nastavovací opěradlo se nakloní nahoru, aby se opěradlo naklonilo do požadované polohy; jakmile se opěradlo uvolní, bude možné úhel zafixovat.
- 2、 Stiskněte nastavovací rám směrem nahoru a zatlačte opěradlo směrem dolů, abyste snížili úhel sklonu opěradla nebo jej vrátili do vodorovné polohy.

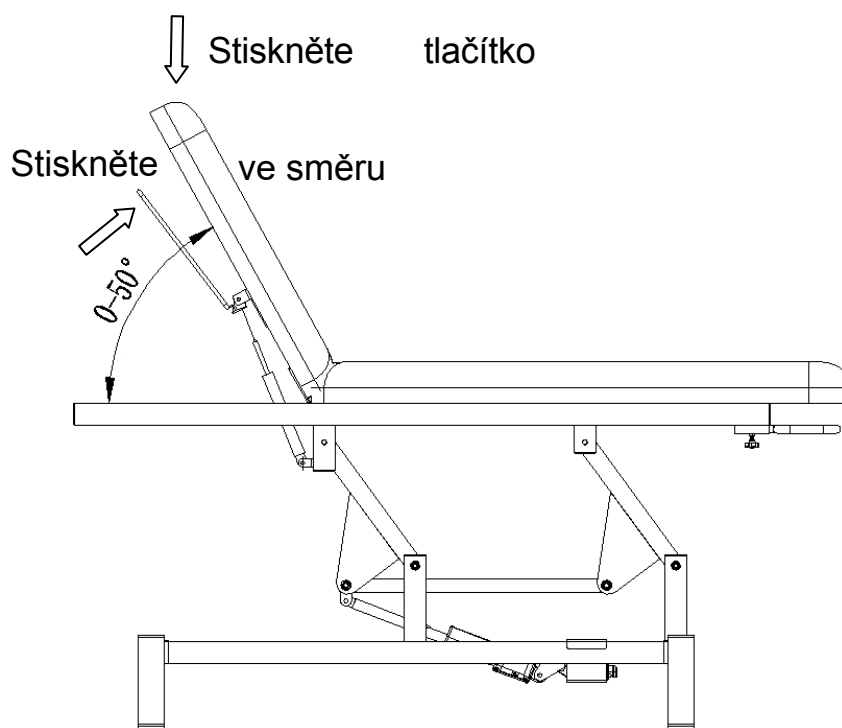

● Jak nastavit plastovou základnu:

Otáčením nastavte výšku gumových nožiček, které mohou vyřešit některé situace s nerovným terénem, jak je znázorněno na obrázku:

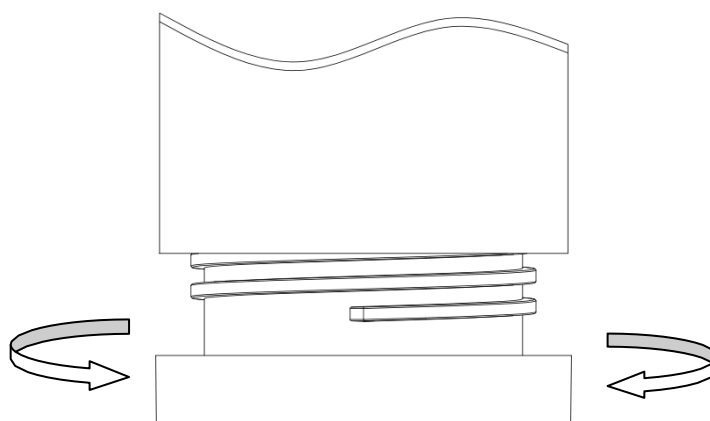

● Údržba:

1. Denní čištění
Prach můžete setřít měkkým suchým hadříkem.
2. Odstranění silných nečistot
Jak všichni víme, je obtížné odstranit silné znečištění pomocí běžného suchého hadříku. V takovém případě můžete nejprve použít měkký hadřík s naředěným neutrálním čisticím prostředkem. Poté můžete použít suchý hadřík k vydrhnutí.
3. Je zakázáno používat benzen, ředidlo, benzín nebo jiná rozpouštědla
Tato rozpouštědla mohou poškodit kůži nebo způsobit korozi povrchu výrobků.
4. Skladovací a provozní prostředí
Nevystavujte výrobek silnému slunečnímu záření a vlhkému prostředí. V opačném případě může dojít k poškození výrobku.
5. Tento výrobek je povoleno používat při teplotě od -5 °C do 50 °C a vlhkosti od 45 % do 85 %.

● Diagnostika poruch :

Pokud se při používání výrobku vyskytne nějaká závada, zkuste ji zkontrolovat a odstranit následujícím způsobem:

Jev	Diagnostika	Postup k odstranění
Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, ale bez jakékoli odezvy.	1、 Zkontrolujte, zda je zapnutý vypínač napájení ovladače	1、 Zapněte vypínač ovladače
	2、 Funkce ovládacího tlačítka dosáhlo maxima.	2、 Zkuste stisknout jiné ovládací tlačítko.
	3、 Zkontrolujte, zda je připojen napájecí zástrčka zapojená.	3、 Odpojte napájecí a znovu jej.
	4、 Zkontrolujte, zda je připojená každý připojovací zástrčka transformátoru.	4、 Odpojte podvozek. Vytáhněte zástrčku a znovu.
Vydávání zvuků a chvění při pohybu nahoru a dolů	Povolte šroub	Dotažte všechny šrouby
Světlo stále stále vypnuté, ačkoli je	Pojistka se spálila.	Vyměňte pojistku.

◆ Poznámky: Nebude informován, pokud vylepšení produktu nemají vliv na vzhled a funkci.