



RUČNÍ VYSOKOFREKVENČNÍ NÁSTROJ


NÁVOD K POUŽITÍ

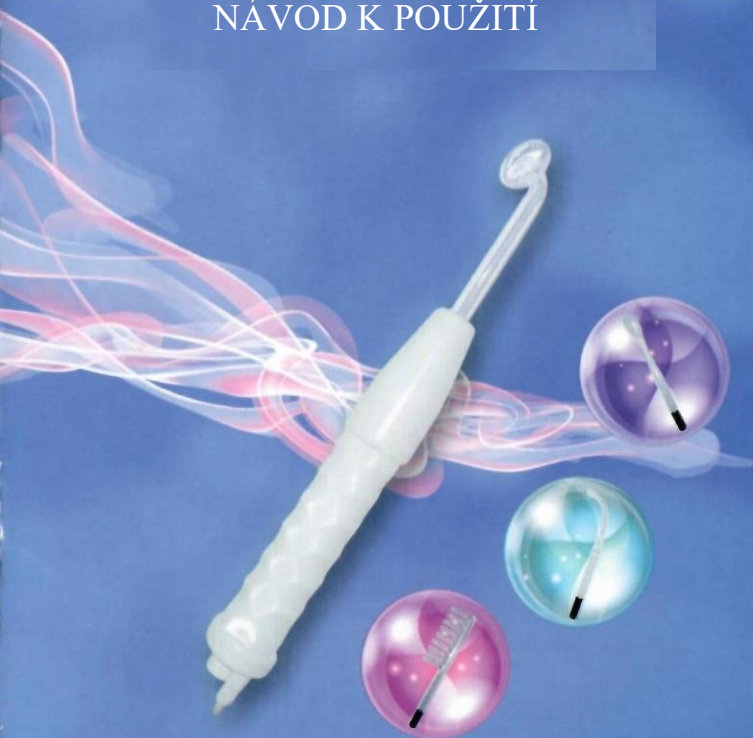

Doplňky

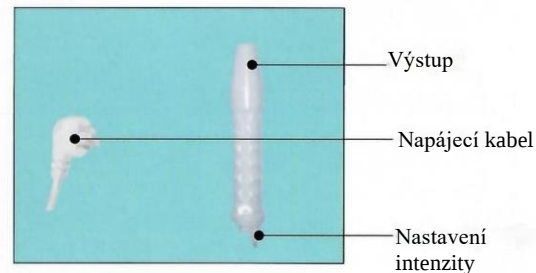

Držák

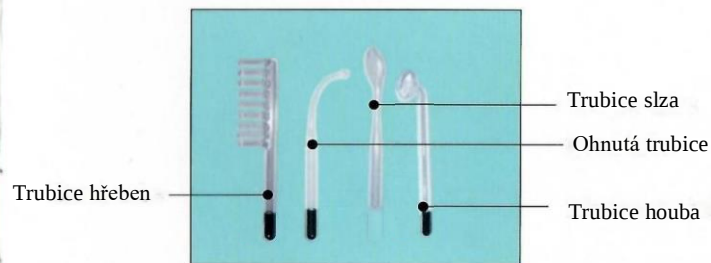

Skleněná trubice

Hlavní pokyny

Vysokofrekvenční elektroterapie je důležitým nástrojem pro krásu. Je to právě přes skleněnou elektrodovou trubici, která produkuje vysoký frekvenční proud a aplikuje se na obličej, čímž dosahuje výsledku léčby.

1. Pomáhá zklidnit nervy a má analgetickou funkci.
2. Vytváří ozon na sterilizaci, může pomoci ránu léčit a omezit póry.
3. Zlepšuje sekreci, hodnotu pH, způsobuje, že se kůže neutralizuje.
4. Zrychluje krevní oběh a zlepšuje metabolismus.
5. Má funkci anti-stárnutí, proti tvorbě vrásek a napínání.

Postup při používání:

1. Nepřímá metoda:

- (1). Zašroubujte skleněnou trubici do držáku.
- (2). Prosím, požádejte klienta, aby podržel skleněnou trubici při doteku s trochou mastkového prášku. Zapněte přístroj a elektřina se dostane přes ruce do celého těla.
- (3). Kosmetici dělají masáž na obličej klienta od krku po bradu a z okraje očí po čelo.
- (4). Nastavte, prosím, intenzitu na 0. Ujistěte se, že přístroj je vypnutý a vyndejte skleněnou trubici z držáku.

Tato metoda je vhodná na suchou pokožku a zestárlou pokožku.

2. Přímá metoda:

- (1). Natřete, prosím, esenci a krém nejprve na obličej, a potom kosmetik drží kovový panel, a umístí skleněnou trubici na obličej klienta. Zapněte přístroj.

(2). Masírujte se skleněnou trubicí jakoby ve tvaru „Z“ nebo spirálovitě obličej klienta, proveďte léčbu následovně, čelo-■ nos - * - pravá strana obličeje- • -brada ~ * levá strana obličeje - * nos-* čelo.

(3). Nastavte, prosím, intenzitu na 0. Ujistěte se, že přístroj je vypnutý a vyndejte skleněnou trubici z držáku.

Tato metoda je vhodná na mastnou pokožku.

3. Jiskřivá metoda:

(1). Zakryjte oči klienta kusem mokré látky a dotýkejte se obličeje se skleněnou trubicí na straně zánětu. Poprvé by měla být léčba kratší než 10 sekund.

(2). Je to normální, pokud se vyskytnou jiskry při doteku obličeje skleněnou trubicí.

(3). Nastavte, prosím, intenzitu na 0. Ujistěte se, že přístroj je vypnutý a vyndejte skleněnou trubici z držáku.

Tato metoda je vhodná na kůži s bolavými místy, zánětem a ranami.

4. Metoda péče o vlasy:

(1). Použijte hřebenovou trubici spolu s epilátorem.

(2). Hřebenovou trubicí pohybujte ve směru růstu vlasů.

(3). Nastavte, prosím, intenzitu na 0. Ujistěte se, že přístroj je vypnutý a vyndejte skleněnou trubici z držáku.

Tato metoda je na stimulaci povrchu kůže, redukuje folikulitidu a zlepšuje zdravý růst vlasů.

Upozornění:

1. Citlivou pokožku, prosím, zakryjte kusem jemné látky, abyste se vyhnuli nadbytečné stimulaci.
2. Neumist'ujte na jedno místo déle než 10 sekund.
3. Tato léčba je nevhodná pro těhotné ženy a lidi s kardiosimulátorem.
4. Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je na zařízení nasazena skleněná trubice. Po dokončení upravte intenzitu na -O".
5. Kůže s pihami a skvrnami je na tuto léčbu nevhodná.

Seznam příslušenství

Název položky	Jednotka	Množství	Poznámky
Držák	Souprava	1	
Skleněná trubice	Souprava	1	Se 4 kusy
Pokyny	Kus	1	

Technická norma:

Napájení: ACQ110V Q220V □ 230V Q240V

Pracovní frekvence: 50-60HZ

Výkon: 10W.

Rozměry: 33x21x6CM

Hmotnost: 1 KG

Důležité bezpečnostní informace

1. Prosím, nerozebírejte přístroj ani se nepokoušejte udělat nějakou jinou operaci, která nebyla uvedena v našem manuálu. Všechny opravné práce by měl provádět náš uznaný profesionální personál.
2. Neskládejte ani neupravujte toto zařízení, pokud jste blízko u vody, nebo máte ruce mokré. Dávejte si pozor, abyste na něj nevytlili tekutinu.
3. Vytáhněte, prosím, zástrčku ze zásuvky, pokud nastanou níže uvedené podmínky. A obraťte se na profesionální servis.
 1. Přístroj byl politý kapalinou.
 2. Přístroj má abnormální zápach, kouří se z něj, nebo vydává hlasitý a silný hluk.
 3. Kabel je zlomený.
 4. Přístroj spadl a rozbil se.
4. Prosím, neukládejte nic na kabely, neumist'ujte přístroj na takové místo, kde někdo může stoupnout na kabel.
5. Po použití pro vaši bezpečnost vytáhněte napájecí kabel.
6. Nevkládejte nic do konektoru jack příslušenství, jinak to může způsobit požár nebo dotek elektřiny. Pokud něco do přístroje spadne, prosím, nevyndávejte to sami, okamžitě kontaktujte distributora nebo naši společnost.
7. Prosím, nedávejte přístroj na cokoliv, co nemůže stát stabilně, vyhněte se tomu, aby se převrátil a poškodil.
8. Naše společnost si vyhrazuje právo upravit informace v tomto návodu bez oznámení! Řiďte se výše uvedenými pokyny.