
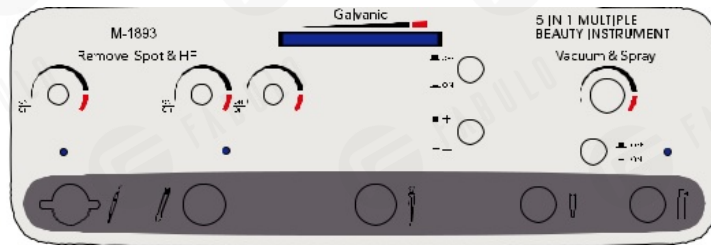


## Kosmetický přístroj 5V1 ELEGANTE 1893

M-1893

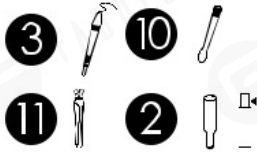

### ② Seznámení se s odsávacími a sprejovými operacemi

Účel: dodat živiny po odstranění přebytečných nečistot v pórech

Úvod do provozu	
Příslušenství	Dvě sprejové lahve, 1 odsávací pero se třemi různými velikostmi přísavek, červená a černá hadice
Způsob provozu	1. Odsávací pero se připojuje k červené hadici a efekt odsávání se vytváří přidržetím otvoru odsávačky. Pro různé části se používají tři různé velikosti přísavek. 2. Sprej připojte k černé hadici a ukazováčkem stiskněte horní otvor, abyste vytvořili efekt rozprašovaného mléka.
Bezpečnostní opatření	
1. Nedržte za jednu část těla, abyste předešli poškození pokožky. 2. Použité příslušenství se umyje neutrálním čistícím prostředkem, sterilizuje se a udržuje se v suchu. 3. Nepoužívejte viskózní kapaliny, jinak mohou snadno způsobit ucpání. 4. Pořadí sání a sprejování nelze zaměnit, jinak dojde k poškození vzduchového čerpadla. 5. Pamatujte na barvu použité hadice, abyste se vyhnuli použití hadice na nasávání na sprejování, aby se nečistoty uvnitř hadice nerozprášily na obličej.	

### 3. Seznámení se s odstraňováním skvrn

Účel: rozbít melanin

Úvod do provozu	
Příslušenství	Pero na odstraňování skvrn
Způsob provozu	1. Zapněte hlavní vypínač, abyste nastavili knoflík intenzity na mírný režim, vyzkoušejte, zda nedostanete elektrický šok listy nebo mýdlem. 2. Odstranění skvrny nebo mateřského znaménka: přiložte elektroakupunkturu jehlu na místo skvrny a pohybujte vodorovně. Je vidět, že melanin po zavedení elektroakupunkturu jehly zčerná a odpadne. Malý a lehký bod lze odstranit najednou, jinak to je potřeba přeléčit 2-3x. 3. Po zákroku se nedotýkejte vody. Naneste trochu protizánětlivého léku na ránu.
Rozsah použití	Chloasma, spálení od slunce, pihy, stařecké skvrny, tetování atd.

## ⑩ Seznámení se s provozem elektroléčby

Účel: urychlit hojení kožních ran provedením sterilizace ozonem a snížením zánětu na kůži s vyrážkami nebo jinými problémy

Úvod do provozu	
Příslušenství	1 elektroléčebná tyčinka s jednou hadičkou ve tvaru hada, jedna hřibová trubka, jedna zakřivená trubka
Způsob provozu	1. Vložte vodič do držáku vodiče. 2. V závislosti na ošetřovaném místě vložte do elektroterapeutické tyče různé tvary skleněných trubic. 3. Zapněte napájení a nastavte ovladač intenzity tak, aby fungoval. 4. Nejprve po použití vraťte knoflík intenzity na nulu a po vypnutí napájení vytáhněte skleněnou trubici.
Bezpečnostní opatření	1. UV skleněná trubice by měla být vždy čistá a suchá. 2. Při provádění elektroterapie byste se neměli příliš dlouho zdržovat na stejném místě, aby se předešlo zjizvení. 3. Před ošetřením si na sebe nedávejte kovové šperky.

## ⑪ Seznámení se s provozem léčby galvanickým proudem

Účel: odstranit nečistoty a vyčistit pokožku, import živin a doplnění vlhkosti.

Úvod do provozu	
Příslušenství	Jedna rukojeť pro léčbu galvanickým proudem
Princip	Pomocí fyzikálního principu odpuzování stejné polaritý elektrod a přitahování opačné polaritý, exportovat nečistoty do pórů a protlačit esenciální olej/tělové mléko/pleťový krém s aktivními iontovými složkami do pokožky přes póry, potní žlázy a buněčné prostory (kladný pól pro export, záporný pól pro import)
Způsob provozu	Když je klíčový přepínač otočen do polohy „+“, je ve stavu exportu. Když je klíčový přepínač otočen do polohy „-“, je ve stavu importu.