

## Kosmetický přístroj AM 60 -


### Mikrodermabrazie

#### Předmluva

Mikrokrytalovou dermabrazi nejprve navrhl Mattioli z italské Florencie a má již více než 20letou historii. Tento druh technologie se při prvních použitích dodával pouze dermatologům a lékařům, ale postupně ho začaly využívat i lázeňské domy a salóny krásy a byla označována za nejlepší metodu lékařské krásy. Tato metoda se v Evropě úspěšně rozvíjí již několik let, léčí tisíce pacientů a má mimořádně uspokojivý účinek.

Nyní vám chceme představit **diamantovou dermabrazi**, což je kreativní vylepšení mikrokrytalové dermabrazie. Diamantová dermabrazie poskytuje nechirurgický postup úpravy pokožky použitím sterilních diamantových hlav na obrušování nebo odírání svrchní vrstvy pokožky a následné vysávání částic spolu se všemi nečistotami a odumřelou kůží zpět nahoru.

Tato procedura odstraňuje zbytky kůže, nedokonalosti, skvrny, vrásky a nežádoucí pigmentaci na pokožce. Střídání používání diamantové dermabrazie spolu s pleťovými produkty, které pronikají přes svrchní vrstvu pokožky až na úroveň derma, pomáhá doplnit přirozené živiny, obnovit buněčnou aktivitu a podporovat zdraví pokožky. Výsledkem po ošetření Micro Dermabrazí je obvykle zdravá, zářící a krásná pleť.

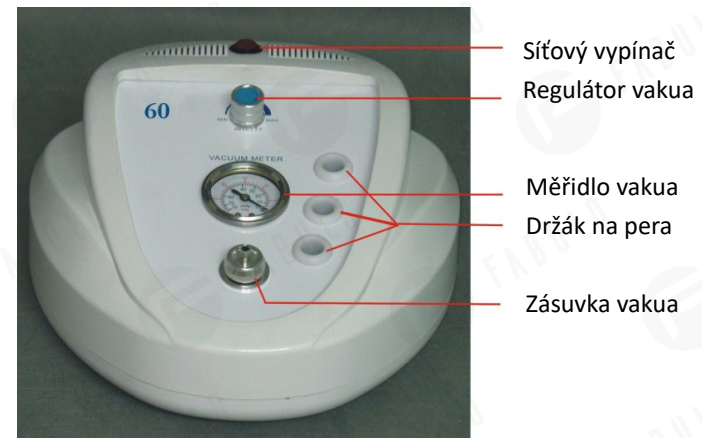

### \*\*\* Příprava před ošetřením

1. Konzultace zahrnuje vyšetření kůže, plán léčby.
2. Operatér by měl používat vinylové rukavice a masku na obličej.
3. Na mastnou nebo aknézní pleť lze před ošetřením použít napařovač, případně před čistícím prostředkem nanést odmašťovací mléko.
4. Očistěte pleť čistícím gelem nebo vodou, poté otřete vatovým tamponem. Nechte pleť oschnout.

## Návod k použití pro diamantovou

### dermabrazi

1. Zatlačte na pohyblivý kroužek měděné trysky na nastavci a vytáhněte vakuovou hadici velikosti 6x4. Potom zatlačte černý plastový kroužek na vakuové hadici.
2. Naneste kapku krému nebo mléka na trysku vakuové hadice, zatlačte pohyblivý kroužek a zasuňte vakuovou hadici až na doraz.
3. Vložte vatový tampon do diamantové hlavice, a pak diamantovou hlavici připevněte na rukojeť. Po každém ošetření odstraňte vatový tampon.
4. Zapněte hlavní vypínač.
5. Upravte intenzitu vakua pomocí regulátoru vakua podle následující referenční tabulky, intenzita se zobrazí na ukazateli vakua a zkontrolujte pohodlí klienta.

### Doporučená intenzita vakua na ošetřované ploše

Oblast ošetření	Normální pleť (inHg)	Citlivá pleť (inHg)
Obličej	12-22	8-12
Čelo	12-22	10-12
Hrudník	15-20	15-18
Nos	10-15	10-14
Krk	18-18	10-15
Okolí očí	8-12	8-10

### Tabulka harmonogramu léčby



Léčba	Frekvence (dnů)	Celkový počet návštěv
Peeling na obličej	6-10	3-5
Jemné linie	7-13	6-8
Krk	12-14	3-5
Jizvy po akné	7-12	8-10
Hyperpigmentace	7-12	8-10

6. Použijte nakloněnou oblast nastavce pro kontakt s povrchem pokožky. Pokračujte pomalým posuvným pohybem. Nedržte nastavec na jednom místě příliš dlouho, poškodíte tím pokožku.
7. Pomalu upravte průtok krystalů pomocí regulátoru vakua z minima na maximum. Při běžném používání nenastavujte průtok na maximum, pokud to není nezbytně nutné. Je to pro lepší

intenzitu pohodlí.

8. Jemně natáhněte kůži palcem a prstem a 2 až 3krát posuňte nástavec po ošetřované oblasti. Potom znovu překřížte v různých směrech, abyste předešli pruhovaným čarám jako na referenčním obrázku. Tahy štětcem nebo leštičí pohyby lze použít na různých místech.

### DIAGRAM NAVRHOVANÝCH POHYBŮ A OBLASTÍ PRO DERMABRAZI

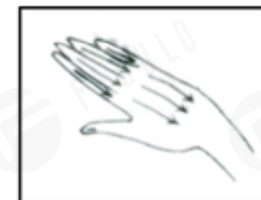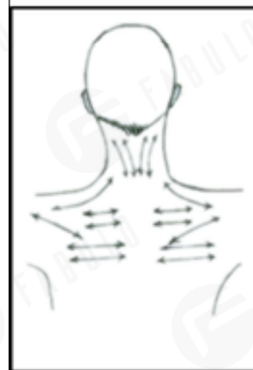

**\* Postupujte podle směru šipek.**

9. Po ošetření odstraňte veškerou zbylou odumřelou pokožku měkkým kartáčkem a opláchněte vlhkou houbou nebo vlhkým studeným ručníkem.

10. Nechte pokožku oschnout, a pak naneste požadovaný pleťový produkt.

**11. K čištění diamantové hlavy použijte zubní kartáček nebo vatový tampon navlhčený trochou alkoholu, abyste setřeli špínu, a pak použijte**

**V světlo nebo vysokou teplotu ke sterilizaci.**

## **Bezpečnostní upozornění**

### **Důležité upozornění před použitím tohoto přístroje:**

Nikdy neprovozujte toto zařízení na člověku, který má nebo trpí následujícími zdravotními problémy popsanými níže. (Salón nebo operatér může zvážit, zda klient podepíše výjimku v tom smyslu, že nemá žádné vážné zdravotní potíže.)

1. Onemocnění srdce.
2. Srdeční šelest nebo nepravidelný srdeční tep.
3. Má kardiostimulátor nebo jiný typ vyrovnávače srdeční frekvence.
4. Těhotenství.
5. Epilepsie.
6. Alkoholismus.
7. Vředy.
8. Onemocnění žaludku, střev, jater nebo slinivky břišní.
9. Rakovina prsu.
10. *Probíhající léčba jakékoliv formy rakoviny.*

11. V loňském roce podstoupil velkou operaci.

12. Astma.

13. Nachlazení, chřipka nebo podrážděný žaludek.

14. Jakékoliv vážné onemocnění nebo nemoc, které není uvedeno výše.

### **Nepoužívejte v těchto oblastech:**

1. Citlivá pokožka.
2. Kožní vyrážka.
3. Poškozená, zanícená nebo infikovaná pokožka.
4. Chirurgická jizva, která není starší 12 měsíců.
5. Oteklá pokožka.
6. Sondy nemohou směřovat do oční koule.
7. Pohlavní orgány.

1. Léčbu začněte vždy opatrně a pozorujte účinky na dotek a vzhled pokožky. Příliš vysoký nebo příliš velký vakuový výkon může způsobit zánětlivou reakci.

2. Po léčbě se může vyskytnout edém a erytém, které však za několik hodin ustoupí.

3. Příliš agresivní techniky mohou způsobit mírné odlupování během následujících 3-4 dnů. Epiderma, která je léčena příliš agresivně, může vést ke krvácení v povrchové dermu.

4. Diamantová dermabraze by se neměla používat na citlivé oblasti, jako jsou oční víčka. Oční víčka by měla být během procedury vždy zavřená a mohou být pokryta vlhkými vatovými tampony.

5. Následující oblasti se považují za nevhodné k léčbě: Nádor kůže, mateřská znaménka, angiom, rty, oči, herpes, rakovina kůže a jaterní skvrny.

**6. Neupravujte ani se nepokoušejte přístroj opravovat, kontaktujte technika kvůli údržbě.**

## **Řešení problémů**

**Pokud přístroj nefunguje správně, před požádáním o údržbu proveďte tyto postupy.**

1. Nízký sací výkon / nízký vakuový tlak:

Znovu zkontrolujte, zda je vakuová hadice dobře připojena k zásuvce, a pak k nástavci. Potom otočte regulátor vakua na maximum, spusťte diamantovou dermabrazi a prstem zablokujte díru na nástavci. Za normálních okolností může vakuový měřič naměřit 24 palců Hg.

**\*\* Zkontrolujte O kroužek v diamantových rtech a O kroužek v zásuvce!**

Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, kontaktujte svého distributora. Neotvírejte přístroj sami bez pokynů technika.

2. Žádná odezva při zapnutí napájení.

Vyměňte prosím pojistku. A správně připojte napájecí kabel.

Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, kontaktujte svého distributora.

## **Potřeby a příslušenství**

Diamantový přístroj na dermabrazi x 1

Vakuová hadice z PVC 6\*4 x 1

Diamantové pero x 2

Krabička na pera a pěna x 1

Diamantová hlava x 9

Krabice na hlavy a pěna x 1

O-kroužek x 2

Bavlněný filtr x 1 balení

Napájecí kabel x 1

Pojistka x 2

Manuál x 1

## **Technické údaje:**

Napájení: 240V/50/60Hz

220V/50/60Hz

115V/60Hz

Výkon: 65 VA Pojistka: 2A