




Léčebný stůl řady Drift

Instalace a uživatelská příručka

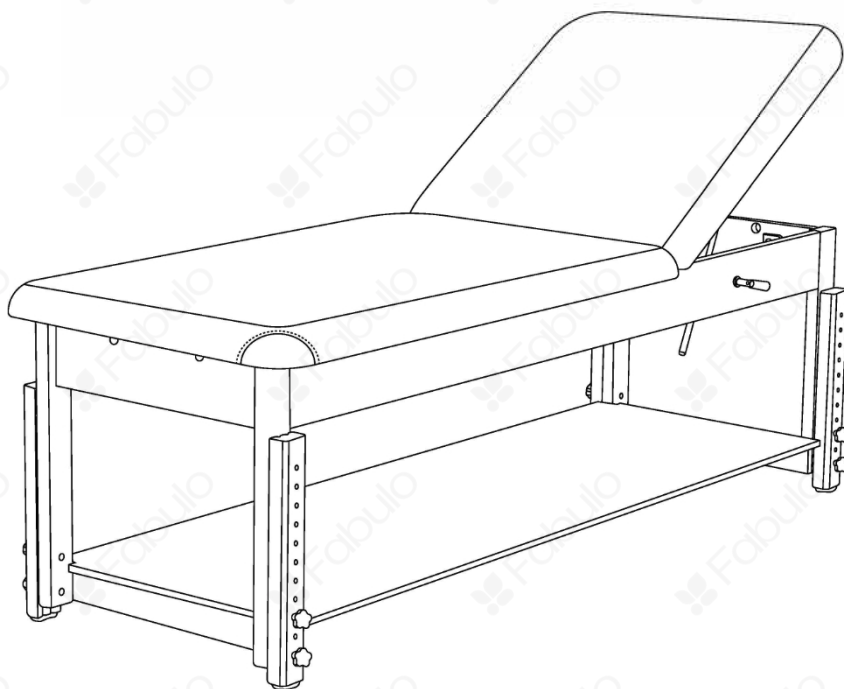


iM3 s.r.o.
Malotejedská 515/8
929 01 Dunajská Streda
Slovensko

Fabulo.sk - Fabulo.cz - Fabulo.hu - Fabulo.ro


Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod

Příklad ošetřovacího stolu


SEF

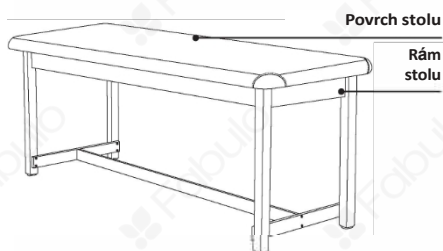


SET

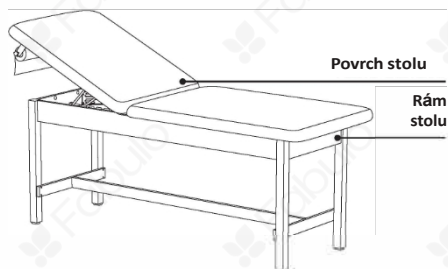


Plochý

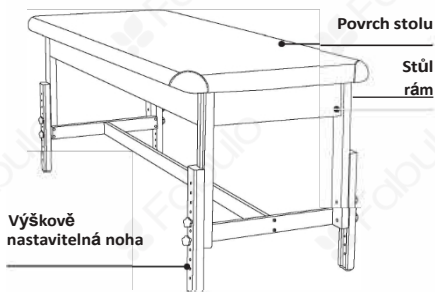


SEF-S

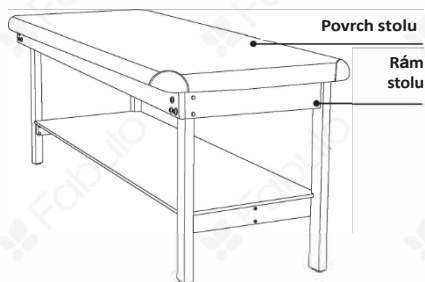

Naklápění

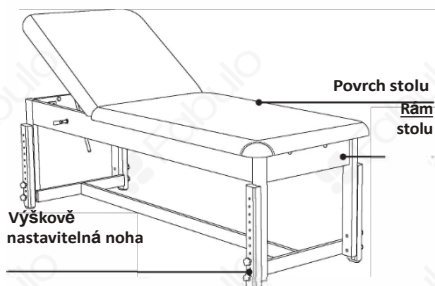


SET-S

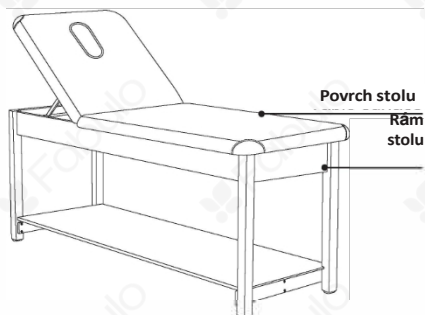


Příklad lékařského ošetrovacího stolu

SEF-H-S

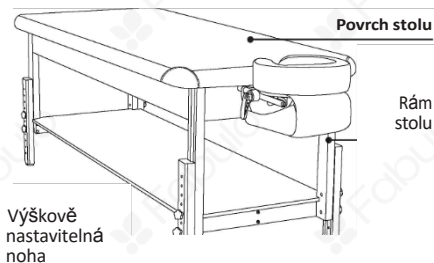

SET-H-S

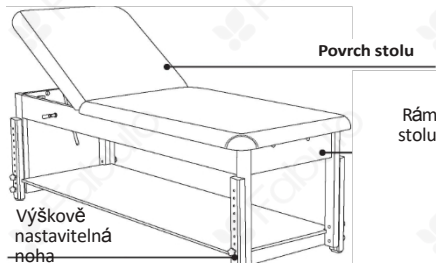

STŮL PRO LÉČBU DRIFT

1. **Název produktu:** Lékařský ošetrovací stůl
2. **Model produktu:** Lékařský přístroj pro léčbu bolesti: SEF, SET, FLAT, SEF-S, TILT, SET-S, SEF-H-S, SET-H-S
3. **Working Capacity:** Celková pracovní nosnost povrchu stolu je 227 kg a pracovní nosnost opěradla je 100 kg.

Bezpečnostní upozornění

Uživatel je zodpovědný za to, aby nedošlo k poškození tohoto výrobku a zranění pacientů a/nebo uživatelů.



Varování: Upozornění na možnost poranění osob.



Připomínáme, že je nutné dodržovat pravidla pro ochranu osob: Chraňte před vlhkostí. Toto zařízení musí být odolné proti vlhkosti i vodě.

Bezpečnostní upozornění

	Varování: Nebezpečí převrnutí, nestoupejte na zásuvku, nebo na jedné straně police.		Připomínka: Při přepravě, skladování a manipulaci vždy umístěte obalovou krabici správným směrem, abyste předešli poškození a bezpečnostním problémům způsobeným nesprávným umístěním.
	Upozornění: Pozor na skřípnutí prstů.		Připomínka: Tento výrobek je křehký a je třeba s ním zacházet opatrně.

Nebezpečí zhroucení



Pokud hmotnost pacienta překročí pracovní zatížení, může dojít ke zhroucení ošetrovacího stolu a opěradla, pokud není hmotnost pacienta rovnoměrně rozložena na povrchu stolu.

Riziko přiskřípnutí



Když se opěradlo posune dolů až na konec, do mezery mezi ním a rámem stolu se dostane ruka nebo prst.

Riziko infekce

Při čištění použijte rukavice, masky a ochranu očí, abyste zabránili odrazu čistícího spreje od znečištěného povrchu.

Bezpečnostní upozornění

Riziko poškození povrchu stolu

1. Požadavek na okolní teplotu při používání a skladování zařízení je 0-40 C . Pokud je zařízení dlouhodobě vystaveno prostředí, které překračuje uvedenou teplotu, může dojít k popraskání nebo odlupování koženého povrchu.
 2. Požadavek na vlhkost při přepravě, používání a skladování zařízení je 20-80 %. Povrch kůže může popraskat nebo se odlupovat, pokud je zařízení dlouhodobě vystaveno příliš suchému nebo vlhkému prostředí.
 3. Je přísně zakázáno, aby kůže stolu zařízení přicházela do styku s kyselými a zásaditými látkami. Drhnutí stolu jiným než neutrálním čistícím prostředkem může způsobit předčasné popraskání a odlupování kůže a zkrátit její životnost.
 4. Je přísně zakázáno, aby se kůže stolu dotýkala tekuté vody. Tekutá voda může proniknout do kůže a způsobit degeneraci houby uvnitř kůže, ovlivnit její používání nebo prasknout a odlupovat se.
-

Riziko rezavění hardwarového příslušenství

1. Požadavek na vlhkost prostředí pro přepravu, používání a skladování vybavení je 20-80 %. Pokud je zařízení dlouhodobě vystaveno příliš vlhkému prostředí, může dojít ke korozi hardwarového příslušenství.
 2. Kovové části zařízení mají přísně zakázán kontakt s kyselými látkami, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu laku a následně ke korozi.
 3. Kovové části zařízení mají přísně zakázáno přicházet do styku s kapalnou vodou, která může způsobit rezavění kovových materiálů.
-

Další bezpečnostní opatření

1. Je přísně zakázáno přibližovat se ke zdrojům ohně.
2. Neumísťujte jej na přímé sluneční světlo.
3. Neumísťujte jej na místa s vysokou teplotou, jako jsou topná tělesa.


Pokyny

Příprava a kontrola před použitím

1. Zkontrolujte, zda je k výrobku přiložen návod k obsluze a záruční list.
 2. Zkontrolujte, zda je přiložen balíček instalačního hardwaru.
 3. Zkontrolujte, zda nejsou součásti deformované nebo poškozené.
 4. Pokud se během instalace a používání vyskytnou jakékoli abnormality, včas se obraťte na prodejce.
-

Instalační kroky

Krok 1: Vyjměte výrobek z obalu a položte ii na vodorovnou podložku lůžkem dolů a rámem lůžka nahoru; na zem položte deku, abyste zabránili poškrábání kůže lůžka, a zajistěte, aby byla lha! zem čistá a bez nečistot nebo ostrých předmětů. (Jak je znázorněno na obrázku 1)

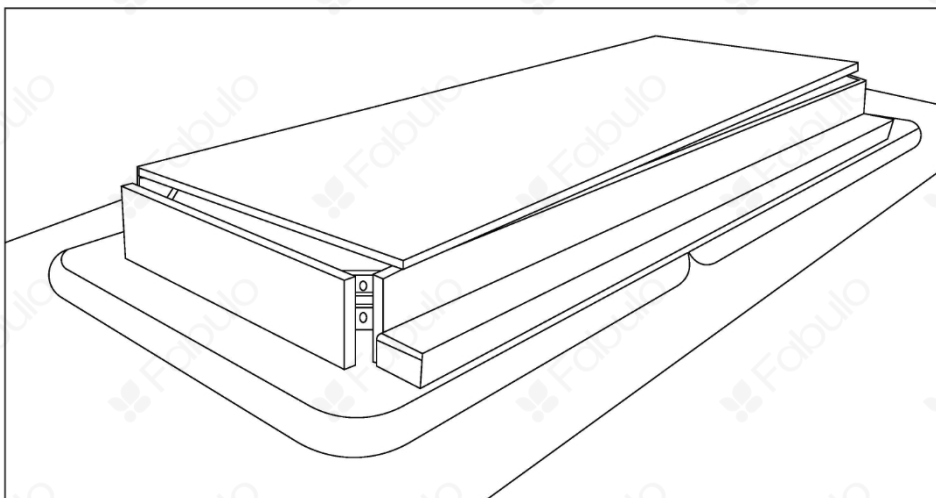


Obrázek 1

Instrukce

Krok 2: Postelové nohy položte svisle k zemi, přičemž konec postelových nohou s montážními otvory směřuje k povrchu postele, a vyrovnejte montážní otvory s kovovou spojovací deskou rámu postele. Jak je znázorněno na obrázku 2, protáhněte šrouby otvory v kovové spojovací desce rámu postele a utáhněte je, abyste je připevnili k nohám postele. (Jak je znázorněno na obrázku 2).

! Ujistěte se, že jste montážní šrouby dotáhli, aby se rám postele netřásl nebo nespadl!

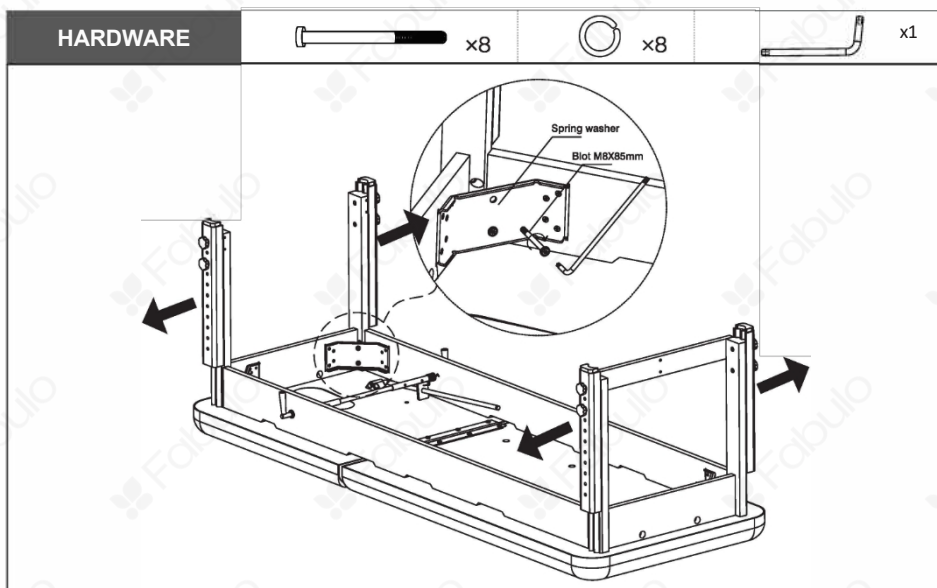


Obrázek 2

! Poznámka

Následující modely jsou vybaveny výškově nastavitelnými nohama lůžka s: FLAT, TILT, SEF-H-S, SET-H-S. Výškově nastavitelné nohy jsou rozděleny na levou a pravou nohu s. Dávejte pozor, abyste je při instalaci neinstalovali obráceně. Při instalaci, věnujte pozornost následujícím pokynům:


- Dbejte na černou pryžovou podložku v místě instalace nohy lůžka tak, aby tvar průřezu nohy lůžka odpovídal tvaru černé pryžové podložky (jak je znázorněno na obrázku 3).
- Knoflík nohy postele směřuje na stranu postele (jak je znázorněno na obrázku 2).

Instrukce

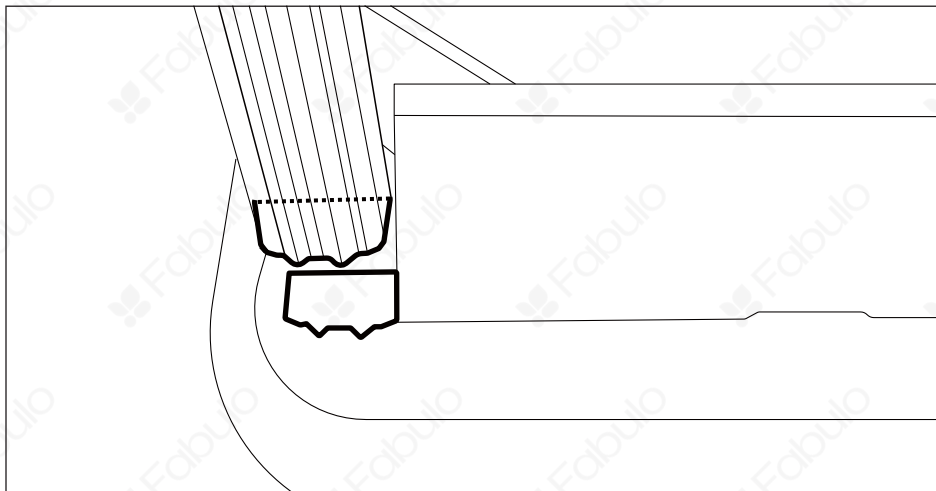

Obrázek 3


! Poznámka: Pokud může být závit vestavné matice uvnitř lůžkové nohy v nesouladu s montážním otvorem lůžkové nohy, upravte pomocí plochého šroubováku úhel vestavné matice tak, aby byl závit vestavné matice v souladu se směrem montážního otvoru. (Jak je znázorněno na obrázku 4)

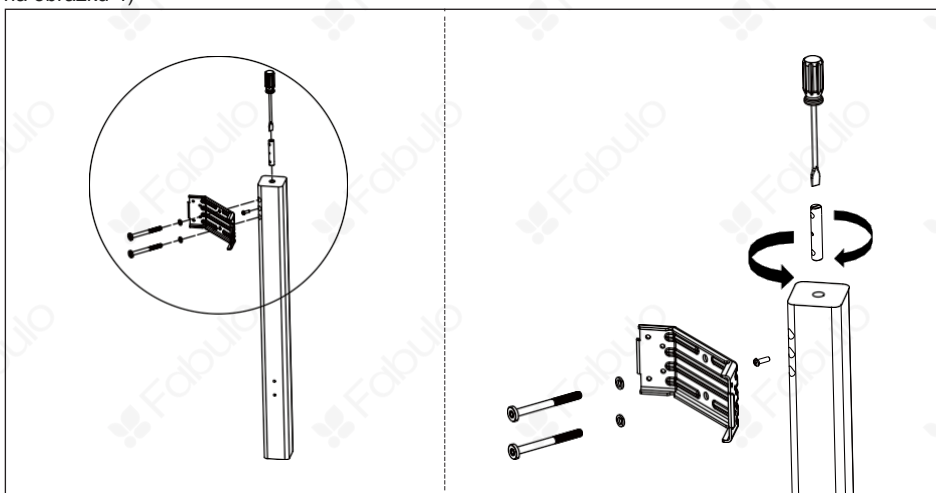

Obrázek 4

Instrukce


Krok 3: Pomocí šroubů podle obrázku připevněte oba konce krátkého příčného nosníku k vnitřní straně dvou sousedních dřevěných noh. (Jak je znázorněno na obrázku 5).

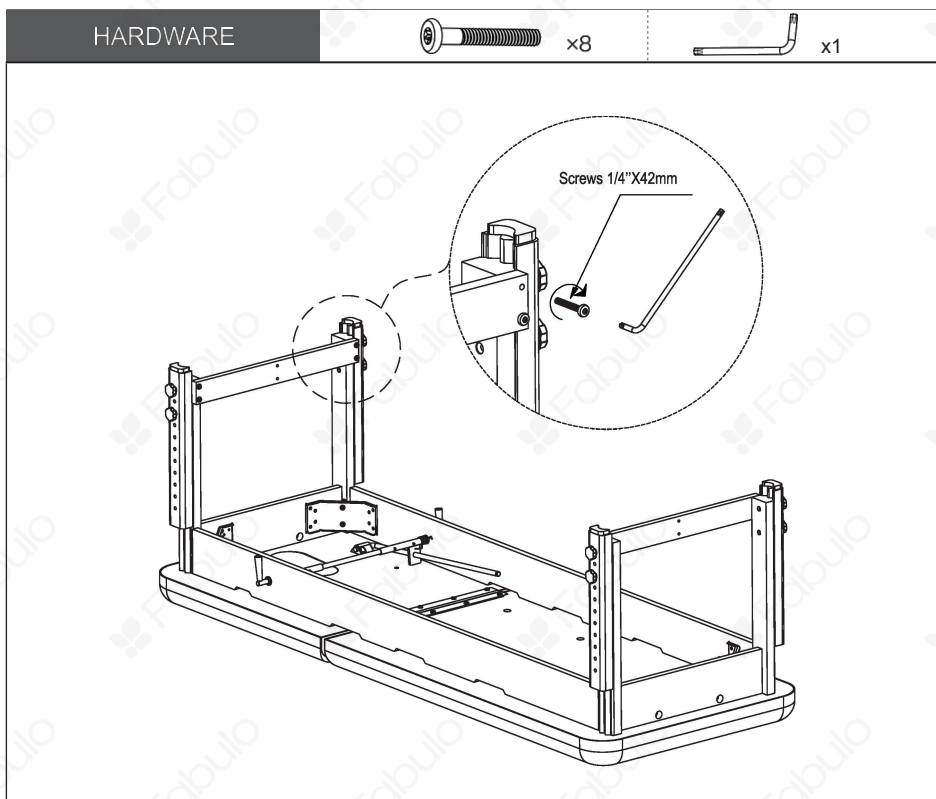

Obrázek 5

Instrukce

Krok 4: Pomocí šroubů připevněte oba konce dlouhého nosníku ke krátkým nosníkům na levé a pravé straně. (Jak je znázorněno na obrázku 6)

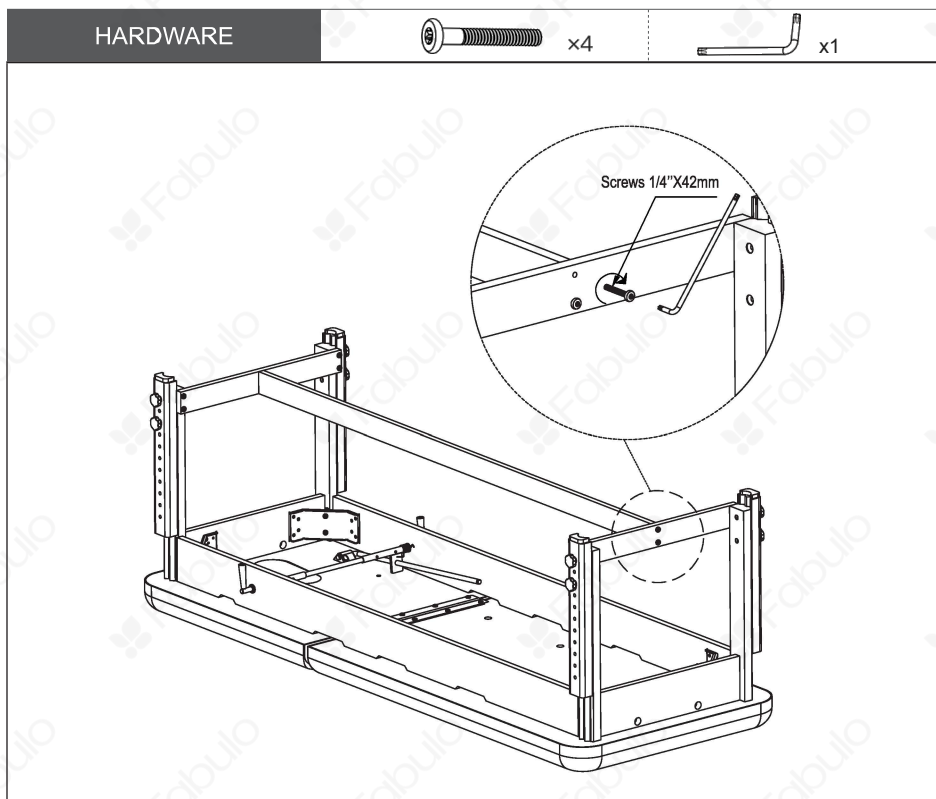


Obrázek 6

Krok 5: Otočte lůžko tak, aby lůžko směřovalo nahoru a nohy lůžka dolů, a postavte se pevně na zem.

Instrukce

Krok 6: Umístěte vrstvenou desku do správné polohy a ve spodní části vrstvené desky stiskněte metodu (jak je znázorněno na obrázku 7), abyste spojili samolepky matky a dítěte ve spodní části vrstvené desky se samolepkami matky a dítěte na krátkém nosníku a upevnili vrstvenou desku. (Pouze pro modely SEF-S, SET-S, SEF-H-S, SET-H-S)

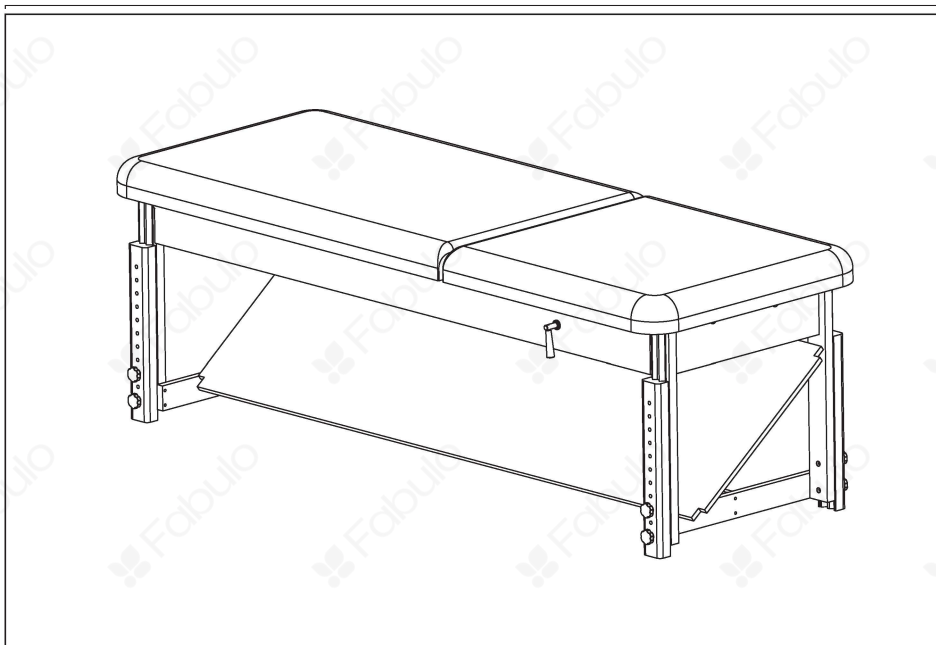


Obrázek 7

Nastavení úhlu opěradla lůžka

1. Opatrně rukou překlápte opěradlo nahoru do příslušného úhlu, poté opěradlo uvolněte a opěradlo se automaticky zajistí.
2. Jednou rukou přidržujte opěradlo a druhou rukou otáčejte rukojeť na obou stranách rámu postele ve směru hodinových ručiček a pomalu snižujte opěradlo do požadované výšky. (Jak je znázorněno na obrázku 8)

Instrukce

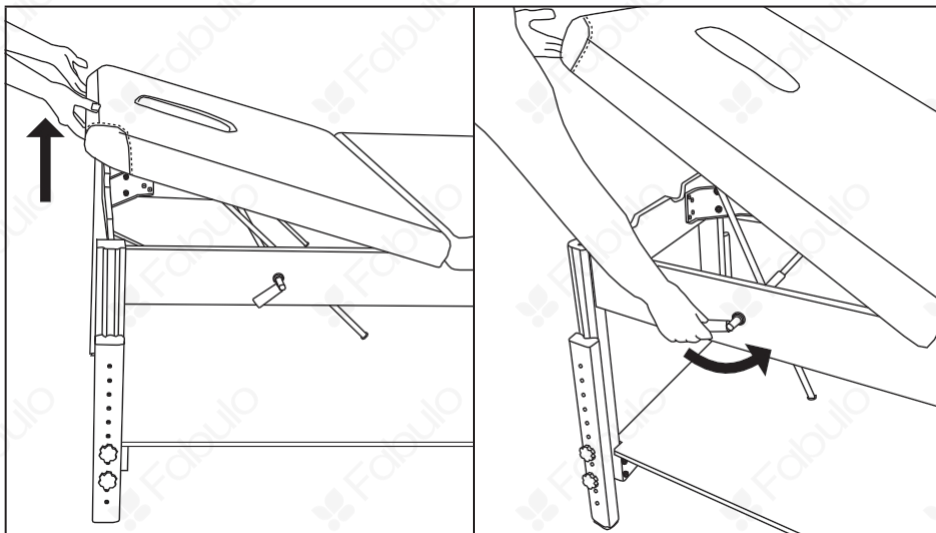

Obrázek 8




Poznámky

- Pokud se pacient opírá o opěradlo, je zakázáno ovládat funkci nastavení úhlu opěradla. Pokud je tato funkce spuštěna, když se pacient svou vahou opírá o opěradlo, opěradlo rychle spadne, což může způsobit skřípnutí ruky obsluhy a vyděšení nebo zranění pacienta.
- Při nastavování úhlu opěradla dbejte na to, aby se horní končetiny pacienta opřely dopředu a opěradlo opustily.


Jak používat držák obličejového polštáře

Zasuňte dvě kulaté trubky na konci držáku obličejového polštáře do otvorů držáku obličejového polštáře na obou stranách postele, nastavte výšku a úhel držáku obličejového polštáře do požadované polohy, zajistěte klíčem držák obličejového polštáře a umístěte obličejový polštář na držák obličejového polštáře (jak je znázorněno na obrázcích 9 a 10).

Instrukce

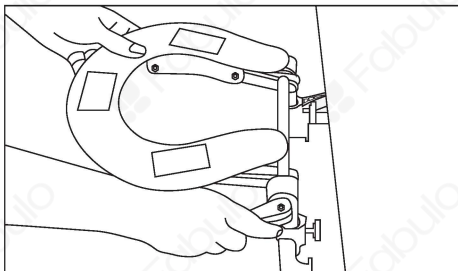

Obrázek 9

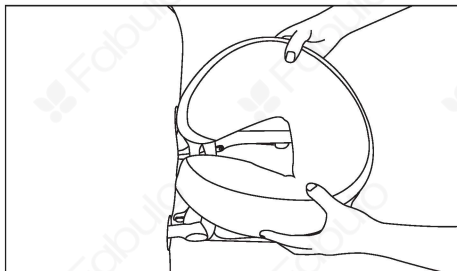

Obrázek 10

Údržba kůže

1. Při otírání kůže se doporučuje použít malé množství neutrálního čistícího prostředku nebo ji otřít suchým ručníkem, poté ji otřít suchým hadříkem, vysušit a umístit na větrané místo, aby uschla.
2. Pokud je nutná dezinfekce, je přípustné použít k otření dezinfekční prostředek s kyselinou chlornou nebo alkohol o koncentraci nižší než 70 %. K dezinfekci je zakázáno používat 84 dezinfekčních prostředků nebo jiných vysoce korozivních dezinfekčních prostředků, jinak mohou urychlit stárnutí kůže a způsobit, že kůže změní barvu, deformuje se, ztvrdne, zžehne nebo se dokonce odlupuje.
3. Pokud se stůl delší dobu nepoužívá, doporučuje se zakrýt jej potahem a skladovat v suchém prostředí. Vyhněte se přímému slunečnímu záření, dešti, vlhkosti a jiným prostředím.
4. Prostředí s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou může urychlit stárnutí kůže.
5. Je zakázáno dotýkat se povrchu kůže ostrými předměty.

Údržba výrobků ze dřeva

1. K otírání desky se doporučuje použít suchou utěrku.
2. Vyvarujte se čistícím prostředkům s obsahem alkoholu.

Pravidelná údržba

Každé 3 měsíce zkontrolujte povrch stolu a ověřte stabilitu rámu stolu při vodorovném, svislém nebo bočním posunutí. Pokud dochází k otřesům, dotáhněte spojovací šrouby.

Záruční podmínky

Záruční doba

Záruka 2 roky