



NÁVOD K POUŽITÍ ŘADY FABULO INOVA



iM3 s.r.o.
Malotejedská 515/8 929
01 Dunajská Streda
Slovensko

Fabulo.sk - Fabulo.cz - Fabulo.hu - Fabulo.ro

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtete návod.

FUNKCE A VLASTNOSTI

Řada Inova je komplexní elektrický stůl, který poskytuje mnoho funkcí a širokou škálu použití. Řadu lze použít nejen pro lékařskou kosmetiku, masáže, běžné kontroly, ale také pro fyzioterapeutické ošetření, tlakovou léčbu, ošetření páteře a je dobrým pomocníkem profesionální kosmetičky, maséra a profesionálního fyzioterapeuta.

- Stabilní spodní rám, bezpečná konstrukce, výkonná funkce, snadnější pohyb;
- Motor nastavuje hrudní část do Trendelenburgovy polohy, která je stabilnější;
- Vzduchová pružina nastavuje volitelnou opěrku hlavy, která je pohodlnější;
- Područka je volitelná a odnímatelná, flexibilnější volba;
- Výšku stolu lze nastavit, širší rozsah přizpůsobení;
- Volitelný volitelný a běžný nožní ovladač, pohodlnější ovládání;
- Pohovka s vysokou hustotou houby, intimnější pocit těla;

SPECIFIKACE



Fabulo Inova Shape

Nosnost: 450 lbs / 205 kg

Délka: 77"/196 cm

Šířka: 27"/68.5cm, 29"/73.6cm

Výškový rozsah: 17,5"/44cm - 37"/94cm

Fabulo Inova Flat 1

Nosnost: 450lbs/205kg

Délka: 77"/196cm

Šířka: 27"/68.5cm, 29"/73.6cm

Výškový rozsah: 17,5"/44cm - 37"/94cm



SPECIFIKACE



Fabulo Inova Flat 2

Nosnost: 450lbs/ 205kg

Délka: 71.6"/182cm

Šířka: 28"/71,1cm, 30"/76,2cm

Výškový rozsah: 17,5"/44cm - 37"/94cm

Fabulo Inova XB1

Nosnost: 450lbs / 205 kg

Délka: 77"/196 cm

Šířka: 27"/68.5cm, 29"/73.6cm

Výškový rozsah: 17,5"/44cm - 37"/94cm



Fabulo Inova XB2

Nosnost: 330lbs/ 150 kg

Délka: 77"/196cm

Šířka: 27"/68.5cm, 29"/73.6cm

Výškový rozsah: 17,5"/44cm - 37"/94cm

STRUKTURÁLNÍ ZASTOUPENÍ

Řada Goodwill se skládá především ze čtyř částí: rámu stolu, ovládacích prvků, elektrických komponentů a houbového prkna. Rám zahrnuje: sestavu spodního rámu, sestavu zvedacího rámu, sestavu rámu stolu, sestavu područky (volitelně) a vzduchové pružiny atd. Obslužné součásti zahrnují: nožní ovládání bez chůze (volitelně), nožní pedál, ruční páku 1 atd. Elektrické součásti zahrnují: motor zdvihu, řídicí jednotku motoru, ruční ovládání (volitelně) a externí napájecí kabel atd. Houbové prkno zahrnuje: opěrku hlavy, opěrku rukou (volitelně) atd.



- **Sestava spodního rámu:**
Sestava spodního rámu se skládá hlavně ze spodního rámu, systému koleček atd.
- **Sestava zvedacího rámu:**
Zvedací rám spojuje spodní rám a rám stolu. Elektrický stůl lze zvednout nebo snížit na požadovanou výšku úpravou úhlu zvedacího rámu.
- **Sestava rámu stolu:**
Sestava rámu stolu se skládá hlavně z rámu stolu, připojeného rámu a plynové pružiny.
- **Sestava opěrky rukou (volitelně):**
Sestava loketní opěrky se skládá především z rámu loketní opěrky a samosvorného systému. Opěrku ruky lze snadno zvednout nebo spustit posunutím samosvorného systému.
- **Ovládání nohou bez chůze (volitelně):**
Na spodním rámu je nainstalován bezšlapkový nožní ovladač, kterým lze nastavit výšku stolu. Při zvednutí ovládacího prvku pro volnou chůzi se stůl sníží dolů. Při sešlápnutí bezchodového nožního ovladače se stůl zvedne.

STRUKTURÁLNÍ ZASTOUPENÍ

- **Ruční páka 1:**

Ruční páka 1 je ovládací prvek pro nastavení úhlu sklonu hlavového prkna. Zvednutím ruční páky 1 směrem nahoru lze odblokovat vzduchovou pružinu hlavy a uvést ji do provozního stavu. Poté jemně zatlačte na hlavové prkno směrem nahoru nebo dolů a nastavte jeho úhel.

- **Zvedací motor:**

Zvedací motor je ovládací prvek pro zvedání nebo spouštění rámu stolu Goodwill. Nastavením bezchodového pedálového ovladače (volitelně) a ručního ovladače (volitelně) nebo sešlápnutím nožního pedálového ovladače lze stůl Goodwill zvednout nebo spustit do nejlepší provozní výšky.

INSTRUKCE

1. Jak odblokovat napájení?

Stůl s bezpečnostním ochranným monitorovacím systémem nefunguje ihned po zapnutí napájení. Pro jistotu jsme do ovládacího programu přidali zámek. Teprve po odemknutí programu budou ostatní elektrické komponenty připojené ke stolu v provozuschopném stavu. Navíc se systém automaticky uzamkne a stůl by se měl znovu odemknout, pokud nebude v provozu do 30 minut.

Odemknout jej lze následujícími způsoby:

- A. Dvakrát klikněte na levé horní tlačítko ručního ovládání (volitelně).
- B. Dvojitě stisknutí (plynulé dvojí sešlápnutí) nožního ovladače bez chůze (volitelně).
- C. Dvakrát stiskněte (plynulým dvojím sešlápnutím) horní tlačítko nožního ovladače.



Kterýmkoli ze tří výše uvedených režimů ovládání lze dosáhnout odblokování programu stolu.

Výše uvedený program blokování je k dispozici pouze u stolů vybavených systémem monitorování bezpečnostní ochrany. Pokud stůl není vybaven systémem monitorování bezpečnostní ochrany, ostatní elektrické komponenty připojené ke stolu budou po zapnutí napájení v provozuschopném stavu.

INSTRUKCE



2. Jak nastavit výšku?

A. Ovládání nožním pedálem

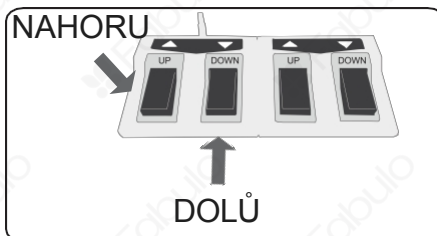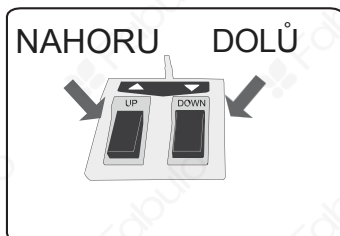



Pro zvýšení nebo snížení výšky stolu ovládejte nožní pedál podle obrázku.

B. Ruční ovládání

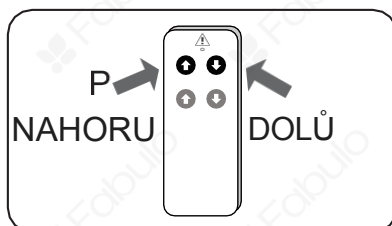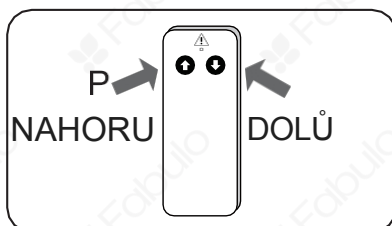

Ručním ovladačem zvednete nebo snižujete výšku stolu podle obrázku. Stisknutím levého tlačítka stůl zvednete. Stisknutím pravého tlačítka stůl snižíte.


C. Nožní ovládání bez chůze

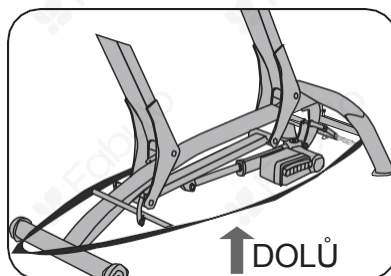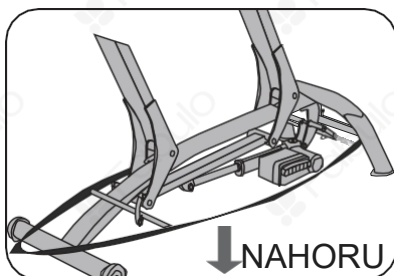

Systém bezpohybového nožního ovládání se velmi snadno a pohodlně ovládá. Šlápněte na něj a stůl se zvedne. Zvedněte ovladač nahoru a stůl se snižší.


INSTRUKCE

3. Jak nastavit opěrku hlavy?

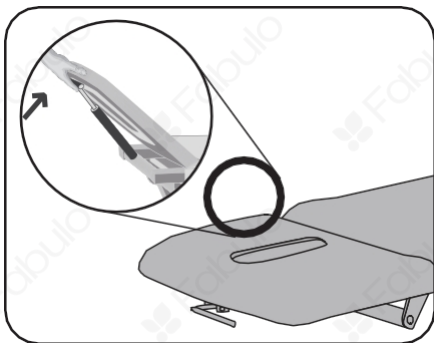

Opěrku hlavy nastavíte tak, že lehce přidržíte žlutou páčku pod opěrkou hlavy a tahem nahoru nebo dolů nastavíte opěrku hlavy, dokud nedosáhnete požadovaného úhlu. Uvolněte páčku a opěrka hlavy se automaticky zajistí v dané poloze.

4. Jak nastavit opěrku rukou?

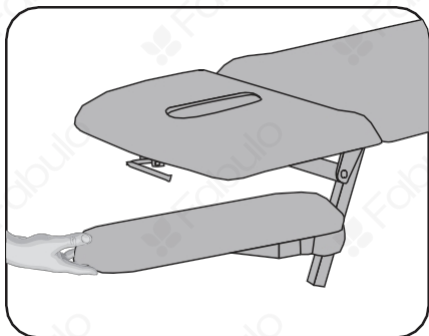

Chcete-li nastavit loketní opěrku, lehce ji posuňte nahoru nebo dolů, dokud nedosáhnete požadované výšky. Uvolněte páčku a loketní opěrka se automaticky uzamkne v dané poloze pomocí samosvorného systému.

5. Rychlá diagnostika

A. Stoly, které jsou vybaveny dvojitými pohony:

Pokud při ovládání nožních, ručních nebo bočních ovladačů nefungují žádné pohony, je možné, že je ovládací skříňka poškozená. Pokud nefunguje jeden z ovladačů, je spíše možné, že je tento ovladač rozbitý.

B. Stoly, které jsou vybaveny ručním ovládáním:

Pokud kontrolka funkce na ručním ovladači stále svítí, je možné, že je ruční ovladač poškozený. Pokud LED dioda funkcí na ručním ovladači při stisknutí tlačítka nesvítí, je spíše možné, že je ruční ovladač nebo ovládací skříňka poškozená.

INSTRUKCE

6. Pokud zjistíte, že se ovladač náhle nemůže pohybovat

- Odpojte hlavní napájení.
- Zkontrolujte všechny kabely a v případě potřeby je znovu zapojte.
- Odstraňte všechna závaží, která mohou být na stole.
- Nechte systém 20 až 30 minut odpočívat s odpojeným hlavním napájením.

VAROVÁNÍ



Dodržujte tato bezpečnostní opatření a používejte zařízení správně, abyste předešli zranění, smrti a materiálním škodám.

- Nesprávná instalace, provoz a opravy mohou způsobit zranění a škody.
- Před zahájením provozu tohoto zařízení si přečtěte tento návod k obsluze.
- Při vybalování stolu zkontrolujte polstrování a čalounění. Pokud se objeví jakékoliv známky poškození, stůl nepoužívejte. (Naše záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným nastavením, nehodou nebo zneužitím).
- Toto zařízení používejte pouze k určenému účelu nebo tak, jak je popsáno v tomto návodu.
- V zájmu vaší bezpečnosti se nepokoušejte rozebírat nožní pedál, ovládací skříňku nebo pohon.
- Nepokládejte žádné předměty pod opěradlo nebo opěrku nohou.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám nebo vlhkosti.
- Pokud se stůl delší dobu nepoužívá, měl by být umístěn v nižší poloze.
- Nesedějte si přímo na hlavu stolu nebo opěrku rukou.
- Při přemísťování stolu nejprve odpojte napájení.
- Před údržbou nezapomeňte odpojit přívod napájení.

ÚDRŽBA

Ve snaze zajistit kvalitu vašich výrobků a pomoci vám udržet životnost stolu jsme vyzkoušeli několik preventivních kroků, abychom vám poradili, jak chránit čalounění stolu a příslušenství:

- Vyvarujte se skladování stolu při extrémně nízkých teplotách, protože nadměrný chlad způsobuje praskání.
- Vyvarujte se skladování stolu při extrémně vysokých teplotách, protože nadměrné teplo způsobí roztahení a popraskání čalounění.
- Dbejte na to, aby se stůl nacházel mimo dosah topných těles, elektrických spotřebičů a přímého slunečního záření.
- Chraňte svůj stůl a příslušenství prostěradly a rounem a doporučujeme naše třídlíne plachty. Sadu flanelového prostěradla a fleecového prostěradla.

ÚDRŽBA

- Doporučujeme použít jemnou směs antibakteriálního mýdla na nádobí s vodou v lahvi s rozprašovačem, kterou stůl postříkejte roztokem, a stůl otřete čistou vlhkou utěrkou.
- Použijte oba konce stolu. Občas přehodte čelní polštář/nástavec na hlavu z jednoho konce stolu na druhý, abyste zabránili nerovnoměrnému používání.
- Chraňte stůl před obecnými odřeninami, pořezáním a propíchnutím.

-
- Použití alkoholu vysušuje vinyl a způsobuje jeho praskání.
 - Dlouhodobé vystavení extrémním teplotám může způsobit poškození vinylu.



PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

- Během přepravy se prosím vyhněte velkému třesení, házení, pádům, dešti, sněhu a vystavení slunci.
- Při skladování chraňte výrobek před vlhkostí, vysokou teplotou, přímým slunečním zářením, stříkající vodou a jinými vlivy.
- Tento výrobek nerozebírejte, neopravujte ani nevyměňujte bez autorizace, což může způsobit poruchy a nehody a vést ke ztrátě záruky.

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Záruka 3 roky na rám stolu a 2 roky na pěnu, vinyl a příslušenství. Pokud během záruční doby od data zakoupení dojde k poruše tohoto výrobku z důvodu vady materiálu nebo zpracování, výrobek bezplatně opravíme nebo vyměníme, případně dodáme potřebné komponenty. Tato záruka se nevztahuje na:

- a) Poškození způsobené nehodou, zneužitím, nesprávným zacházením nebo přepravou;
- b) Jednotky, které byly podrobeny neautorizované opravě;
- c) nesprávné používání tohoto zařízení;
- d) poškození přesahující cenu výrobku;
- e) Zhoršení kvality dodaného výrobku v důsledku abnormálních skladovacích a/nebo ochranných podmínek v prostorách zákazníka;
- f) Nepředložení datovaného dokladu o koupi.