SILVERFOX

F-311B / F-312B / F-313B / F-314B / F-315B / F-316B / F-317B / F-318B / F-319B

Kosmetický přístroj

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali naše výrobky.
Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití.
Společnost si vyhrazuje právo vylepšovat design a upravovat výrobky bez předchozího upozornění.

Obsah

O tomto návodu ---- **1**

Bezpečnostní pokyny ---- **1**

F-311B Ultrazvuková špachtle – popis a parametry ---- **2/3**

F-312B Ultrazvuk – popis a parametry ---- **4/5**

F-313B Galvanika – popis a parametry ---- **6/7**

F-314B Vysoká frekvence – popis a parametry ---- **8/9**

F-315B Rotační kartáček – popis a parametry ---- **10/11**

F-316B Vakuum a sprej – popis a parametry ---- **12/13**

F-317B Radiofrekvence – popis a parametry ---- **14/15**

F-318B Studené a teplé kladívko – popis a parametry ---- **16/17**

F-319B Diamantová dermabraze – popis a parametry ---- **18/19**

Řešení problémů ---- **20**

O tomto návodu

Tento návod slouží výhradně jako reference pro obsluhu tohoto konkrétního modelu. Pokud se návod použije k jiným účelům, společnost SILVERFOX nenese za vzniklé následky žádnou odpovědnost. Veškeré informace v tomto návodu jsou chráněny autorským právem a bez písemného souhlasu společnosti SILVERFOX je není dovoleno kopírovat ani překládat, a to ani zčásti.

Bezpečnostní pokyny

Pro správné a bezpečné používání výrobku si před použitím přečtěte všechny pokyny!
Dodržujte všechna bezpečnostní opatření!


⚠	**Varování!**	**Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může v případě nedodržení vést k vážnému ohrožení života.** • Tento výrobek je určen pouze pro kosmetičky s odbornou kvalifikací. • Výrobek nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém prostředí, například v koupelně – hrozí porucha a nebezpečí. • Výrobek nepoužívejte v blízkosti hořlavých látek (např. alkohol, ředidlo, benzin, odlakovač, spreje apod.). • Výrobek nepoužívejte v těchto případech: když je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená nebo se přehřívá; když je zástrčka v zásuvce uvolněná. • Napájecí kabel nepřipojujte ani neodpojujte mokrýma rukama a ani takto výrobek nepoužívejte. • Ujistěte se, že provozní napětí odpovídá jmenovitému napětí výrobku. • Před použitím zkontrolujte, zda jsou zástrčka a konektor napájecího kabelu úplně zasunuté, aby nedošlo k nebezpečí. • Pokud výrobek nepoužíváte, vypněte jej a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. • Pravidelně čistěte prach nahromaděný na zástrčce a konektoru napájecího kabelu, aby vlivem vlhkosti, prachu a dalších faktorů nedošlo k poruše izolace. • Používejte výhradně napájecí kabel dodaný k tomuto výrobku. Nepoužívejte jej s žádným jiným spotřebičem. • Napájecí kabel neomotávejte kolem výrobku – může se zdeformovat a poškodit. • Uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte dětem výrobek používat. • Výrobek sami neupravujte, nerozebírejte ani neopravujte. Je-li nutná oprava, obraťte se na výrobce, zástupce nebo odborný servis, aby nedošlo k nebezpečí. • Je-li zástrčka poškozená, obraťte se na distributora, servisní středisko nebo osobu s příslušnou kvalifikací a zkušenostmi. • Výrobek používejte výhradně k účelu uvedenému v tomto návodu. Nepoužívejte příslušenství, které nedoporučuje výrobce.
⚠	**Pozor!**	**Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může v případě nedodržení vést k poranění osob.** • Obsluha musí při používání věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti osob a zařízení. • Pokud výrobek nepracuje správně, okamžitě jej přestaňte používat a obraťte se na výrobce nebo prodejce. • S výrobkem a příslušenstvím zacházejte šetrně. • S obalovým materiálem zacházejte zodpovědně, aby nedošlo k nehodám, například k udušení dětí; uchovávejte jej mimo dosah dětí.

◆ F-311B Ultrazvuková špachtle



Antistatický náramek

1. Vypínač
2. Zvýšení intenzity +
3. Snížení intenzity –
4. Prodloužení času +
5. Zkrácení času –
6. Přepínač režimů
7. Start / Pauza

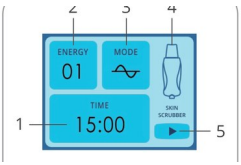

1. Čas
2. Úroveň intenzity
3. Volba režimu
4. Stav činnosti
5. Provozní stav

Postup použití

1. Špachtli a antistatický náramek zasuňte do příslušných konektorů kosmetického přístroje. Je-li přístroj správně připojen k napájecímu kabelu, tlačítko „Power switch“ svítí červeně. Stisknutím tlačítka „Power Switch“ přejdete do provozního režimu a tlačítko se na displeji zobrazí bíle. Přístroj je standardně nastaven na nepřetržitý vlnový výstup; intenzita na úrovni 1 je nastavena na 15 minut.
2. Podle potřeby si můžete zvolit různé režimy – stisknutím tlačítka „Mode switch“ vyberete vhodný výstupní režim sondy: nepřetržitá vlna, přerušovaná vlna a smíšená vlna.
3. Tlačítky „Time increase/decrease“ nastavíte pracovní čas v rozsahu 1 – 30 minut.
4. Před stisknutím tlačítka „Start“/„Pause“ nasaďte klientovi antistatický náramek. Úroveň intenzity je nastavitelná od 1 do 10.
5. Pokud se během ošetření antistatický náramek sejme, přístroj automaticky přestane pracovat.
6. Chcete-li přístroj během ošetření zastavit, stiskněte tlačítko „Pause“.
7. Po ukončení ošetření vypněte přístroj tlačítkem „power switch“; tlačítko se v tu chvíli rozsvítí červeně. Po odpojení zástrčky ze zásuvky očistěte špachtli a antistatický náramek 75% alkoholem a uložte je na suché místo.

Doporučená doba aplikace

Při běžném stavu pokožky by ošetření nemělo přesáhnout 15 minut.

Upozornění při používání

⚠ Varování

- Je-li přístroj zapnutý, nedotýkejte se samotného výstupního konektoru špachtle.
- Špachtli nepřikládejte přímo k oku.
- Použití je zakázáno u těchto osob:
  ① alergičtí klienti;
  ② popáleniny, opařeniny, spálení od slunce, zánět nebo jiná poranění pokožky;
  ③ klienti se srdečním onemocněním, infekčními onemocněními, neurologickými onemocněními a klienti s kovem v těle během ošetření.
- Lopatku pracující špachtle nenechávejte na jednom místě pokožky, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Pokud povrch pokožky není dostatečně hydratovaný krémem, včas jej doplňte.
- Při práci se špachtlí dbejte na tlak a na úhel mezi špachtlí a pokožkou.
- Během práce dbejte na spojení mezi příslušenstvím a přístrojem. Za kabel netahejte nadměrně, aby se spoj neuvolnil.
- Během práce dbejte na to, aby přístroj nebyl postříkán vodou ani jinými korozivními kapalinami.
- Nepoužívejte špachtli s deformovaným nebo poškozeným nerezovým povrchem, aby nedošlo k poranění pokožky.
- Při jakékoli neobvyklé situaci kontaktujte prodejce a požádejte o kontrolu odborný servis; kvůli opravě přístroj sami neotevírejte.


⚠ Pozor

- Špachtli udržujte stále čistou a po každém použití ji vydezinfikujte 75% alkoholem.
- Setrvání na jednom místě pokožky nesmí přesáhnout 5 sekund.


Parametry výrobku

Model výrobku	F-311B
Napájení	AC 100V–240V, 50/60Hz
Příkon	10W
Rozměry výrobku	20.8×23×7.5 cm
Rozměry balení	37×27.5×14 cm
Obsah balení	**Hlavní jednotka × 1**
	Polička na příslušenství × 1
	Špachtle × 1
	Antistatický náramek × 1
	Napájecí kabel × 1

◆ F-312B Ultrazvuk (pouze pro kosmetické účely)

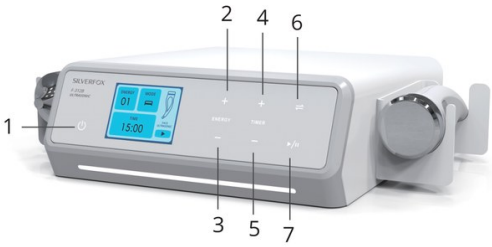

1. Vypínač
2. Zvýšení intenzity +
3. Snížení intenzity –
4. Prodloužení času +
5. Zkrácení času –
6. Přepínač režimů
7. Start / Pauza

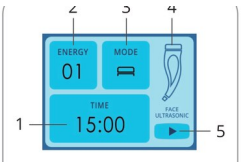

1. Čas
2. Úroveň intenzity
3. Volba režimu sondy
4. Stav činnosti
5. Provozní stav

Postup použití

1. Ultrazvukovou sondu zasuňte do příslušného konektoru přístroje. Je-li přístroj správně připojen k napájecímu kabelu, tlačítko „Power switch“ svítí červeně.
   Stisknutím tlačítka „Power Switch“ přejdete do provozního režimu a tlačítko se na displeji zobrazí bíle.
   Přístroj je standardně nastaven na výstup oční sondy; intenzita na úrovni 1 je nastavena na 15 minut.
2. Podle potřeby si můžete zvolit různé režimy – stisknutím tlačítka „Mode switch“ vyberete vhodný výstupní režim: pozitivní výstup, negativní výstup a smíšený výstup.
3. Tlačítky „Time increase/decrease“ nastavíte pracovní čas v rozsahu 1 – 30 minut.
4. Stisknutím tlačítka „Start“/„Pause“ spustíte ošetření. Úroveň intenzity je nastavitelná od 1 do 10.
5. Chcete-li ultrazvukovou sondu během ošetření zastavit, stiskněte tlačítko „Pause“.
6. Po ukončení ošetření vypněte přístroj tlačítkem „power switch“; tlačítko se v tu chvíli rozsvítí červeně. Po odpojení zástrčky ze zásuvky očistěte ultrazvukovou sondu 75% alkoholem a uložte ji na suché místo.

Doporučená doba aplikace

Čas přizpůsobte tloušťce pokožky, obvykle ošetření nepřesahuje 15 minut.

Upozornění: Kovovou část sondy nevystavujte kontaktu s vodou

Upozornění při používání

⚠ Varování

- Sondu nemiřte přímo na oční bulvu, nedotýkejte se oka ani nemasírujte horní víčko.
- Použití je zakázáno u těchto skupin:
  ① těhotné ženy a osoby s kardiostimulátorem;
  ② onkologičtí klienti a osoby se závažným srdečním onemocněním;
  ③ popáleniny, opařeniny, spálení od slunce, zánět nebo jiná poranění pokožky;
  ④ alergičtí klienti a osoby s kontaktní dermatitidou.
- Je zakázáno zapínat sondu bez kosmetické aplikace – hrozí opaření vysokou teplotou a přehřátím se zkracuje životnost sondy.
- Nerezovou sondu ani rukojeť sami nerozebírejte. Otáčením nerezové sondy a rukojeti se sonda může poškodit.
- Tato funkce se nesmí používat k jiným než kosmetickým účelům.


⚠ Pozor

- Před ošetřením naneste na ošetřovanou oblast dostatek krému nebo séra, aby mezi sondou a pokožkou vzniklo dobré médium a pokožka se nenapínala.
- Při práci musí sonda přiléhat k pokožce, aby nedošlo ke kavitaci a poškození pokožky.
- Zapnutá sonda nesmí zůstat mimo kontakt s pokožkou, aby se nepoškodila a nezkrátila se její životnost.
- Je-li sonda příliš horká, popálí pokožku, proto by ošetření nemělo přesáhnout 15 minut; u citlivé pokožky zkraťte čas a snižte intenzitu. Prodlužování času nezvyšuje účinek a může být nebezpečné. Setrvání na jednom místě pokožky nesmí přesáhnout 5 sekund.
- Po ošetření se může objevit krátkodobé zarudnutí pokožky způsobené vibracemi sondy a tvorbou tepla, které zvyšují krevní oběh – jde o normální stav.


Parametry výrobku

Model výrobku	F-312B
Napájení	AC 100V–240V, 50/60Hz
Příkon	11W
Rozměry výrobku	20.8×23×7.5 cm
Rozměry balení	37×27.5×14 cm
Obsah balení	**Hlavní jednotka × 1**
	Polička na příslušenství × 2
	Nerezová ultrazvuková plochá sonda s hrotem × 1
	Nerezová ultrazvuková plochá sonda × 1
	Napájecí kabel × 1

◆ F-313B Galvanika

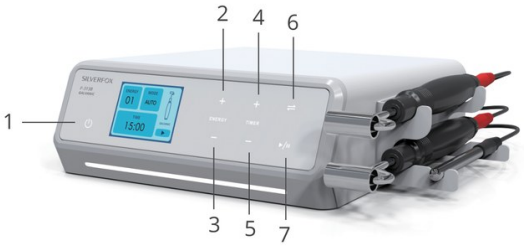

1. Vypínač
2. Zvýšení intenzity +
3. Snížení intenzity –
4. Prodloužení času +
5. Zkrácení času –
6. Přepínač režimů
7. Start / Pauza

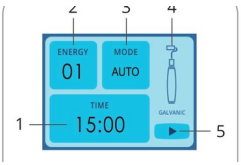

1. Čas
2. Úroveň intenzity
3. Volba režimu
4. Stav činnosti
5. Provozní stav

Postup použití

1. Galvanické příslušenství zasuňte do příslušného konektoru přístroje. Je-li přístroj správně připojen k napájecímu kabelu, tlačítko „Power switch“ svítí červeně. Stisknutím tlačítka „Power Switch“ přejdete do provozního režimu a tlačítko se na displeji zobrazí bíle. Přístroj je standardně nastaven na výstup oční sondy; intenzita na úrovni 1 je nastavena na 15 minut.
2. Podle potřeby si můžete zvolit různé režimy – stisknutím tlačítka „Mode switch“ vyberete vhodnou sondu na obličej nebo na oči.
3. Tlačítky „Time increase/decrease“ nastavíte pracovní čas v rozsahu 1 – 30 minut.
4. Stisknutím tlačítka „Start“/„Pause“ spustíte ošetření. Úroveň intenzity je nastavitelná od 1 do 10.
5. Chcete-li galvanickou sondu během ošetření zastavit, stiskněte tlačítko „Pause“.
6. Po ukončení ošetření vypněte přístroj tlačítkem „power switch“; tlačítko se v tu chvíli rozsvítí červeně. Po odpojení zástrčky ze zásuvky očistěte galvanickou sondu 75% alkoholem a uložte ji na suché místo.

Doporučená doba aplikace

1) Zavádění účinných látek: 2 minuty aniontová fáze, poté 6 minut kationtová fáze.
2) Čisticí ošetření: 6 minut aniontová fáze a 2 minuty kationtová fáze.

Upozornění při používání

⚠ Varování

- Válečkem nepracujte přímo na oční bulvě a nedotýkejte se jím oka.
- Výrobek je zakázáno používat u těchto osob a na těchto partiích:
  ① těhotné ženy a osoby s kovovými materiály v těle;
  ② alergičtí a onkologičtí klienti;
  ③ popáleniny, opařeniny, spálení od slunce, zánět nebo jiná poranění pokožky;
  ④ osoby s rozšířenými kapilárami.
- Je zakázáno zavádět silně alkalické roztoky, aby nedošlo k negativnímu chemickému poškození.
- Tato funkce se nesmí používat k jiným než kosmetickým účelům.

⚠ Pozor

- Kyselost a zásaditost kosmetických přípravků musí odpovídat pólu válečku. Při kladném pólu je zaváděná látka kyselá (+); při záporném pólu je zaváděná látka zásaditá (−). Pokud přípravek nemá kyselost nebo zásaditost přímo uvedenou, můžete ji ověřit lakmusovým papírkem.
- Při práci se válečkem nedotýkejte přímo ruční tyčinky. Při neopatrném kontaktu přístroj aktivuje automatickou ochranu a odpojí výstup.
- Klientům se silnější zrohovatělou vrstvou nejprve udělejte peeling a poté naneste zaváděnou látku rovnoměrně na ošetřovanou oblast.
- Různé látky (dvě nebo více chemikálií) se nesmí zavádět současně ani za sebou na totéž místo, bez ohledu na jejich náboj.
- Za běžných okolností je účinek iontoforézy nepřímo úměrný molekulové hmotnosti zaváděné látky: čím vyšší molekulová hmotnost, tím horší zavádění, a čím nižší molekulová hmotnost, tím lepší zavádění.

Parametry výrobku


Model výrobku	F-313B
Napájení	AC 100V–240V, 50/60Hz
Příkon	4W
Rozměry výrobku	20.8×23×7.5 cm
Rozměry balení	37×27.5×14 cm
Obsah balení	**Hlavní jednotka × 1**
	Polička na příslušenství × 1
	Válečková tyčinka × 2
	Ruční tyčinka × 2
	Napájecí kabel × 1

Kosmetický přístroj

◆ F-314B Vysoká frekvence (pouze pro kosmetické účely)



1. Vypínač
2. Zvýšení intenzity +
3. Snížení intenzity –
4. Prodloužení času +
5. Zkrácení času –
6. Start / Pauza

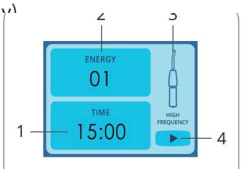

1. Čas
2. Úroveň intenzity
3. Stav činnosti
4. Provozní stav

Postup použití

1. Vysokofrekvenční rukojeť zasuňte do příslušného konektoru přístroje. Je-li přístroj správně připojen k napájecímu kabelu, tlačítko „Power switch“ svítí červeně. Stisknutím tlačítka „Power Switch“ přejdete do provozního režimu a tlačítko se na displeji zobrazí bíle. Přístroj je standardně nastaven na nepřetržitý vlnový výstup; intenzita na úrovni 1 je nastavena na 15 minut.
2. Podle potřeby si můžete zvolit z více režimů – na rukojeť vysokofrekvenční elektroterapie nasaďte vhodnou elektrodu.
3. Tlačítky „Time increase/decrease“ nastavíte pracovní čas v rozsahu 1 – 30 minut.
4. Stisknutím tlačítka „Start“/„Pause“ spustíte ošetření. Úroveň intenzity je nastavitelná od 1 do 10.
5. Chcete-li sondu během ošetření zastavit, stiskněte tlačítko „Pause“.
6. Po ukončení ošetření vypněte přístroj tlačítkem „power switch“; tlačítko se v tu chvíli rozsvítí červeně. Po odpojení zástrčky ze zásuvky očistěte elektrodu 75% alkoholem a uložte ji na suché místo.

Doporučená doba aplikace

1) Mastná pleť: 10 až 15 minut
2) Suchá a dehydrovaná pleť: 3 až 5 minut

Upozornění: Kovovou část elektrody nevystavujte kontaktu s vodou


Upozornění při používání F-314B

⚠ Varování


- Je-li hlavní jednotka zapnutá, je zakázáno dotýkat se výstupního konektoru hlavní jednotky i výstupního konektoru rukojeti vysokofrekvenční elektroterapie.
- Elektrodu nemiřte přímo na oči ani se jí nedotýkejte oblasti očí.
- Výrobek je zakázáno používat u těchto osob a na těchto partiích:
  ① těhotné ženy a osoby s implantovanými přístroji (např. kardiostimulátor);
  ② osoby s cévními onemocněními a vysokou citlivostí pokožky;
  ③ osoby s kovovými implantáty nebo kovovými zubními náhradami v těle;
  ④ osoby s poraněními pokožky a jinými kožními problémy;
  ⑤ partie se silným ochlupením.
- Nepoužívejte pleťové přípravky s obsahem alkoholu – alkohol je vysoce hořlavý. Je-li potřebné tonikum s alkoholem, aplikujte jej až po použití tohoto výrobku.
- Během ošetření nedržte rukou místo spoje vysokofrekvenční rukojeti a elektrody – hrozí zásah elektrickým proudem.
- Setrvání na jednom místě pokožky nesmí přesáhnout 5 sekund.
- Tato funkce se nesmí používat k jiným než kosmetickým účelům.

⚠ Pozor

- Před použitím zkontrolujte, zda elektroda nebo kovová hlavice na ní není uvolněná a zda elektroda není prasklá nebo poškozená. V takovém případě ji nepoužívejte a ihned vyměňte.
- Intenzitu postupně snižte na nulu, vypněte přístroj vypínačem a vytáhněte zástrčku ze zásuvky dříve, než elektrodu nasadíte nebo vyjmete.
- Při nasazování a vyjímání elektrody si nejprve nasaďte gumové rukavice a elektrodu držte palcem a ukazovákem: zasuňte ji až na dno otvoru, dokud nedrží pevně, a netlačte na ni dlaní, aby sklo neprasklo a nezpůsobilo poranění. Je zakázáno tahat za elektrodu prudce, aby se kovová hlavice neodlomila nebo nerozbila a nezpůsobila poranění.

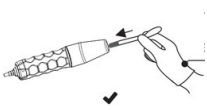

Používejte gumové rukavice, elektrodu držte palcem a ukazovákem a zasuňte ji až na doraz.

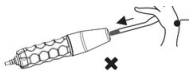


Používejte gumové rukavice, elektrodu nezatlačujte dlaní.

- Při používání způsobuje vysokonapěťový výstup z elektrody rušení.
- Je zakázáno přibližovat se s vysokofrekvenčním kosmetickým přístrojem k hlavní jednotce a k jiným elektrickým spotřebičům. Rušení může způsobit nefunkčnost nebo poškození hlavní jednotky.
- Je-li elektroda blíže než 2,5 cm od pokožky, ale nedotýká se jí, a jiskření dráždí pokožku, ihned snižte intenzitu. Pokud klient jiskření i nadále cítí, přiložte mu na obličej kousek suché bavlněné utěrky (nylonové ani jiné syntetické utěrky nejsou povoleny).
- Během ošetření držte elektrodu stále na pokožce klienta. Při nepřímé vysokofrekvenční aplikaci musí být při zapínání a vypínání přístroje jedna ruka stále v kontaktu s pokožkou klienta, nikdy ji neoddalujte. Jinak obě strany pocítí proud, který je nepříjemný.
- Po použití nejprve vypněte napájení, poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyjměte elektrodu z vysokofrekvenční rukojeti; elektrodu vysterilizujte, nechte vyschnout a uložte do boxu na příslušenství.


Parametry výrobku

Model výrobku	F-314B
Napájení	AC 100V–120V nebo AC 220V–240V, 50/60Hz
Příkon	15W
Rozměry výrobku	20.8×23×7.5 cm
Rozměry balení	37×27.5×14 cm
Obsah balení	**Hlavní jednotka × 1**
	Polička na příslušenství × 1
	Rukojeť vysokofrekvenční elektroterapie × 1
	Lžičková elektroda × 1
	Bodová elektroda × 1
	Hranatá elektroda × 1
	Hřibová elektroda × 1
	Napájecí kabel × 1

◆ F-315B Rotační kartáček

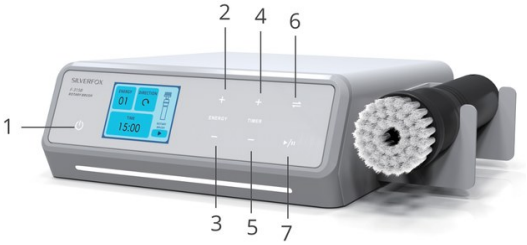

1. Vypínač
2. Zvýšení intenzity +
3. Snížení intenzity –
4. Prodloužení času +
5. Zkrácení času –
6. Přepínač režimů
7. Start / Pauza

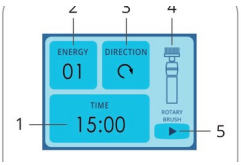

1. Čas
2. Úroveň intenzity
3. Směr otáčení
4. Stav činnosti
5. Provozní stav

Postup použití

1. Rotační kartáček zasuňte do příslušného konektoru přístroje. Je-li přístroj správně připojen k napájecímu kabelu, tlačítko „Power switch“ svítí červeně. Stisknutím tlačítka „Power Switch“ přejdete do provozního režimu a tlačítko se na displeji zobrazí bíle. Přístroj je standardně nastaven na výstupní režim; intenzita na úrovni 1 je nastavena na 15 minut.
2. Podle potřeby si můžete zvolit z více režimů – na rukojeť rotačního kartáčku nasaďte vhodnou brusnou hlavici.
3. Stisknutím tlačítka přepínače režimů zvolíte podle potřeby vhodný režim: otáčení po směru nebo proti směru hodinových ručiček.
4. Tlačítky „Time increase/decrease“ nastavíte pracovní čas v rozsahu 1 – 30 minut.
5. Stisknutím tlačítka „Start“/„Pause“ spustíte ošetření. Úroveň intenzity je nastavitelná od 1 do 10.
6. Chcete-li přístroj během ošetření zastavit, stiskněte tlačítko „Pause“.
7. Po ukončení ošetření vypněte přístroj tlačítkem „power switch“; tlačítko se v tu chvíli rozsvítí červeně. Po odpojení zástrčky ze zásuvky očistěte rukojeť rotačního kartáčku a brusnou hlavici 75% alkoholem a uložte je na suché místo.

Doporučená doba aplikace

Čas přizpůsobte stavu pokožky, obvykle ošetření nepřesahuje 10 minut.

Upozornění při používání

F-315B

⚠ Varování

- Nepoužívejte v oblasti pod očima.
- Funkci kartáčku je zakázáno používat u těchto skupin:
  ① alergičtí klienti;
  ② popáleniny, opařeniny, spálení od slunce, zánět nebo jiná poranění pokožky.

⚠ Pozor

- Před použitím zkontrolujte, zda je hlavice kartáčku pevně nasazená na rukojeti.
- Kartáček nepoužívejte tak, že držíte samotnou hlavici kartáčku.
- Hlavici kartáčku nenasazujte ani nevyměňujte během používání.
- Nebrzděte otáčení kartáčku rukama ani jinými předměty.
- Funkci kartáčku nepoužívejte příliš dlouho, aby se rukojeť kartáčku nepřehřála.
- Před kontaktem s pokožkou klienta otočte hlavici kartáčku dolů. Při kontaktu s pokožkou klienta tlačte jemně, aby to klientovi nebylo nepříjemné.


Parametry výrobku

Model výrobku	F-315B
Napájení	AC 100V–240V, 50/60Hz
Příkon	25W
Rozměry výrobku	20.8×23×7.5 cm
Rozměry balení	37×27.5×14 cm
Obsah balení	**Hlavní jednotka × 1**
	Polička na příslušenství × 1
	Malý kartáček × 1
	Velký kartáček × 1
	Malá pískovcová brusná hlavice × 1
	Velká pískovcová brusná hlavice × 1
	Napájecí kabel × 1

◆ F-316B Vakuum a sprej



1. Vypínač
2. Zvýšení intenzity +
3. Snížení intenzity –
4. Prodloužení času +
5. Zkrácení času –
6. Přepínač režimů
7. Start / Pauza

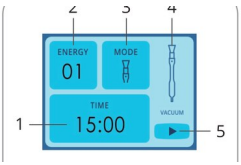

1. Čas
2. Úroveň intenzity
3. Volba režimu
4. Stav činnosti
5. Provozní stav

Postup použití

1. Vzduchovou hadičku zasuňte do konektoru vzduchové hadičky na hlavní jednotce. Je-li přístroj správně připojen k napájecímu kabelu, tlačítko „Power switch“ svítí červeně. Stisknutím tlačítka „Power Switch“ přejdete do provozního režimu a tlačítko se na displeji zobrazí bíle. Přístroj je standardně nastaven na výstupní režim; intenzita na úrovni 1 je nastavena na 15 minut.
2. Stisknutím tlačítka přepínače režimů zvolíte podle potřeby vhodný režim: odsávání (Suction) nebo hydratace (Hydration). Zvolíte-li režim odsávání, musíte nasadit vhodnou skleněnou pipetu.
3. Tlačítky „Time increase/decrease“ nastavíte pracovní čas v rozsahu 1 – 30 minut.
4. Stisknutím tlačítka „Start“/„Pause“ spustíte ošetření. Úroveň intenzity je nastavitelná od 1 do 10.
5. Chcete-li přístroj během ošetření zastavit, stiskněte tlačítko „Pause“.
6. Po ukončení ošetření vypněte přístroj tlačítkem „power switch“; tlačítko se v tu chvíli rozsvítí červeně. Po odpojení zástrčky ze zásuvky očistěte hydratační nástavec, odsávací pero a skleněnou pipetu 75% alkoholem a uložte je na suché místo.

Doporučená doba aplikace

Odsávání i hydratace nejvýše 10 minut

Upozornění při používání

F-316B

⚠ Varování

- Funkci odsávání nepoužívejte na očích a v jejich okolí.
- Funkce odsávání a spreje je zakázáno používat u těchto osob:
  ① alergičtí klienti;
  ② popáleniny, opařeniny, spálení od slunce, zánět nebo jiná poranění pokožky.


⚠ Pozor

- Není-li po zapnutí přístroje cítit sání, je to běžný jev. Chvíli počkejte a sání se obnoví.
- Není-li rozprašování hydratačního nástavce dostatečné, upravte je regulačním kolečkem na konci nástavce.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda skleněná pipeta není prasklá nebo rozbitá. V takovém případě ji nepoužívejte a ihned vyměňte.
- Skleněnou pipetou nesetrvávejte na jednom místě příliš dlouho. Odsávacím perem pohybujte rychle, aby nedošlo k poranění pokožky.
- Dbejte na to, abyste trysku nezasunuli do odsávacího konektoru – kosmetický přípravek by se nasál do vzduchového čerpadla a poškodil hlavní jednotku.
- Za vzduchovou hadičku netahejte prudce, aby se nepoškodila.
- Po použití musí být přístroj odpojen od napájení.


Parametry výrobku

Model výrobku	F-316B
Napájení	AC 100V–240V, 50/60Hz
Příkon	65W
Rozměry výrobku	20.8×23×7.5 cm
Rozměry balení	37×27.5×14 cm
Obsah balení	**Hlavní jednotka × 1**
	Polička na příslušenství × 1
	Rukojeť odsávacího pera × 1
	Skleněná pipeta s plochým ústím × 1
	Skleněná pipeta s kulatým ústím × 1
	Skleněná pipeta se špičatým ústím × 1
	Příslušenství přístroje × 1
	Napájecí kabel × 1

◆ F-317B Radiofrekvence (pouze pro kosmetické účely)

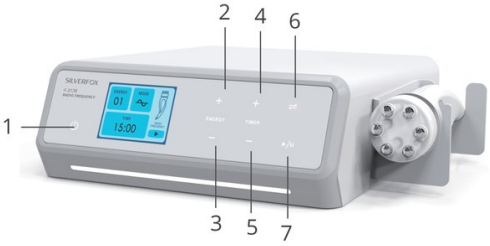

1. Vypínač
2. Zvýšení intenzity +
3. Snížení intenzity –
4. Prodloužení času +
5. Zkrácení času –
6. Přepínač režimů
7. Start / Pauza

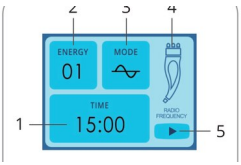

1. Čas
2. Úroveň intenzity
3. Volba režimu sondy
4. Stav činnosti
5. Provozní stav

Postup použití

1. RF (radiofrekvenční) sondu zasuňte do konektoru hlavní jednotky. Je-li přístroj správně připojen k napájecímu kabelu, tlačítko „Power switch“ svítí červeně. Stisknutím tlačítka „Power Switch“ přejdete do provozního režimu a tlačítko se na displeji zobrazí bíle. Přístroj je standardně nastaven na nepřetržitý vlnový výstup; intenzita na úrovni 1 je nastavena na 15 minut.
2. Stisknutím tlačítka přepínače režimů zvolíte podle potřeby vhodný režim.
3. Tlačítky „Time increase/decrease“ nastavíte pracovní čas v rozsahu 1 – 30 minut.
4. Stisknutím tlačítka „Start“/„Pause“ spustíte ošetření RF sondou. Úroveň intenzity je nastavitelná od 1 do 10 tlačítky „Energy increase/decrease“.
5. Chcete-li přístroj během ošetření zastavit, stiskněte tlačítko „Pause“.
6. Po ukončení ošetření vypněte přístroj tlačítkem „power switch“; tlačítko se v tu chvíli rozsvítí červeně. Po odpojení zástrčky ze zásuvky očistěte RF sondu 75% alkoholem a uložte ji na suché místo.

Upozornění při používání

⚠ Varování

- Výrobek používejte při jmenovitém napětí, které mu odpovídá, a dbejte na to, aby byla zástrčka úplně zasunutá, jinak hrozí zásah elektrickým proudem nebo požár.
- Nepoužívejte v koupelně ani ve vlhké místnosti – hrozí zásah elektrickým proudem nebo požár.
- Nepoužívejte v prostředí s barvami, nátěry, kyslíkem a jinými hořlavými a výbušnými látkami.
- Pokud funkci nepoužíváte, stiskněte tlačítko pauzy.
- Tato funkce se nesmí používat u osob se srdečním onemocněním, cukrovkou, hypertyreózou, zhoubným nádorem, těžkou hypertenzí, kovovým implantátem nebo kardiostimulátorem, epilepsií a kožními onemocněními včetně rakoviny kůže. Používají-li výrobek osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, případně osoby bez zkušeností a znalostí (včetně dětí), musí na ně dohlížet odpovědná osoba a odpovídat za jejich bezpečnost. Zabraňte dětem, aby s výrobkem manipulovaly a hrály si s ním.
- Výrobek nesmí používat těhotné ženy, kojící ženy a ženy během menstruace.
- Nepoužívejte na poraněných místech a kloubech, aby se nenarušilo hojení ran.
- Tato funkce se nesmí používat k jiným než kosmetickým účelům.

⚠ Pozor

- Doporučuje se, aby setrvání na jednom místě pokožky nepřesáhlo 5 sekund, aby nedošlo k popálení.
- Při ošetření se sondou vyhýbejte oční bulvě a štítné žláze.
- Po ošetření sondu vydezinfikujte 75% alkoholem, nechte důkladně vyschnout a uložte.
- Tato funkce se nedoporučuje na místa, kde byly aplikovány umělé výplně, například silikonový gel.
- Před použitím této funkce se doporučuje odložit všechny kovové doplňky.


Parametry výrobku

Model výrobku	F-317B
Napájení	AC 100V–240V, 50/60Hz
Příkon	60W
Rozměry výrobku	20.8×23×7.5 cm
Rozměry balení	37×27.5×14 cm
Obsah balení	**Hlavní jednotka × 1**
	Polička na příslušenství × 1
	Příslušenství RF (radiofrekvenční) sondy × 1
	Napájecí kabel × 1

◆ F-318B Studené a teplé kladívko



1. Vypínač
2. Zvýšení intenzity +
3. Snížení intenzity –
4. Prodloužení času +
5. Zkrácení času –
6. Přepínač režimů
7. Start / Pauza

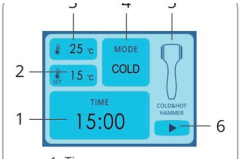

1. Čas
2. Nastavená teplota
3. Aktuální teplota
4. Volba režimu sondy
5. Stav činnosti sondy
6. Provozní stav

Postup použití

1. Studené a teplé kladívko zasuňte do konektoru hlavní jednotky. Je-li přístroj správně připojen k napájecímu kabelu, tlačítko „Power switch“ svítí červeně. Stisknutím tlačítka „Power Switch“ přejdete do provozního režimu a tlačítko se na displeji zobrazí bíle. Přístroj je standardně nastaven na ohřev. Výchozí nastavení je stabilních 35 °C na 15 minut.
2. Stisknutím tlačítka přepínače režimů zvolíte podle potřeby vhodný režim.
3. Tlačítky „Time increase/decrease“ nastavíte pracovní čas v rozsahu 1 – 30 minut.
4. Stisknutím tlačítka „Start“/„Pause“ spustíte ošetření studeným a teplým kladívkem. Úroveň intenzity je nastavitelná od 1 do 10 tlačítky „Energy increase/decrease“.
5. Chcete-li studené a teplé kladívko během ošetření zastavit, stiskněte tlačítko „Pause“.
6. Po ukončení ošetření vypněte přístroj tlačítkem „power switch“; tlačítko se v tu chvíli rozsvítí červeně. Po odpojení zástrčky ze zásuvky očistěte studené a teplé kladívko 75% alkoholem a uložte je na suché místo.

Doporučená doba aplikace

Čas přizpůsobte ošetřované oblasti a stavu pokožky,
obvykle ošetření trvá 10 až 15 minut.

Upozornění při používání

⚠ Varování

- Tato funkce je zakázána u těchto osob a na těchto partiích:
  ① klienti s opakovanou vyrážkou v jizvě a alergičtí klienti;
  ② popáleniny, opařeniny, spálení od slunce, zánět nebo jiná poranění pokožky;
  ③ osoby s imunosupresivními onemocněními se sníženou imunitou nebo osoby užívající imunosupresiva;
  ④ operační rány za poslední 3 měsíce.
- Kosmetička nesmí odejít, dokud kladívko pracuje, aby nedošlo k úrazu.

⚠ Pozor

- Studené a teplé kladívko se smí používat pouze v interiéru, doporučuje se při teplotě kolem 25 °C. Jeho funkci ovlivňuje okolní teplota – při příliš vysoké nebo příliš nízké teplotě nemusí dosáhnout požadované pracovní teploty a očekávaného účinku.
- Po každém zapnutí kosmetického přístroje a po přepnutí funkce chladu a tepla chvíli počkejte, dokud kladívko nedosáhne nastavené teploty. Za běžných okolností trvá náběh teploty po zapnutí asi 5 minut; při přepínání mezi teplem a chladem se teplota mění asi 3 minuty.
- Při používání nezakrývejte vzduchovou štěrbinu kolem kladívka, aby v něm nekondenzovala voda a nedošlo ke zkratu.
- Při ošetření přikládejte kladívko těsně na pokožku; při ošetřování čela a čelní kosti tlačte jemně.
- Je-li teplota kladívka vysoká, nesetrvávejte na jednom místě pokožky.
- Studené a teplé kladívko nepoužívejte jako poklepový nástroj.
- Jsou-li na obou koncích hlavice kladívka škrábance, před použitím vyměňte příslušenství za nové.
- Netahejte nadměrně za spirálový kabel kladívka, dbejte na rozsah jeho pohybu.


Parametry výrobku

Model výrobku	F-318B
Napájení	AC 100V–240V, 50/60Hz
Příkon	35W
Rozměry výrobku	20.8×23×7.5 cm
Rozměry balení	37×27.5×14 cm
Obsah balení	**Hlavní jednotka × 1**
	Polička na příslušenství × 1
	Příslušenství studeného a teplého kladívka × 1
	Napájecí kabel × 1

◆ F-319B Diamantová dermabraze



1. Vypínač
2. Zvýšení intenzity +
3. Snížení intenzity –
4. Prodloužení času +
5. Zkrácení času –
6. Start / Pauza

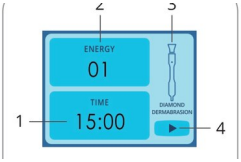

1. Čas
2. Úroveň intenzity
3. Stav činnosti
4. Provozní stav

Postup použití

1. Odsávací pero nebo tyčinku zasuňte do konektoru hlavní jednotky. Je-li přístroj správně připojen k napájecímu kabelu, tlačítko „Power switch“ svítí červeně. Stisknutím tlačítka „Power Switch“ přejdete do provozního režimu a tlačítko se na displeji zobrazí bíle. Přístroj je standardně nastaven na úroveň 1 na 15 minut.
2. Zvolte vhodnou mikrokrystalickou brusnou hlavici podle ošetřované oblasti a požadovaného účinku.
3. Tlačítky „Time increase/decrease“ nastavíte pracovní čas v rozsahu 1 – 30 minut.
4. Stisknutím tlačítka „Start“/„Pause“ spustíte ošetření odsávací tyčinkou. Úroveň intenzity je nastavitelná od 1 do 10 tlačítky „Energy increase/decrease“.
5. Chcete-li odsávací tyčinku během ošetření zastavit, stiskněte tlačítko „Pause“.
6. Po ukončení ošetření vypněte přístroj tlačítkem „power switch“; tlačítko se v tu chvíli rozsvítí červeně. Po odpojení zástrčky ze zásuvky očistěte odsávací tyčinku a mikrokrystalickou brusnou hlavici 75% alkoholem a uložte je na suché místo.

Upozornění při používání

⚠ Varování

- Tato funkce není vhodná pro osoby s vysokým krevním tlakem, srdečním onemocněním a cukrovkou.
- Výrobek nesmí používat těhotné ženy, kojící ženy a ženy během menstruace.
- Použití je zakázáno u osob s infekčními onemocněními a onkologickým onemocněním.
- Zakázáno je použití u osob, které v průběhu posledního roku absolvovaly aplikaci botulotoxinu.
- Osoby s jizevnatou tkání a nedostatkem kolagenu tuto funkci nesmí používat, jinak dojde k trvalému poškození pokožky.
- Tato funkce se nesmí používat k jiným než kosmetickým účelům.
- Zabraňte tomu, aby se k výrobku dostaly děti a hrály si s ním – hrozí nebezpečí.

⚠ Pozor

- Před ošetřením zhodnoťte stav pokožky klienta a zvolte vhodnou brusnou hlavici a přiměřené sání.
- Po každém použití je potřeba vyčistit nebo vyměnit filtr v odsávací tyčince.
- Po ošetření umyjte obličej vodou.
- Po ošetření brusnou hlavici vydezinfikujte 75% alkoholem a uložte ji na suché a vhodné místo.

Parametry výrobku

Model výrobku	F-319B
Napájení	AC 100V–240V, 50/60Hz
Příkon	30W
Rozměry výrobku	20.8×23×7.5 cm
Rozměry balení	37×27.5×14 cm
Obsah balení	**Hlavní jednotka × 1**
	Polička na příslušenství × 1
	Mikrobrusné příslušenství (včetně 9 druhů mikrobrusných hlavic) **× 1**
	Napájecí kabel × 1

Řešení problémů

Porucha	Příčina	Řešení
Hlavní jednotka nefunguje nebo se zasekává.	1. Bez napájení.	1. Zkontrolujte, zda není spálená pojistka v pojistkovém pouzdře napájecího modulu. Je-li spálená, vyměňte ji za pojistku se stejnými parametry. 2. Stiskněte tlačítko start, po zapnutí se rozsvítí.
	2. Napájecí kabel není správně zasunutý nebo připojený.	2. Napájecí kabel správně zasuňte nebo připojte.
Displej nefunguje.	1. Bez napájení.	1. Zapněte napájení.
Sonda příslušenství nefunguje.	1. Špatný kontakt konektoru.	1. Odpojte výstupní kabel a znovu jej zasuňte do konektoru.
Slabý výkon studeného a teplého kladívka, ultrazvuku, špachtle, RF, galvaniky a dalšího příslušenství.	1. Není správně nastavený stupeň; 2. Vysoká teplota příslušenství snižuje výstupní výkon.	1. Nastavte vyšší stupeň; 2. Používejte přiměřeně, nenechávejte zapnuté příliš dlouho. Když příslušenství nepoužíváte, vypněte napájení.
Dermabraze má slabé sání.	1. Není správně nastavený stupeň; 2. Dermabraze je uvnitř ucpaná; 3. Opotřebovaná vzduchová hadička; 4. Spoj mezi vzduchovou hadičkou a odsávacím perem je uvolněný.	1. Nastavte stupeň a upravte regulační ventil vzduchu; 2. Vyměňte příslušenství dermabraze; 3. Vyměňte vzduchovou hadičku za novou a zasuňte ji do konektoru.
Rozprašovač slabě rozprašuje.	1. Není správně nastavený stupeň; 2. Hydratační nástavec je uvnitř ucpaný; 3. Opotřebovaná vzduchová hadička; 4. Spoj mezi vzduchovou hadičkou a hydratačním nástavcem je uvolněný; 5. V nádobce je málo vody.	1. Nastavte vyšší stupeň; 2. Vyměňte příslušenství hydratačního nástavce; 3. Vyměňte vzduchovou hadičku za novou a zasuňte ji do konektoru; 4. Sledujte množství vody v nádobce a včas ji doplňte.
Odsávací pero slabě saje.	1. Není správně nastavený stupeň; 2. Odsávací trubice pera je uvnitř ucpaná; 3. Opotřebovaná vzduchová hadička; 4. Spoj mezi vzduchovou hadičkou a odsávacím perem je uvolněný.	1. Nastavte vyšší stupeň; 2. Vyměňte nástavec odsávacího pera; 3. Vyměňte vzduchovou hadičku za novou a zasuňte ji do konektoru.
Slabý výkon vysokofrekvenční elektroterapie.	1. Není správně nastavený stupeň; 2. Opotřebení po dlouhodobém používání elektrody.	1. Nastavte vyšší stupeň; 2. Vyměňte příslušenství elektroterapie.
Hlavní jednotka vibruje.	1. Ucpané příslušenství.	1. Zkontrolujte, zda není ucpaná vzduchová hadička příslušenství.

Pokud se problém ani po uvedených krocích nevyřeší, obraťte se na servisní středisko nebo dodavatele.

Fabulo

Dovozce: iM3 s.r.o.
Malotejedská 515/8, 929 01 Dunajská Streda
Slovensko
www.fabulo.cz



Staré nebo nefunkční spotřebiče nelikvidujte v domovním odpadu; odevzdejte je na veřejných sběrných místech.

▲ Před použitím zkontrolujte specifikaci výrobku. Tento návod má jen informativní charakter. Specifikace se mohou změnit bez upozornění.